

微生物関連総合カタログ

2023



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

ご挨拶

弊社は昭和7年（1932年）、東京・本郷の地で祖父・杉山元吉が医療用ガラス器具、理化学機器の販売会社として創業いたしました。

以来多くのユーザー様、お取引先様、各ご専門分野の研究者・先生方に支えられ、昨年90周年を迎えることができました。

創業以来、理化学・医療の分野に軸足を置き、各時代の市場環境、お客様のニーズ、社会の要請に応じて取扱い製品を変遷・拡大させてまいりました。

今では微生物事業部、理化学事業部、機能容器事業部の3部門体制を敷き、それぞれが高い専門性と独自性を活かし、「当社しかやらない」、「当社だからこそできる」ユニークな製品・サービスをお客様にお届けすることを心掛け、ビジネスを展開しております。

翻って、3年前から猛威を振るってきた新型コロナウイルスによって世の中は大きく変貌し、これに従い弊社の事業も様々に変化・対応して参りました。

感染は一時期に比べ規模と勢いは落ち着いては来たものの、未だ収束に向かっていません。弊社は今後も片時も気を抜くことなく、医療・検査の現場をサポートし、安心して安全な社会の実現に向けて全社一丸となって、知恵を出し、汗をかいて行く所存です。

皆様におかれましては、引き続きご指導・ご支援賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

株式会社スギヤマゲン
代表取締役 杉山 竜介

細菌検査

アネロパック®	2
オブティスワブトランスポート・システム	8
新型染色トレイ	10
グラム染色コントロール・スライド	10
新型自動染色装置	11
真菌標本作製用染色・固定液(マイコパーム・ブルー)	12
カバースリップ・テープ(ファンギ・テープ)	12
真菌学教育用スライド	13
改良オーラミンO 染色キット	14
抗酸菌染色コントロール・スライド	14
喀痰溶解キット等(スナップ & ダイジェスト)	15
結核検体処分用 飛散防止コンテナ	15
チールネルゼン染色 加温染色用器具「かおんくん」	15
ブチレート・ディスク	16
馬尿酸塩ディスク	17
PYRディスク	18
2%デオキシコール酸ナトリウム水溶液	19
10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液	19
3%水酸化カリウム水溶液	20
スポットインドル試薬	21
3%過酸化水素水	22
0.5%硫酸水	23
ディスポループ	24
ミニエーゼ(ディスポループ)	25
ディスポーザブル ループ&ニードル	25
ステンレス・ループ&ニードル	26
白金線挟み・白金耳・代用線	27

遺伝子・ウイルス検査

ユニットランズ-RT トランスポートシステム	28
ウイルス輸送液	30
不活性化PCRメディア	30
ウイルス検査コントロール試料	31

検体採取・検体容器

ハイドラブロック・スワブ	32
ドライトランスポート・システム	34
ピュアブロックウルトラ・スワブ	36
エススティック	36
メディスワブーパウチ入り滅菌小包装スワブ	38
チューブ入り滅菌個包装スワブ(培地なし)	39
唾液採取セット	40
サリベット(唾液採取キット)	40
唾液採取用綿棒エススティック	40
喀痰採取容器	41
Microvette®微量採血管	42
ベンキャッチ(ベンキャッチ・採取コンテナセット)	43

検体輸送

バリアパウチセット A5R10	45
二次容器 バリアパウチ	46
吸水バッグ・吸水シート・吸水材	46
三次容器 バリアボックス	47
バイオボトル1L、2L、3L、バソパック1L、2L、 バリアトランクシングル	48

検査器材

マイクロチューブ	50
ラック、フリーズボックス	51
ピペットチップ	52
滅菌済コンテナ・喀痰採取容器	53
滅菌済V底遠心チューブ	53
採取コンテナ(未滅菌)	53
スポイト各種	54
シャーレ・スタック(三兄弟/新型)	56

検査関連機器

落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN™	59
LUMIN™ 落射蛍光モジュール	59
ヒートブロックシステム 高性能タイプHBWK-2	60
小型ロータリーミキサー強力型	60
新型電気滅菌器 SPEED STERIL	61
電気滅菌器(ループシネレーター)	61
電子着火式ブンゼンバーナー(フェーゴ)	61
高圧蒸気滅菌器(医療用) HV シリーズ	62
遠心分離機	63
安全キャビネット 傾斜10型クラスⅡ A2	64
安全キャビネット 卓上傾斜型クラスⅡ A2	66
卓上型クリーンベンチ	68
オートクレーブ用廃棄物袋「捨テリーパウチ」	68
簡易キャビネット	69
温度管理システム	70

感染対策商品

手洗いトレーニングキット「てあらいくん」	72
エアリアル	73
クリーンパーティション(クリーン仕様)	74
マスク専用 手動式自動販売機	75
感染対策商品	76
キャリット(院内外検体輸送容器)	78

価格一覧表…79

品番索引…83

品名索引…85

アネロパック®

- ➡ P.3 嫌気培養
- ➡ P.4 微好気培養
- ➡ P.4 炭酸ガス培養
- ➡ P.5 培地保存
- ➡ P.6 容器へのセット手順
- ➡ P.7 商品構成一覧表

特 徴

● 操作が簡単

水も触媒も必要なし。酸素吸収・炭酸ガス発生剤のアネロパックを容器に入れるだけで菌の発育しやすい環境が作り出されます。特殊なガス環境を必要とする嫌気性菌、微好気性菌、炭酸ガス要求菌が、好気性菌と同じ手軽さで培養できます。

● 優れた培養結果

剤の反応速度が速く、培養する菌に適したガス濃度を選択できるので培養結果が優れています。嫌気培養では CO₂ 濃度が高いため、大きなコロニーが得られます。

● 高い経済効果

お求めやすい価格です。大掛かりな設備も必要なく、経済効果の高い培養方法です。

30 年の実績のあるアネロパックシリーズ



嫌気培養

アネロパック®・ケンキ / アネロパウチ®・ケンキ
嫌気指示薬

炭酸ガス培養

アネロパック®・CO₂ / アネロパウチ®・CO₂

微好気培養

アネロパック®・微好気 / アネロパウチ®・微好気

培地保存

アネロパック®・キープ / アネロパウチ®・キープ

嫌気培養 酸素濃度 0.1%以下


炭酸ガス濃度15%以上

アネロパック®・ケンキ (A-03、A-02)


アネロパウチ®・ケンキ (A-13、A-213)

アネロパック®・ケンキ(3.5L) (A-06)

■アネロパック®・ケンキによるガス濃度変化の例

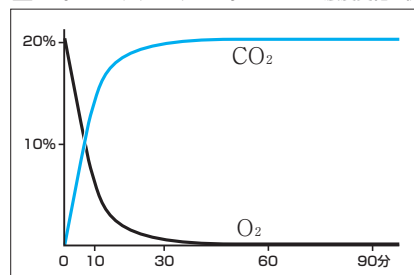

アネロパック・ケンキ

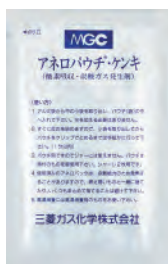

アネロパウチ・ケンキ



アネロパック・ケンキ(3.5L)

*白い紙包材の表面に褐色～黒色のシミが発生する場合がありますが、使用期限内であれば酸素吸収・炭酸ガス発生性能への影響はございません。

45℃以上での試験用

アネロパック®・ケンキ(高温菌用) (A-05、A-205)

炭酸ガス濃度7～15%


アネロパック®・ケンキ10% (薬剤感受性試験用) (A-09)

炭酸ガス5%前後を5時間維持

要冷蔵保存


アネロパック®・ケンキ5% (A-07)

■アネロパック®・ケンキ10%によるガス濃度変化の例

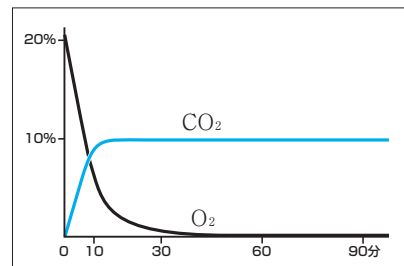

●アネロパック®・ケンキよりも低濃度の炭酸ガスを発生します。

■アネロパック®・ケンキ5%によるガス濃度変化の例

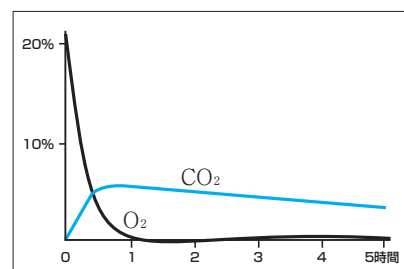

●用途:嫌気性菌の培養、細胞の低酸素実験など。
●CO₂濃度は約5時間維持され、その後低下します。

アネロパック・密閉容器適合一覧表

商品名	品番	角型ジャー				パウチ袋	
		A-112	A-119	A-110	A-111	A-98	A-58, A-65
		W213 × L280 × H12 大型(7L)	W170 × L240 × H80 中型(3.5L)	W135 × L197 × H95 標準型(2.5L)	W135 × L197 × H18 薄型(500ml)	W チェック付 スタンディングパウチ	W チェック付袋(標準) 専用パウチ袋(標準)
アネロパック・ケンキ(中/3.5L)	A-06		1個				
アネロパック・ケンキ	A-02,03,04	3個		1個		1個	
アネロパック・ケンキ10%	A-09			1個			
アネロパック・ケンキ5%	A-07			1個			
アネロパック・ケンキ(高温菌用)	A-05,205					1個	
アネロパウチ・ケンキ	A-12,13,213				1個		1個
アネロパック微好気(7L)	A-29	1個					
アネロパック微好気(標準ジャー用)	A-28			1個		1個※①	
アネロパウチ微好気(薄型ジャー用)	A-27				1個		
アネロパウチ微好気(パウチ袋用)	A-25						1個※②
アネロパック CO ₂	A-61,62	3個	1個	1個		1個※①	
アネロパウチ CO ₂	A-63				1個		1個※②

- ①必ずジャーレラックを併用してください。
- ②パウチ袋の組み合わせで使用する場合は必ずジャーレを2枚入れてください。
1枚だけの培養の場合でも、空のジャーレをもう一枚入れてください。

※価格は変更する場合がございます(2023年3月現在)

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品

微好気培養


酸素濃度6~13%、炭酸ガス2.5~9.5%

アネロパック®・微好気(7L) (A-29)

アネロパック®・微好気 (A-28)

アネロパウチ®・微好気(パウチ袋用) (A-25)

アネロパウチ®・微好気(薄型ジャー用) (A-27)

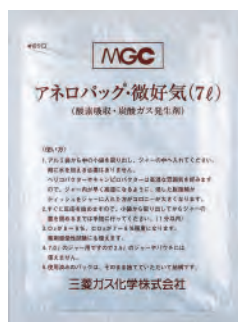


アネロパック・微好気(7L)



アネロパック・微好気




アネロパウチ・微好気(パウチ袋用)

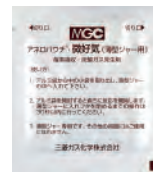

アネロパウチ・微好気(薄型ジャー用)

■アネロパック®・微好気 によるガス濃度変化の例

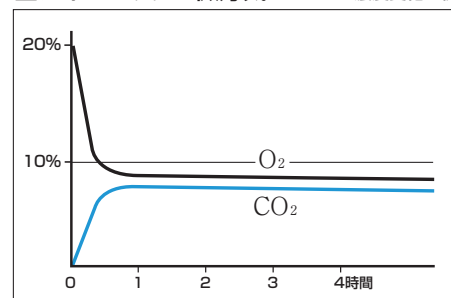

吸収した O₂ よりも少量の CO₂ が発生します。容器内はやや減圧され、ジャーの場合フタは少し開けにくくなります。

※青い紙包材の色が抜けたようになり、部分的に白く見える場合がありますが、使用期限内であれば酸素吸収・炭酸ガス発生性能への影響はございません。

炭酸ガス培養

炭酸ガス濃度 約5%


アネロパック®・CO₂ (A-61、A-62)

アネロパウチ®・CO₂ (A-63)




アネロパック・CO₂

●角型ジャー(薄型)にもご使用ください。

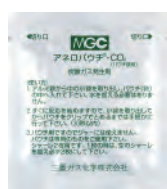


アネロパウチ・CO₂

■アネロパック®・CO₂ によるガス濃度変化の例

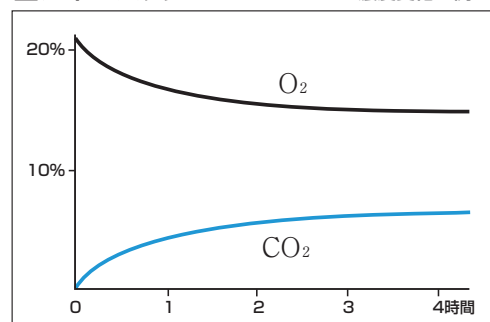

嫌気指示薬 (A-66)


要冷蔵保存

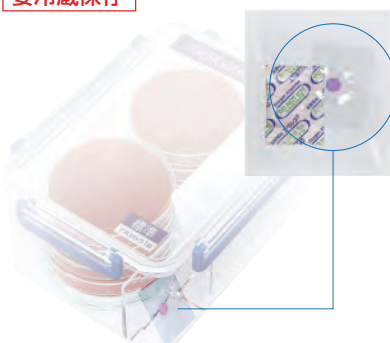

酸素の有無を色で確認できます。

- 角型ジャーの気密性確認のため、アネロパック(パウチ)・ケンキには嫌気指示薬のご使用をお勧めします。
- 常温便にてお届け致しますが、到着後は直ちに冷蔵庫に入れ、15℃以下で保存してください。
- 嫌気指示薬のフィルムには小さな針穴が開いています。この針穴からガスが透過しますので、このままお使いください。
- 錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。
- 嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。

アネロパック・ケンキ(高温菌用)、アネロパック・ケンキ5%には不向きです。

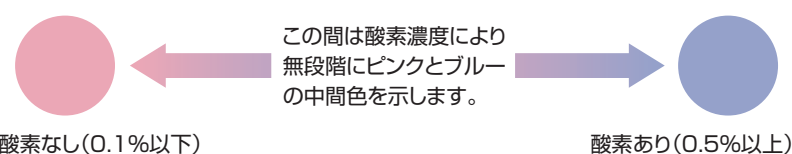


※印刷物なのでピンクとブルーの色は実物とは若干異なります。

角型ジャー・Wチャック付パウチ袋

角型ジャーはふ卵器内で積み重ねが可能。Wチャック付パウチ袋なら簡単に密閉空間を作れます。

ご注意

- 角型ジャーに使用できるのはアネロパック® だけです。反応機構の異なる他社のガス発生剤はご使用になれません。
- 角型ジャーは高温培養にはご使用になれません。スタンディングパウチをご利用ください。
- 角型ジャーをオートクレーブにかけると変形するおそれがあります。
- 角型ジャーの気密性を確保するため、パッキンおよびフタの溝部分に付着したゴミを時々掃除してください。

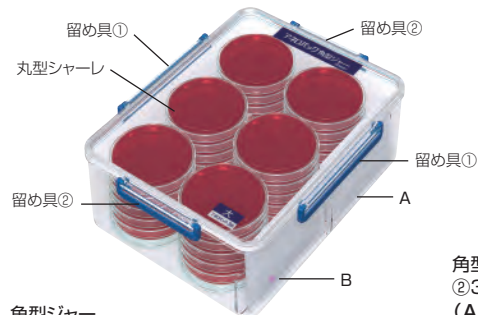

角型ジャー
①大型 (A-112)

間仕切の使用例

- A●剤を入れる
B●嫌気培養の際に嫌気指示薬を入れる。
●微好気培養の際に高湿にする場合は、水を20ml程度入れる。
水は直接入れるか、脱脂綿、濾紙などに含ませる。

角型ジャー		内寸(mm)/収容可能枚数※
①大型	7リットル	W213×L280×H112
	丸型シャーレ: 42枚	角1号シャーレ: 12枚
②3.5L	3.5リットル	W170×L240×H80
	丸型シャーレ: 15枚	角1号シャーレ: 4枚
③標準型	2.5リットル	W135×L197×H95
	丸型シャーレ: 12枚	—
④薄型	0.4リットル	W135×L197×H18
	丸型シャーレ: 2枚	—


ジャーの原料/本体・フタ: ポリカーボネート、留め具: ポリアセタール
原料としての耐性/耐熱温度: 140℃、耐冷温度: -30℃

- ★フタのみ、パッキンのみの販売もしています。
★取っ手が破損した場合はスベアのパーツを準備しております。
詳しくはお問い合わせください。

角型ジャーのフタの閉じ方・開け方

【閉じ方】フタを本体に正しく被せてから留め具を①②の順でそれぞれ2か所同時に掛けてください。片側の留め具を掛けてからフタを無理に閉めたり、フタが本体からずれた状態で留め具を掛けたりすると破損するおそれがあります。【角型ジャー ①大型 図参照】

【開け方】発生した炭酸ガスが培地に溶け、多少陰圧になって角型ジャーのフタが開きにくくなるありますが、その際はフタの4隅の1つを強く引っ張りあげてください。

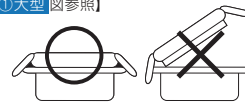

角型ジャー
②3.5L (A-119)

角型ジャー
③標準型 (A-110)

角型ジャー
④薄型 (A-111)



⑤Wチャック付スタンディングパウチ袋 (A-98)



⑥Wチャック付パウチ袋 (A-65)

パウチ袋	外寸(mm)/収容可能枚数※
⑤Wチャック付スタンディングパウチ袋	W220×L320 丸型シャーレ: 12枚
⑥Wチャック付パウチ袋	W155×L300 丸型シャーレ: 2枚


微好気培養・炭酸ガス培養の場合は、袋内の容積を保つため、必ずシャーレラックを併用してください

微好気培養・炭酸ガス培養で1枚だけ培養する場合は、袋内の容積を保つため、必ず空のシャーレをもう1枚入れてください

※シャーレの厚みにより異なります。


試験管立て(ステンレス製) (A-69)

- 3列×4=12本までの試験管を立てられます。
- 直径18mmまでの試験管に適用 (開口径19mm)。

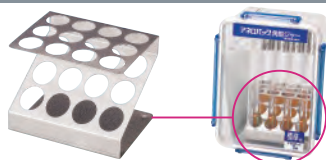

角型ジャー(標準型)での使用例

シャーレラック(ステンレス製)

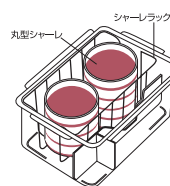

■角型ジャー用 (A-68)

収容可能枚数
丸型シャーレ(薄型)…10枚

■スタンディングパウチ用 (A-59)

収容可能枚数
丸型シャーレ(薄型)…12枚



培地保存

培地の脱酸素剤保存用

●袋ごと冷蔵庫で保存できます。嫌気チャンバーでの保存に比べ、高温による培地の乾燥もありません。



スタンディングパウチ用 アネロパック®・キープ

大量保存用 (A-37)
1セット(=2個)の脱酸素剤でφ90mm
シャーレが14枚まで



■スタンディングパウチでの保存

- 空気を追い出して袋の上部を密閉クリップで閉じてください。

角型ジャーにはご使用になれません。



専用パウチ袋用 アネロパック®・キープ

少量保存用 (A-39)
1個の脱酸素剤でφ90mmシャーレ
が6枚まで



■専用パウチ袋での保存

- 空気を追い出して密閉クリップで閉じてください。

薄型ジャーにはご使用になれません。




アネロパック (ケンキ・微好気・CO₂) と角型ジャー

ジャーは、培養するシャーレの枚数に応じてお選びいただけます。

1 シャーレを入れる

標準型には最大
6枚×2列を収容できます。

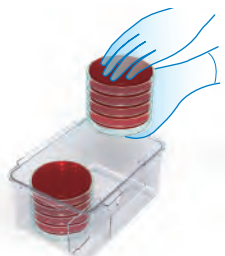

2 アルミ袋を開封する


アルミ袋を手で開封し、
内袋を取り出します。



すぐに反応が始まります。
速やかに3、4へ。
(密閉が終わるまで1分以内)

3 内袋を入れる


間仕切り部分に内袋を入れます。

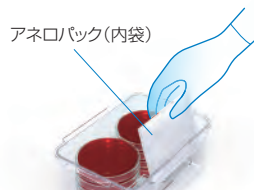

嫌気指示薬
気密性確認のため嫌気指示薬のご
使用をお勧めします。

4 密閉する

長辺・短辺の順に、向かい合った面どうし
(左右・上下)の留め具を同時に留め、
密閉します。

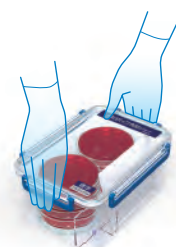


角型ジャーは、マイコプラズマ、百日咳菌などの長期培養の容器としても使用できます。

アネロパウチ (ケンキ・微好気・CO₂) とパウチ袋

1 シャーレを入れる

シャーレ2枚用です

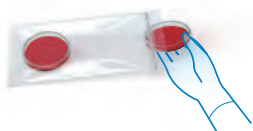

2 アルミ袋を開封する

速やかに3、4へ。
(密閉が終わるまで30秒以内)



3 内袋を入れる

嫌気指示薬のご使用をお勧めします。



4 密閉する

チャックをしっかり留めます。



使用上の注意 (ケンキ・微好気・CO₂ 共通)

- アルミ袋を破るとすぐに反応が始まります。内袋を取り出してから検体とともに密閉するまでの作業を、速やかに行ってください。(ジャー用…1分以内、パウチ袋用…30秒以内)

廃棄方法

- 使用済品は、余剰能力のため発熱することがあります。角型ジャー / パウチなどから取り出し、実験台の上などに重ならないように広げて30分ほど放置し、発熱が収まったことを確認してから捨ててください。オートクレーブ処理を行う場合は、発熱が収まってから実施してください。
- 未使用品を廃棄する場合は、アルミ袋より取り出し、実験台の上などに重ならないように広げて30分ほど放置し、発熱が収まったことを確認してから捨ててください。

品 番	品 名	入 数	価格(税別)
A-02	アネロバック・ケンキ(指示薬+クリップ)	各40個+1本	12,500円
A-03	// ・ケンキ	50個	12,500円
A-04	// ・ケンキ	20個	5,500円
A-05	// ・ケンキ(高温菌用)	50個	14,000円
A-205	// ・ケンキ(高温菌用)	30個	8,700円
A-06	// ・ケンキ(中/3.5リットル)	30個	11,000円
A-07	// ・ケンキ(5%) 細胞の虚血実験用 ※冷蔵保存	20個	8,000円
A-09	// ・ケンキ(10%) 薬剤感受性試験用	30個	10,400円
A-28	// ・微好気(標準ジャー用)	30個	7,500円
A-29	// ・微好気(大型ジャー7.0リットル用)	20個	11,500円
A-61	// ・CO ₂	20個	4,500円
A-62	// ・CO ₂	40個	8,600円
A-37	// ・キープ(指示薬無)	40個	6,400円
A-41	角型ジャー(標準)・ケンキシステム(標準ジャー+剤/指示薬+クリップ)	各20個+1個+1本	13,800円
A-12	アネロパウチ・ケンキ(指示薬+指示薬用クリップ付)	各40個+1本	11,200円
A-13	// ・ケンキ	50個	10,000円
A-213	// ・ケンキ	20個	4,400円
A-25	// ・微好気(パウチ袋用)	20個	4,200円
A-27	// ・微好気(薄型ジャー用)	20個	4,200円
A-63	// ・CO ₂	20個	4,200円
A-39	// ・キープ(指示薬無)	40個	3,800円
A-17	Wチャックパウチシステム・ケンキ(Wチャック+剤/指示薬各20+クリップ1)	各20個+20枚	8,200円
A-18	// ・微好気(Wチャック+剤)	20個+20枚	6,300円
A-110	角型ジャー(標準) 2.5リットル 間仕切有	1個	7,500円
A-111	// (薄型) 500ミリリットル //	1個	6,000円
A-112	// (大型) 7.0リットル //	1個	11,000円
A-119	// (中型) 3.5リットル //	1個	8,500円
A-58	パウチ袋(小) (W150×L330mm)	40枚	5,400円
A-65	Wチャックパウチ袋(小) (155×300)	40枚	4,800円
A-92	パウチ袋(中) (220×300)	30枚	5,600円
A-92W	Wチャックパウチ袋(中) (220×310)	20枚	5,200円
A-93	パウチ袋(大) (250×400)	30枚	6,600円
A-94	パウチ袋(特大) (300×440)	20枚	6,500円
A-98	Wチャック付スタンディングパウチ袋 (220×320)	20枚	5,500円
A-99	嫌気性パウチ(PT パウチ同等品)	500枚	19,000円
A-99-1	嫌気性パウチ(PT パウチ同等品)	50枚	2,800円
A-72	密閉クリップ・17L (パウチ用/A-58用)	20本	4,000円
A-74	// ・24L (A-92用)	10本	2,500円
A-75	// ・28L (A-93用)	10本	2,900円
A-76	// ・33L (300×440用/A-94用)	10本	3,500円
A-82	耐熱クリップ・24L (A-92用)	10本	3,500円
A-83	// ・28L (A-93用)	10本	4,200円
A-84	// ・32L (300×440用/A-94用)	10本	4,800円
A-66	嫌気指示薬 ※冷蔵保存	1個×40	3,400円
A-59	シャーレラック・スタンディングパウチ用	1個	5,000円
A-68	シャーレラック・標準ジャー用	1個	4,500円
A-69	試験管立て・標準ジャー用	2個	2,400円
A-51F	角型ジャー(標準/薄型・共通)のフタ(留具付・パッキン無)	1個	3,800円
A-51P	角型ジャー(標準/薄型・共通)のパッキンのみ	1個	900円
A-112F	角型ジャー(大)のフタ(留具付・パッキン無)	1個	5,900円
A-112P	角型ジャー(大)のパッキンのみ	1個	1,500円
A-119F	角型ジャー(中)のフタ(留具付・パッキン無)	1個	4,700円
A-119P	角型ジャー(中)のパッキンのみ	1個	1,100円
ACP-1	アネロバック・CO ₂ 滅菌グレート品	20個	6,000円
S-01	水素発生材	10個	1,900円

オプティスワブ トランスポート・システム



特徴

●検体回収率が高い！

ピューリタン社が特許取得済のハイドラフロック・スワブにより、効率よく検体を吸着・溶出します。

●幅広い検査法に対応！

オプティスワブ トランスポート・システムで採取・輸送した検体は、グラム染色や培養法はもちろん、PCR やイムノクロマト検査にも使用できます。自動塗抹装置でも使用可能です。

●幅広い菌種に対応！

好気性菌はもちろん、嫌気性菌や栄養要求菌も高い生存率で回収できます。

●検査の標準化を支援！

スワブに吸着した検体は液相培地に溶出され、均一な菌液として各種検査に使用できます。



使用方法



1 検体を採取します
ハイドラフロック・スワブは、大きな表面積により、効率的に検体を採取できます。




2 ブレークポイントで軸を折ります
スワブ先端を輸送チューブに差し込み、スワブの軸だけを下に折り曲げると、ブレークポイントで分離します。




3 キャップをして、液相培地に検体を溶出させます
ハイドラフロック・スワブは、液相培地に入れると、吸着した検体をすべて速やかに溶出します。

ピューリタン社 ハイドラフロック・スワブ ・・・先進のフロックスワブ・テクノロジー


ピューリタン社のハイドラフロック・スワブは様々な長さの、先端が枝分かれした繊維で構成されています。従来のような均一な長さのナイロン繊維を垂直に植毛したフロックスワブと異なり、ハイドラフロック・スワブでは、何百本ものポリエステル糸を撚り合わせた高密度の繊維を使用しています。その結果として、ハイドラフロック・スワブは、検体吸収のための非常に大きな表面積を実現、絡み合った繊維間のスペースに効率よく検体を保持し、液相培地への素早い溶出を可能にしています。最近行われた試験では、現在販売されているフロックスワブの中で、ハイドラフロック・スワブが最も高い吸収性能と溶出性能を持つことが確認されています。

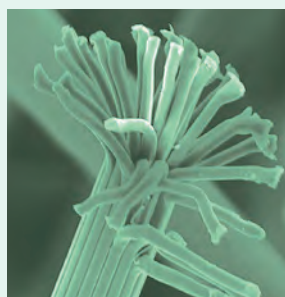

HydraFlock® 拡大写真 1000x

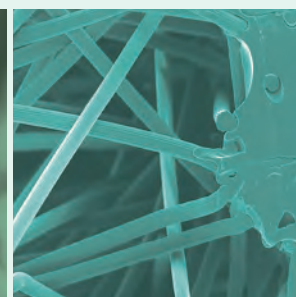

HydraFlock® 断面拡大 250x

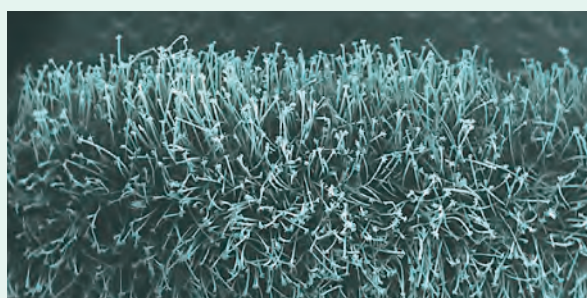

HydraFlock® 拡大写真 18x

①防漏型、自動スワブ装着式キャップ

スクリュー式のキャップは防漏型で、バイオセーフティの観点からも安心してお使いいただけます。ブレイクポイントで折ったスワブをチューブに入れてキャップを締めると、自動的にスワブがキャップに装着される仕組みになっており、その後のスワブの取り扱いに便利です。

②安全に多目的に使える輸送チューブ

輸送チューブは、従来式の検査方法や自動化機械に幅広く対応できるようなサイズ・形状に設計されています。輸送や保管をしやすいサイズ・形状で、強度も充分。安全に検体の輸送・保管が行えます。

③改良液相アミーズ培地

好気性菌、嫌気性菌、栄養要求菌の生存率を高く維持できる組成です。
(塩化ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、チオグリコール酸ナトリウム、リン酸一カリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム)

④ブレイクポイント

採取後、スワブ先端を輸送チューブに差し込み、輸送チューブを手で上向きに保持したままスワブの軸だけを下に折り曲げると、スワブ軸のブレイクポイント部分で簡単に分離します。スワブ先端部分だけを輸送チューブに収納し、余分な軸部分はそのまま廃棄します。検体採取時は長い軸で操作がしやすく、輸送・保管時は場所を取らないように設計されています。

⑤添加物なしの綿球で、純度の高い検体回収

ハイドラフロック・スワブは採取検体の純度を守るため、チップ繊維へのトリートメント加工は施してありません。



(スワブ材質：綿球＝ポリエステル・フロック繊維、軸＝ポリスチレン)

品番	チップ形状	輸送チューブ	サイズ 充填培地量	スワブチップ形状	ブレイク ポイント	包装単位	価格(税別)
LA-106			φ 12 × 80mm 1ml	ロング	80mm	50セット	10,600円
LA-116				ミニチップ			10,600円
LA-117				ウルトラファイン	100mm		

(※LA-106…口腔・咽頭向け、LA-116…目・耳・泌尿器・小児科向け、LA-117…耳鼻咽喉科向け)

医療機器製造販売届出番号 13B2X10572000001

〈製造販売業者〉 株式会社スギヤマゲン
〈外国製造業者〉 Puritan Medical Products Company LLC
(ピューリタン メディカル プロダクツ カンパニー エルエルシー)
国名：アメリカ合衆国

新型染色トレー

特徴

- グラム染色をその場で簡単に作業可能。持ち運びも簡単です。



単品

品名	品番	サイズ	内容量	入数	価格(税別)
染色トレー	TS-03-Z01	W420 × D150 × H62mm	500ml	1個	9,600円

標準セット(TS-03)

構成商品名	内容	価格(税別)
グラム染色液 パーミー M 染色ミニキット	100ml × 4本	—
染色液ラック	1個	
ディスポーザブルピンセット	2本	
ディスポ白金耳100本	1本	
グラム染色コントロールスライド	5枚	
スライドガラス(S-1215)	100枚	
スライドガラス立て	1個	
水洗用洗浄瓶	1個	
染色トレー	1個	
標準セット価格		29,600円




グラム染色コントロール・スライド

特徴

- 陽性コントロールとして *S. aureus* が、陰性コントロールとして *E. coli* が塗抹されています。
- 臨床検体の塗抹～染色を行えるスペースが印刷されています。
- データを書き込む欄が印刷されています。

品名	品番	入数	価格(税別)
グラム染色コントロール・スライド	SDL360	10枚	11,000円
グラム染色コントロール・スライド	SDL361	50枚	37,500円
グラム染色コントロール・スライド	SDL361-C-1	50枚	28,000円

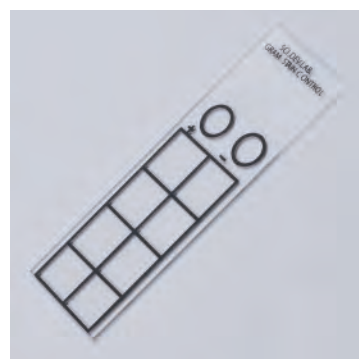


動画はこちら➡




新型自動染色装置

特 徴


- グラム染色、血液染色に使用可能です。
- 最大 20 枚のスライドガラスを染色可能です。
- タッチパネルで操作が簡単です。
- 染色方法、染色時間を任意に設定可能です。

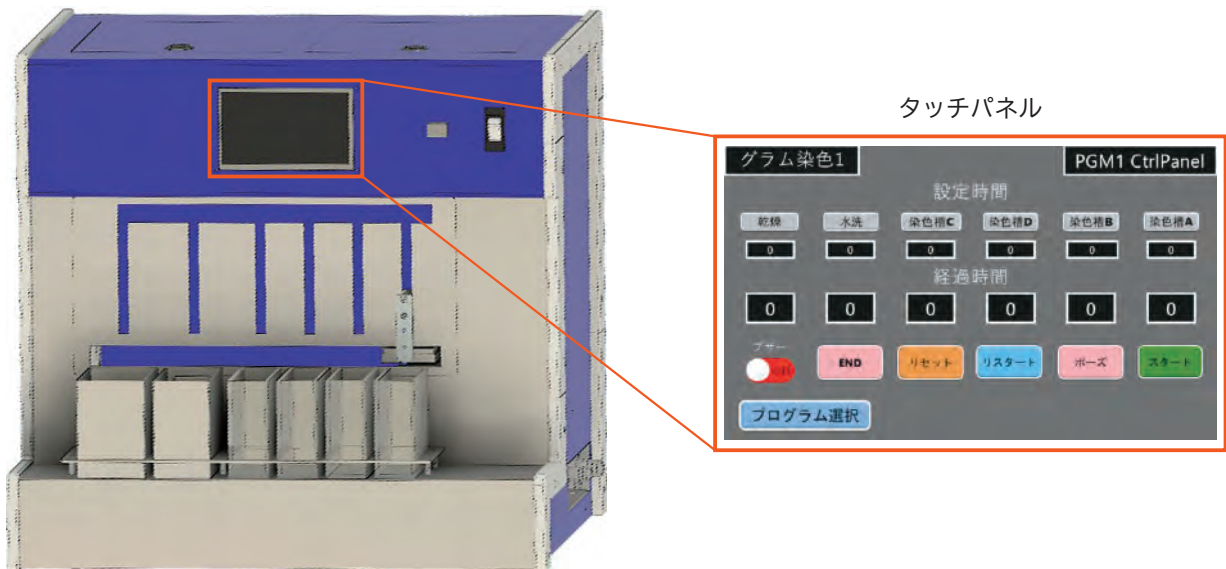

タッチパネル

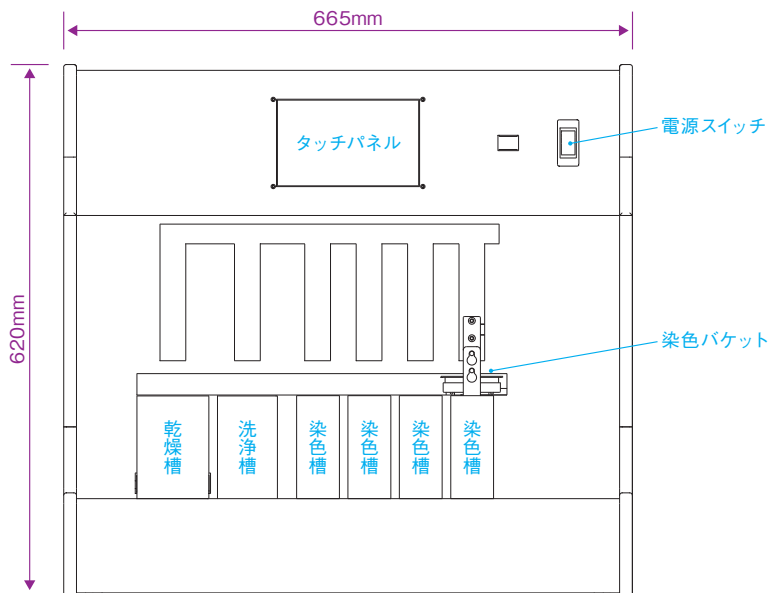

正面図

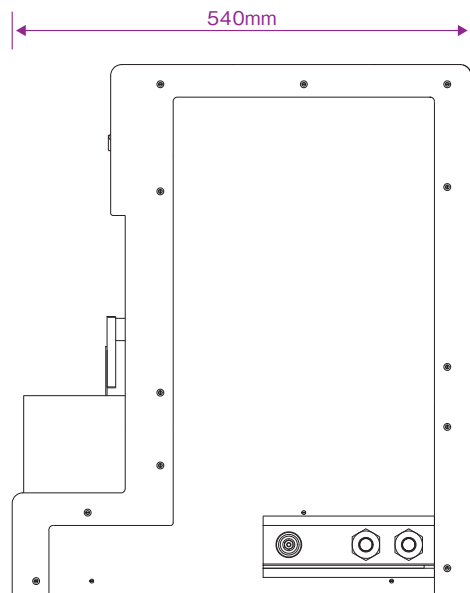

側面図

品 名	新型自動染色装置
品 番	GS-20B
外 寸	W665 × D540 × H620mm
重 量	約40kg
消 費 電 力	100V 5A
価 格 (税 別)	2,200,000円

真菌標本作製用染色・固定液（マイコパーム・ブルー）

特 徴

- 改良ラクトフェノール・コットン・ブルーによる、真菌標本作製のためのユニークな染色・固定液です。
- 長期間の保存に耐える真菌標本を簡単に作製できます。
- 使いやすい点眼ボトル入りです。

品 番	商 品 内 容	価 格 (税別)
SDL753	12ml 入りボトル 1本	15,000円



真菌標本作製用 カバースリップ・テープ（ファンギ・テープ）


特 徴

- 粘着テープにより分離培地上の真菌を採取し、そのままスライド・グラスに貼って標本が作製できます。
- セロファンテープよりも張りがあり、菌を採取しやすいのが特長です。
- マイコパーム・ブルーと併用すれば、カバーグラス・マニキュアを使用せずに簡便に標本が作製できます。


品 番	商 品 内 容	価 格 (税別)
SDL745	テープ22.85m (約360回分)	11,600円



動画はこちら↑

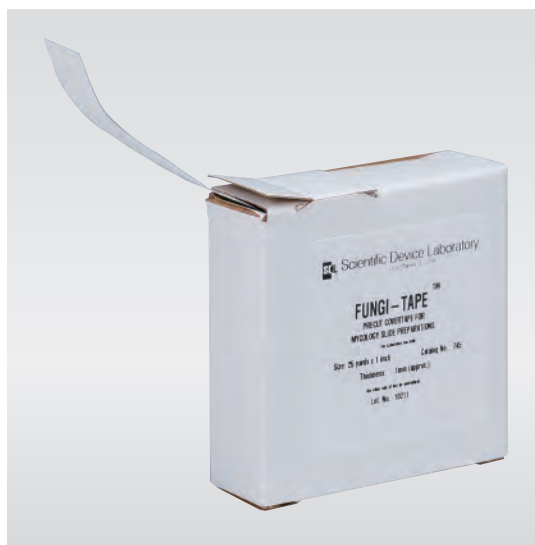

真菌学教育用スライド

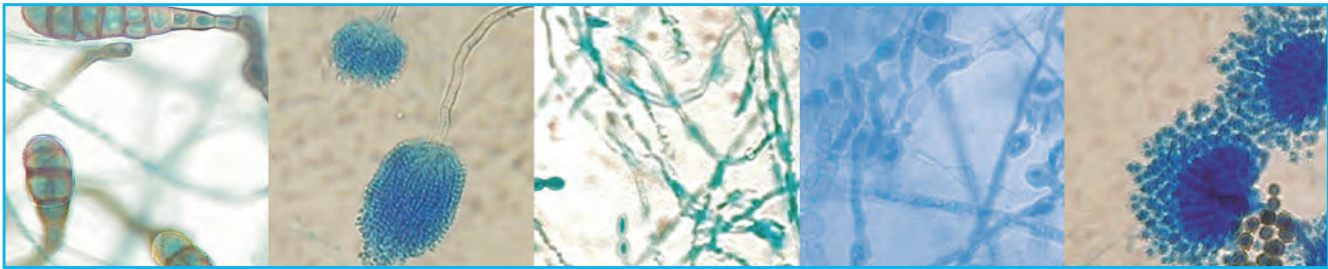

美しく、質の高い真菌の塗抹標本です。

標本は全てマイコパーム・ブルー（改良ラクトフェノール・コットンブルー）を使用して固定・染色されています。
ご注文は 1 回当たりスライド 10 枚以上からお受けします（全て異なる種類のスライドでも可能です）。
スライド 1 枚あたりの価格は 6,000 円（税別）です。

<菌種／品番リスト> ※メーカー在庫なくなり次第販売終了

菌 種	品 番	菌 種	品 番
<i>Cryptococcus neoformans</i>	SDL671-03	<i>T. ajelloi</i>	SDL674-09
<i>Geotrichum candidum</i>	SDL671-04	<i>T. mentagrophytes</i>	SDL674-13
<i>Hansenula</i> sp.	SDL671-05	<i>T. rubrum</i>	SDL674-14
<i>Rhizopus</i> sp.	SDL672-06	<i>Acremonium</i> sp.	SDL675-01
<i>Syncephalastrum</i> sp.	SDL672-09	<i>Aspergillus flavus</i>	SDL675-06
<i>Alternaria</i> sp.	SDL673-01	<i>Aspergillus fumigatus</i>	SDL675-07
<i>Chaetomium</i> sp.	SDL673-03	<i>Aspergillus niger</i>	SDL675-09
<i>Cladosporium</i> sp.	SDL673-04	<i>Chrysosporium</i> sp.	SDL675-16
<i>Curvularia</i> sp.	SDL673-05	<i>Fusarium</i> sp.	SDL675-18
<i>Scedosporium apiospermum</i>	SDL673-15	<i>Paecilomyces</i> sp.	SDL675-19
<i>Scedosporium prolificans</i>	SDL673-16	<i>Penicillium</i> sp.	SDL675-20
<i>Wangiella dermatitidis</i>	SDL673-19	<i>Scopulariopsis</i> sp.	SDL675-32
<i>M. gypseum</i>	SDL674-07	<i>Sepedonium</i> sp.	SDL675-33
<i>M. vanbreuseghemii</i>	SDL674-08		

改良オーラミンO 染色キット

動画はこちら→



速い！簡単！2分で行える抗酸菌蛍光染色


特 徴

- 対比染色に過マンガン酸カリウムを使用しません。
- 他のオーラミンO 染色液と同等以上の感度が得られます。※
- 抗酸菌の染色結果を素早く報告できます。
- 検体が多くて忙しい検査室に最適です。


※ Sclacks, M. et al., ASM, Poster C-324, 2006



改良オーラミンOとチールネルゼンの染色結果比較

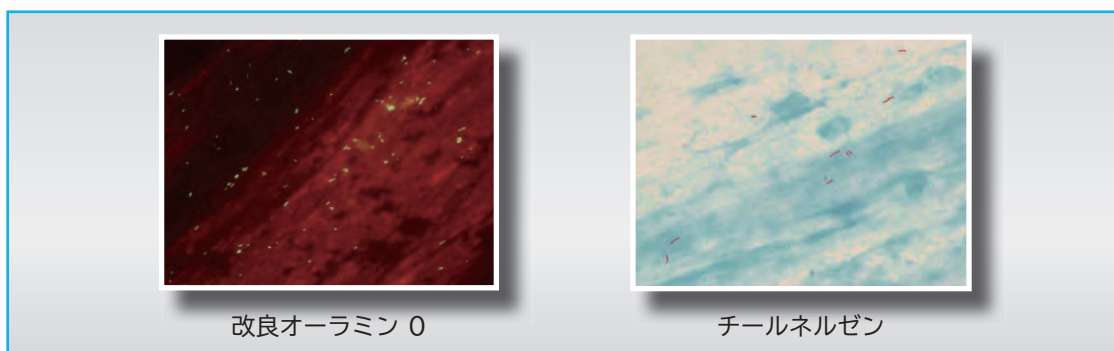

使用方法

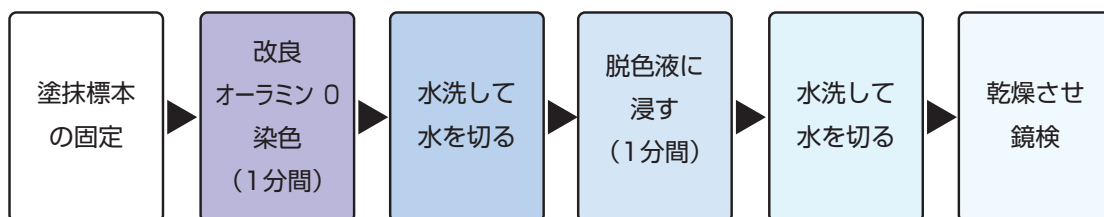

！ ご注意

- 改良オーラミンO の蛍光は、励起 460nm、蛍光 550nm で観察してください。
- 本染色キットで染色後の標本をチールネルゼン染色で重染色できます。
- 本染色法においても、他の抗酸菌染色法と同様、室温が低い場合は染色性が低下します。染色液を温めてからご使用ください。

品 名	品 番	商 品 内 容	価 格 (税別)
改良オーラミンO 染色キット	SDL345	改良オーラミンO 染色液 250ml 脱色 / 反応抑止液 250ml	19,000円

抗酸菌染色コントロール・スライド

動画はこちら→




特 徴

- 染色、チールネルゼン染色に使用可能です。
- 一枚のスライドに陽性検体及び陰性検体を塗布しています。

品 名	品 番	入 り 数	価 格 (税別)
抗酸菌染色コントロール・スライド	SDL350	10枚	10,000円
抗酸菌染色コントロール・スライド	SDL351	50枚	30,000円

● 非結核性の検体です。

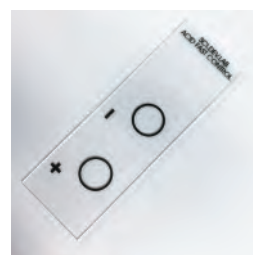

喀痰溶解キット（スナップ & ダイジェスト）

試薬調整の手間いらず！

すぐ使えて便利、その上安価な喀痰溶解キットです！

特 徴

- アルカリ溶液と N-acetyl-L-cysteine (NALC) 液が密閉されたガラスアンプルがボトルに入っており、ガラスアンプルを指で折ると溶液が混ざりあい、すぐに使用できます。
- アンプルは掴みやすく、折りやすいようにデザインされています。
- 中和用のドライ・バッファー・パウダーもキットに含まれています。



商 品 内 容	品 番	価格(税別)
スナップ & ダイジェスト 75ml / 10本 ドライ・バッファー・パウダー / 5包	SDL667	20,000円
スナップ & ダイジェスト 150ml / 10本 ドライ・バッファー・パウダー / 10包	SDL668	39,500円

・1回の発送につき送料一律3,000円（数量・金額にかかわらず）

動画はこちら➡



結核検体処分用 飛散防止コンテナ

抗酸菌に汚染された廃水の処理を安全に行なうことができます！

特 徴

- ポリプロピレン製のコンテナ（ビン）とロートは双方ともオートクレーブにかけられます。
- 再使用可能です。



商 品 内 容	品 番	価格(税別)
500ml コンテナ / ロート、ラック (2個入り)	SDL251	8,800円
1000ml コンテナ / ロート、ラック (2個入り)	SDL252	9,800円

チールネルゼン染色 加温染色用器具「かおんくん」

特 徴

- 先端のセラミック製筒部分をアルコールに含浸させ、着火すると5分程度燃え続けます。
- チールネルゼン染色で、スライドガラスを火炎で温める際に便利です。
- 繰り返し何度でも使用できます。



品 名	品 番	価格(税別)
スライドガラス 加温染色用器具「かおんくん」	KOK-1	9,300円

交換用部品

品 名	品 番	価格(税別)
交換用セラミック (先端部5個入)	KOK-S5	11,000円

動画はこちら➡



※価格は変更する場合がございます（2023年3月現在）

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品

ブチレート・ディスク

Moraxella catarrhalis の簡易・迅速な鑑別用試薬

Moraxella catarrhalis は肺炎や気管支炎、急性中耳炎などの呼吸器・耳鼻科領域感染症の起因菌として重要な位置を占めています。本菌は口腔内に常在する *Neisseria* spp. と同じグラム染色像を呈し、生化学的にも共通する特徴を持っているため鑑別試験を行うことが重要です。*Moraxella catarrhalis* は集落を触ると培地上を滑る特徴（“hockey puck” test 陽性）があります。さらに、本菌はブromo-クロロ-インドリル ブチレートを加水分解する酵素を有するため、ブチレートディスクを使用すると、この基質を分解して青色を呈するので、簡便かつ迅速に *Moraxella catarrhalis* の鑑別を行うことができます。一方、*Neisseria* spp. はこの基質を加水分解しないため、色の変化は観察されません。






CLSIのガイドライン（M35-A2）においても *Moraxella catarrhalis* の正確な同定のために、ブチレート試験陽性の確認を推奨しています。（下記参照）

特 徴

- グラム染色像や集落の性状（触ると培地上を滑る）などから *Moraxella catarrhalis* が推定される場合に、同定キットや自動同定機器のパネルを使用せずに、簡便、迅速、安価に確認試験を実施できます。
- 他の同定方法（質量分析や同定キット）による判定結果の確認試験としても使用できます。

使用方法

- ① ディスクをスライドガラスあるいはシャーレなどの上に置き、滅菌水を一滴落として湿らせます。
- ② 試験の対象となる集落を釣菌します。
- ③ 釣菌した集落を湿らせたディスクに接種します。
- ④ 5～15分待ちます。
- ⑤ 青色を呈したら、陽性です。

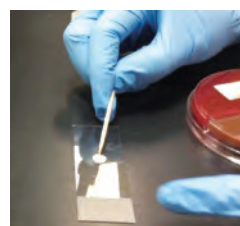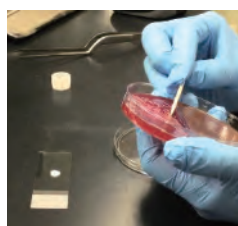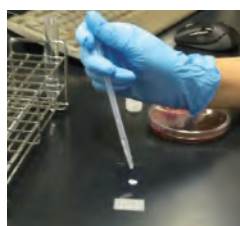

！ ご注意

- フタをしっかりと締めて、0℃以下の暗所で保存してください。

● 参考：CLSI-M35-A2 「細菌および酵母の簡易的な同定方法；ガイドライン（第2版）」抜粋

Abbreviated Identification of Bacteria and Yeast; Approved Guide Line (2nd Edition)

微生物名	推定的同定のための特徴・性状	確定同定のための追加試験結果
<i>Moraxella catarrhalis</i>	1. グラム陰性双球菌 2. オキシダーゼ陽性 3. カタラーゼ陽性 4. 血液寒天培地上の非溶血性 コロニーで、押すとそのままの形で培地上を滑る（“hockey puck” test 陽性）	1. ブチレート試験陽性 または、 2. インドキシルアセテート試験陽性

品 番	入 数	価格(税別)
SDL398-9131	50枚	15,000円

馬尿酸塩ディスク

Campylobacter jejuni と C. coli の鑑別用試薬

Campylobacter 属は、31 菌種 13 亜種（2018 年 4 月現在）に分類されています。このうち、感染性腸炎の原因菌として C. jejuni と C. coli が分離されます。症状は下痢、腹痛、発熱、悪心、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感などであり、他の感染型細菌性食中毒と酷似しますが、潜伏期間が一般に 2～5 日間とやや長いことが特徴です。

C. jejuni と C. coli は、グラム陰性のらせん状あるいはコマ状細菌で微好気状態で発育します。


馬尿酸塩加水分解の最終生成物であるグリシンはニンヒドリンと反応して暗青色を生じることを利用して、馬尿酸塩の分解能を調べることにより C. jejuni と C. coli の鑑別を行うことが可能です。

特 徴

- Campylobacter jejuni と Campylobacter coli の鑑別試験が実施できます。
- 他の同定方法による判定結果の確認試験としても使用できます。

使用方法

- ① 小試験管に馬尿酸塩ディスクを 1 枚入れて、pH 中性 (6.5～7.2) の滅菌水をスポイトで 4 滴滴下します。【写真㉑】
- ② 純培養した平板培地から 8～10 か所のコロニーを釣菌し①の溶液に懸濁させます。懸濁液が乳白色で不透明な状態 (McFarland No.3 またはそれ以上) であることを確認します。【写真㉒】
- ③ ふ卵器にて 35～37℃ で 2 時間培養します。
- ④ 培養後、1～2 滴のニンヒドリン試薬を添加し、軽く混和してから 1～15 分室温に放置します。【写真㉓】
- ⑤ 15 分以内に濃い青～黒／青色を呈したら陽性と判定します。薄い色であった場合は陰性です。【写真㉔㉕】

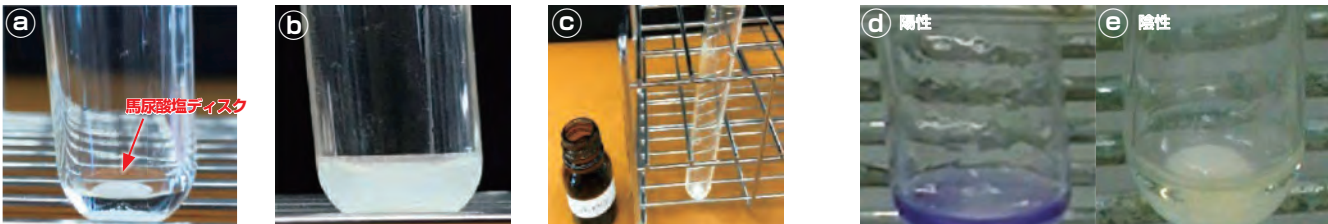

！ ご注意

- フタをしっかり締めて、2～8℃の温度帯で保存してください。

● Campylobacter 属菌の生化学的性状

性状	菌種	C. jejuni	C. coli	C. fetus
発育試験	25℃	—	—	+
	42℃	+	+	—
オキシダーゼ活性		+	+	+
カタラーゼ活性		+	+	+
ウレアーゼ活性		—	—	—
硝酸塩還元能		+	+	+
馬尿酸塩加水分解		+	—	—

品 番	入 数	価格 (税別)
SDL-K710310	50 枚	13,000 円
SDL-K710315	15 枚	6,500 円

● ニンヒドリン試薬

品 番	容 量	価格 (税別)
SDL398-K475	4ml	8,000 円

PYR ディスク

A 群溶連菌 腸球菌、その他レンサ球菌など 簡易・迅速鑑別用試薬 PYR ディスク

特 徴

PYR (L-ピログルタミン酸β-ナフチルアミド、別名ピロリドニル-β-ナフチルアミド) は酵素により加水分解され、遊離のβ-ナフチルアミンを放出します。これは PEP 試薬を添加した際の色の変化によって検出することができます。



【判定】

赤色を陽性と判定する。(写真1 参照)

オレンジ、サーモン、黄色は陰性と判定する。

【注意点】

- ・ディスクが湿りすぎている場合は偽陰性となる。
- ・選択培地または同定用の試験培地から菌を釣菌した場合は、偽陰性が生じることがあります。
- ・トリプトファンを含む培地（例えば、血液寒天培地）で培養した微生物の場合、PEP 試薬のインドール反応により呈色反応が影響されます。具体的には、微生物の PYR 反応、インドール反応の組み合わせにより、右記の表 1 のような呈色反応を示すことが予測されます。





表 1

	PYR +	PYR -
インドール+	紫	緑色または青緑色
インドール-	暗いピンクまたは赤	黄色

使用方法

- ① ディスクをスライド・ガラスの上に置き、水で湿らせます。(A) 参照
- ② 純試験の対象となるコロニーをディスクに塗り付けます。(B) 参照
- ③ 2～5分間室温に放置した後、付属の PEP 試薬（インドール）を1滴滴下します。(C) 参照
- ④ 1～2分で呈色反応が起こるのを観察します。(D) 参照
- ⑤ 暗いピンクまたは赤から紫色の呈色反応が陽性です。緑色または青緑色そして黄色の呈色が見られる場合は PYR 陰性です。

注) 水分が過剰にならないように気を付けてください。ディスクが湿り気でスライド・ガラスに固定される程度で充分です。

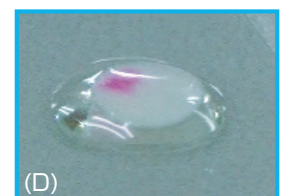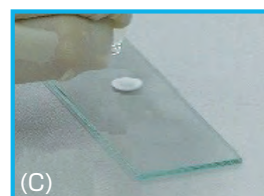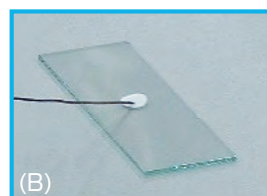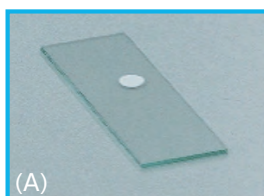

！ ご注意

- ・フタをしっかりと締めて、2～8℃で冷蔵保存してください。

品 番	入 数	価 格 (税別)
SDL-K1538B	50 枚	13,000 円

- ・ PEP 試薬（インドール）が付属しています。

監修：東京医科大学微生物学講座 教授 大楠 清文
株式会社ミロクメディカルラボトリー

肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）鑑別用試薬

胆汁酸溶解試験を併用することで、より正確な菌種同定を行うことが可能です

Streptococcus pneumoniae は呼吸器科および耳鼻咽喉科領域において主要な原因菌の一つです。胆汁酸溶解試験は、肺炎球菌を鑑別する上で重要な検査法の一つです。近年オプトヒン耐性の *S. pneumoniae* やオプトヒン感性の *Streptococcus oralis* の存在が知られていますが、このような特殊な性状を示す菌株においてオプトヒン試験のみで肺炎球菌が否かを鑑別するには限界があるため、胆汁酸溶解試験を併用することで、より正確な菌種同定を行うことが可能となります。

測定原理

Streptococcus pneumoniae は自己融解性が強く 24 時間以上培養すると菌体の崩壊が起こります。胆汁酸溶解試験は、融解が胆汁酸によって促進される性質を利用したものです。

2%デオキシコール酸ナトリウム水溶液

使用方法

- ① 35℃で 24 時間、5%炭酸ガス培養にてヒツジ血液寒天培地上に発育した菌の集落に、直接 2%デオキシコール酸ナトリウム水溶液を 1 滴滴下します。
- ② 35℃ 30 分間静置後、試薬を滴下した集落を確認し判定します。

判定方法

- 陽性：α溶血を残して集落の消失（胆汁酸溶解）
- 陰性：変化なし（胆汁酸溶解なし）

保存

直射日光を避け室温にて保存してください。



10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液

使用方法

- ① 35℃で 24 時間、5%炭酸ガス培養にてヒツジ血液寒天培地上に発育した菌を滅菌生理食塩水（生食）に懸濁し、McFarland No.5 の懸濁に調整します。
- ② 調整した菌液を 1ml 分注し、10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液を 3 ～ 4 滴滴下します。
- ③ 35℃で 2 時間静置し反応を確認します。

判定方法

- 陽性：透明化（胆汁酸溶解）
- 陰性：変化なし（胆汁酸溶解なし）

保存

直射日光を避け室温にて保存してください。



品 名	品 番	容 量	価格(税別)
2%デオキシコール酸ナトリウム水溶液	SG-2-DEOXY	2mL	1,500円
10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液	SG-10-DEOXY	2mL	1,500円

3%水酸化カリウム水溶液

嫌気性菌のグラム染色性を確認

日本臨床微生物学会編；臨床嫌気性菌検査法'97

「嫌気性菌は好気性菌と共にヒトの各部位の常在菌叢を構成している。これらの常在菌叢は宿主（ヒト）にとって無害であるのみならず、外因性の病原菌の定着・感染を阻止する働きをしている。しかしながら、時に何らかの原因により、生体の正常な防御機構に破綻を来した場合、嫌気性菌感染症が成立する」

グラム染色は嫌気性菌を同定する上で重要で、Hucker 変法などのグラム染色法が有名ですが、嫌気性菌のグラム染色は形態が多形成、グラム不定のことがあることが知られています。

3% KOH を用いて染色性の確認を行う Ryu の試験は、グラム染色で陰性に染まる菌を鑑別するために用いられます。

測定原理

グラム陰性菌の外膜にあるリポ多糖（LPS：Lipopolysaccharide）が水酸化カリウムにより溶出する現象で、グラム陽性菌では厚いペプチドグリカン層のため溶出しません。

使用方法

- ① 3%水酸化カリウムをスライドガラスに 1 滴滴下します。
- ② 竹串や白金線などで培養した菌を多めにとり 3%水酸化カリウムと混合します。
注）新鮮な菌をご使用してください。
- ③ そのまま、静かに引き上げ菌塊から糸を引くか否かを観察します。

判定方法

陽性：糸を引く（グラム陰性菌）
陰性：変化がない（グラム陽性菌）

保存

直射日光を避け室温にて保存してください。



品 名	品 番	容 量	価 格 (税別)
3%水酸化カリウム水溶液	SG-3-KOH	2mL	1,500円

スポットインドール試薬

腸内細菌科やある種の嫌気性菌によるインドールの産生を検出

腸内細菌の同定に重要なインドール産生試験は、特定の細菌がアミノ酸のトリプトファンを分解してインドールに変換し、培地中に蓄積する能力を示すものです。*E. coli*、*P. vulgaris*、*P. rettgeri*、*M. morgani*、*Providencia* 種のほとんどの菌株は、インドールを放出しながらアミノ酸のトリプトファンを分解しますが、これはいくつかの異なる細胞内酵素の連鎖によって行われ、一般的には“トリプトファナーゼ”と呼ばれるシステムです。

トリプトファンはアミノ酸の一種であり、トリプトファナーゼ酵素を発現する細菌によって脱アミノ化と加水分解を受けることができます。インドールはトリプトファンから中間体であるインドールピルビン酸を介して還元的脱アミノ化により生成されます。トリプトファナーゼは、トリプトファン分子のアミン基が除去される脱アミノ化反応を触媒します。この反応の最終生成物がインドール、ピルビン酸、アンモニウムです。

測定原理

スポットテストでは、インドールは濾紙マトリックス中で酸性の pH で *p*-ジメチルアミノシンナムアルデヒド (DMACA) と結合し青から青緑色の化合物を生成します。



使用方法

- ①滅菌綿棒を用いて、非選択培地(Mueller-Hinton 寒天培地を除く)から 18 ～ 24 時間培養されたコロニーの一部を採取します。
- ②採取した滅菌綿棒にスポットインドールを滴下します。

判定方法

陽性：2 ～ 3 分以内に細菌の塗抹標本に青色から青緑色の変化が現れる
陰性：反応なし

保 存

冷暗所 (2 ～ 8℃) にて保存してください。

品 名	品 番	容 量	価 格 (税別)
スポットインドール試薬	SG-SPOTIND-5	5mL	6,600 円

※送料 (冷蔵) 込み

3%過酸化水素水 (H₂O₂)

カタラーゼ試験 (カタラーゼ産出の有無を調べます)

カタラーゼ存在の有無により属間の鑑別や種の鑑別の補助を行います。
特に、グラム陽性球菌の中で臨床的に重要な *Staphylococcus* 属と *Streptococcus* 属の鑑別に用いられています。

例

- ・ *Streptococcus* 属 (陰性)、*Micrococcus* 属及び *Staphylococcus* 属 (陽性)
- ・ *Bacillus* 属 (陽性)、*Clostridium* 属 (陰性)

測定原理

チトクローム系を持つ好気性菌及び通性嫌気性菌の大部分はカタラーゼが存在します。主な例外は *Streptococcus* 属です。チトクローム系を持たない菌はカタラーゼも持たないので、過酸化水素水を分解することはできません。嫌気性菌の多くはカタラーゼの代わりにペルオキシダーゼを持ちます。



使用方法

- ① 3%過酸化水素水をスライドグラス上に 1 滴滴下します。
- ② 木製スティックなどを用いて少量の菌体を接触させ、気泡発生の有無を観察します。
- ③ 赤血球中にはカタラーゼが存在するため、血液寒天培地上のコロニーを使用する際は偽陽性に注意が必要です。

判定方法

陽性：気泡が発生
陰性：無変化

保 存

冷暗所 (1～15℃) にて施錠して保管してください。

品 名	品 番	容 量	価 格 (税別)
3%過酸化水素水	SG-H2O2	5mL	1,500 円

0.5% 硫酸水

Nocardia 属は自然界に存在する病原性の比較的弱い細菌とされているが、急性あるいは慢性でしばしば播種性の化膿性または肉芽腫性感染症を発症します。わが国では、*N. farcinica*、*N. asteroides*、*N. brasiliensis*、*N. nova* の4菌種の分離が多いとされていて、弱抗酸性の特徴を持っています。

膿や痰のグラム染色でフィラメント / ビーズ状の陽性菌が見えた場合、放線菌の可能性あります。放線菌は好気性と嫌気性に分かれ、好気の代表が *Nocardia* 属で嫌気の代表が *Actinomyces* 属です。抗菌薬選択が変わってきますので2つの鑑別は重要となります。

Nocardia 属は抗酸性の染色性を示しますが、*Actinomyces* 属は示しません。*Nocardia* 属の場合には0.5～1% 硫酸水を用いたキニヨン (Kinyoun) 染色法を用います。



使用方法

- ①作製した塗抹標本に石炭酸フクシン液を満載し、5分程度放置します。
- ②水洗を行います。
- ③0.5% 硫酸水を滴下します。標本の厚さなどにより異なりますが、約1分間を目安とします。
- ④水洗してレフレルのアルカリ性メチレンブルー液を満載し、30秒ほど染色します。
- ⑤水洗した後、冷風ドライヤー等で乾燥させます。

※キニヨン染色では、脱色液を滴下（もしくは脱色液に浸した）後、目視でスライド上の赤色（石炭酸フクシン液）が抜けたことを確認し、その後、速やかに水洗を行うことが脱色のコツとなります。

鏡検像

光学顕微鏡を用いて、1,000倍拡大で観察を行います。

赤色：*Nocardia* 属

青色：その他（背景など）

※脱色を長時間やりすぎた場合、菌まで青くなってしまうこともあるのでご注意ください。


保 存

直射日光を避け室温にて保存ください。

品 番	容 量	価格(税別)
SG-SULF-15	15mL	1,800円
SG-SULF-100	100mL	2,500円

ディスポループ

再シールができる容器入り ディスポーザブル・ループ & ニードル

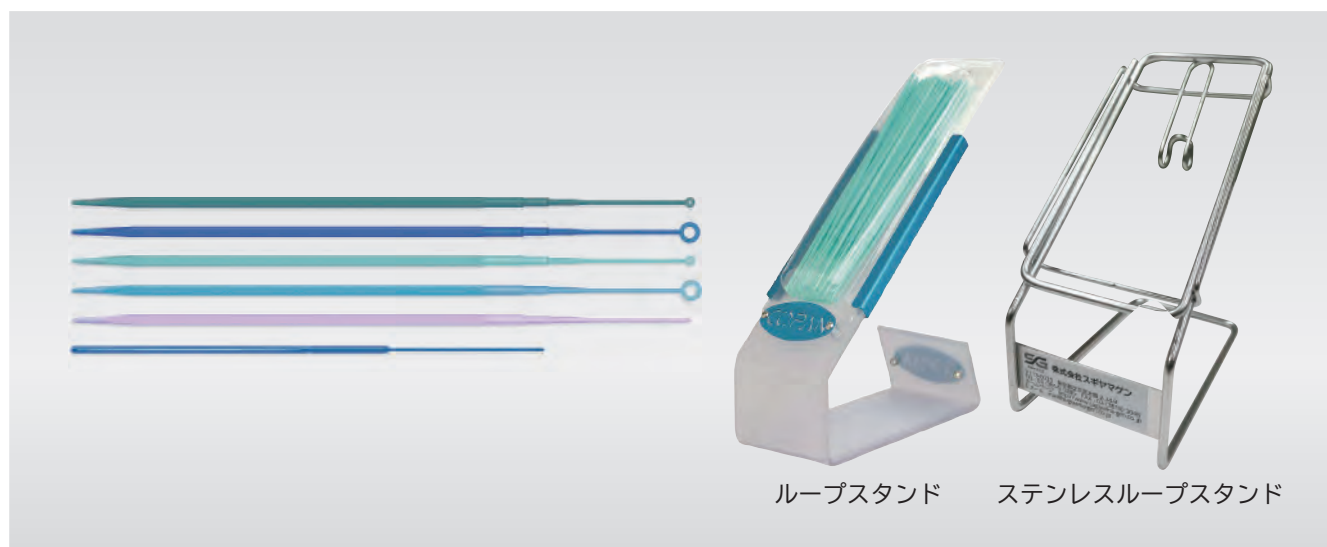

特性ホルダーに固定でき、使い勝手抜群（イタリア・コパン社製）

特 徴


- ループとニードルは再シールが可能な粘着式開口部が付いたプラスチック容器を採用しています。
- 開封後も再びシールすることが可能なので、落下菌による汚染がなく、最後の一本まで無駄なく使いきることができます。
- プラスチック容器は特製ホルダーにより固定されるため、片手でループやニードルを取り出し、もう片一方の手で平板やチューブを取り扱うことができます。

● 2 タイプの硬度と 5 つのカラーを採用

1 μ l と 10 μ l のそれぞれに、ソフトとハードの 2 つのタイプをご用意しました。お好みに応じてお選びください。また、商品の識別を容易にするため種類ごとに異なるカラーを使っています。

品 名	品 番	カ ラ ー	包 装 単 位	価 格 (税 別)
ハードループ 1 μ l	8175 CSR40	ダークグリーン	40 本 $\times$ 25 ケース = 1000 本	14,000 円
〃 10 μ l	8177 CSR40	ミディアムブルー		
ソフトループ 1 μ l	8178 CSR40	ライトグリーン		
〃 10 μ l	8179 CSR40	スカイブルー		
ディスポニードル	8176 CSR40	ブルーバイオレット		
ディスポニードル・ミニ	8183 CS10	ネイビーブルー		16,000 円
ループスタンド	K 24C	—	1 個	9,000 円
ステンレスループスタンド	S 24C	—	1 個	4,200 円

ミニエーゼ (ディスポーループ)

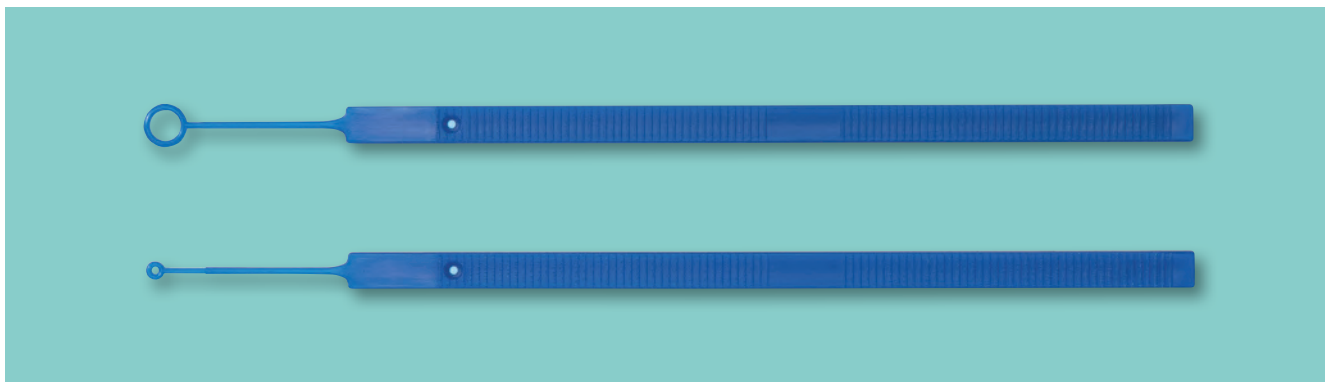


特 徴

- てのひらにコンパクトに収まる使用感です。
- 先端が柔らかく、安定した塗抹を実現しました。
- 国内生産のため、安定供給が可能です。
- 廃棄物の削減を実現しました。



品 名	品 番	仕 様	入 数	価格(税別)
ミニエーゼ10μ	SG-MINI10	10μL	1,000本(50本×20袋)	15,000円
ミニエーゼ1μ	SG-MINI1	1μL	1,000本(50本×20袋)	15,000円

ディスポーザブル ループ & ニードル

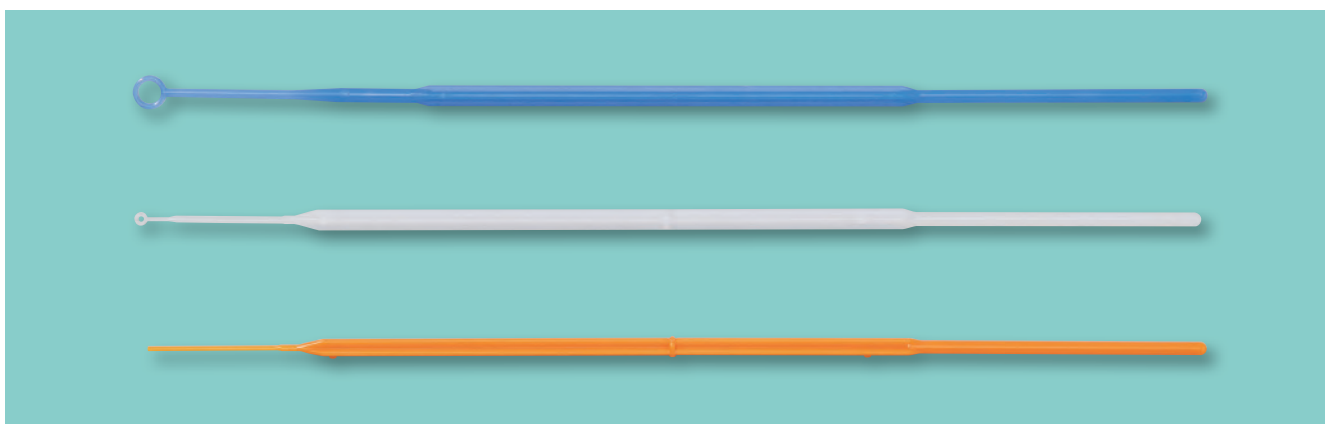


特 徴

- ポリスチレン製で、耐熱温度は-40℃～+70℃です。
- 10本包装。ガンマ線殺菌済みです。

品 名	品 番	長さ(mm)	入 数	価格(税別)
ループ10μ	S86.1562.010	200	1,000本(10本×100袋)	17,900円
ループ1μ	S86.1567.010	200	1,000本(10本×100袋)	17,900円
ニードル	S86.1568.010	200	1,000本(10本×100袋)	17,900円

ステンレス・ループ & ニードル

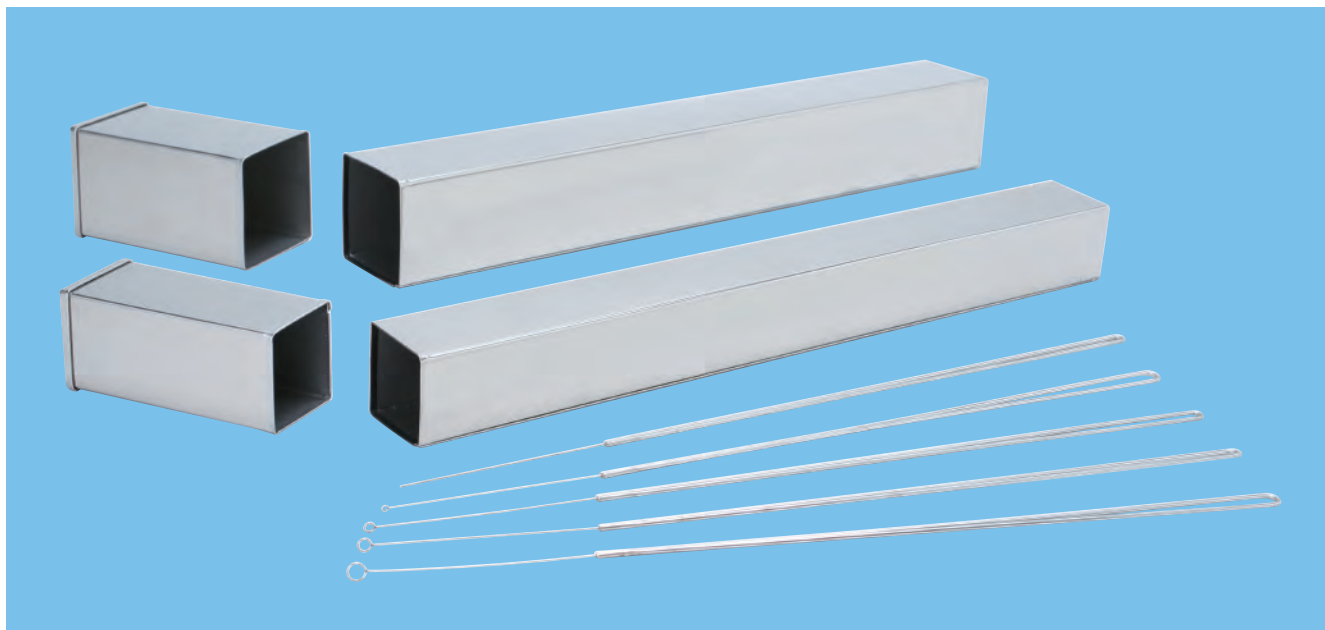

特 徴

- ガスバーナーで灼くのではなく、洗浄・滅菌して繰り返し使用します。
- ガスバーナー使用時に発生する菌の飛沫発生心配がなくなります。
- ステンレス製なので、丈夫で手ごたえにコシがあり、プラスチック製にない使いやすさがあります。

使用方法

1. ループ（ニードル）を使い、釣菌－接種作業を行います。
2. 使用後、界面活性剤系などの消毒液にループ（ニードル）を漬けます。
3. ループ（ニードル）をオートクレーブにかけます。汚れが残っている場合は中性洗剤で洗い落とします。
4. 乾燥後、ループ（ニードル）を専用滅菌缶に入れ、乾熱滅菌処理します。
5. 再び、ループ（ニードル）を使用します。

★ループまたはニードルは、1日の使用量の3倍（3ローテーション分）をご準備いただくと、当日使用分、洗浄・滅菌分、予備分に分けてスムーズに使用できます。

品 名	品 番	ループ内径	長 さ	線 径	入 数	価格 (税別)
ステンレス・ループ	SMSN-61	φ 1.0mm	280mm	φ 0.5mm	100	48,000円
	SMSN-62	φ 2.0mm		φ 0.6mm		42,000円
	SMSN-63	φ 3.0mm				
	SMSN-64	φ 4.0mm				
ステンレス・ニードル	SMSN-60					
ステンレス・滅菌缶 S	SMSR-30	30 × 30 × 300mm		—	1	15,000円
// ・滅菌缶 L	SMSR-40	40 × 40 × 300mm		—		

- ループの把手面に対する取付角度は、通常直角に取り付けています。
- ループ内径、長さ、線径、把手面に対する取付角度（直角 or 平行）は特注に応じます。

白金線挟み

素 材	品 番	入 数	長 さ	重 量	価 格 (税別)
ニューム製	S04240-10S	10 本	197mm	9.6g	6,000円
真鍮製	S04240-09S		210mm	20g	6,000円
通し	S04240-13S		244mm	30g	8,000円
通し	S04240-12S		253mm	25.7g	19,000円

・通しのタイプは柄の端まで真鍮が差し込まれています。

白金耳

火炎滅菌などによる劣化が少なく、長期にわたり安心して使用できます。

タ イ プ	品 番	入 数	価 格 (税別)
φ 2mm 輪付・長さ 50mm、線径 φ 0.3mm	S04240-50	1 本	3,000円

代用線（コバルトクロム線）

タ イ プ	品 番	入 数	価 格 (税別)
φ 3mm 輪付・長さ 60mm、線径 φ 0.5mm	S04240-30S	10 本	5,800円
輪なし・線のみ・長さ 60mm、線径 φ 0.5mm	S04240-32S		5,600円
輪なし・1000mm 巻き、線径 φ 0.5mm	S04240-31	1 本	5,500円

代用線（ニクロム線）

タ イ プ	品 番	入 数	価 格 (税別)
輪なし・線のみ・長さ 60mm、線径 φ 0.5mm	S04240-24S	50 本	2,000円
輪なし・1000mm 巻き、線径 φ 0.5mm	S04240-20S	10 本	



特徴

●検体回収率が高い！

ピューリタン社が特許取得済のピュアブロックウルトラ・スワブにより、効率よく検体を吸着・溶出します。さらに、チューブ内のガラス・ビーズが、検体を迅速に溶出・分散させます。

●ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマの検体輸送・保管に対応！

液相培地は、ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマの輸送・保管に適した環境となるよう、pH 調整され、抗生物質の添加により細菌・真菌のコンタミを防ぎます。

●検査の標準化を支援！

スワブに吸着した検体は液相培地に溶出され、均一な菌液として検査に使用できます。

●様々な温度帯の輸送・保管に対応

培地は室温での安定性に優れています。検体採取後の輸送や一時保管については、冷蔵（2℃～8℃）もしくは凍結したほうがよりよい生存率が得られます。凍結保存が可能です。



使用方法



- 1 検体を採取します
ピュアブロックウルトラ・スワブは、大きな表面積により、効率的に検体を採取できます。



- 2 ブレークポイントで軸を折ります
スワブ先端を輸送チューブに差し込み、スワブの軸だけを下に折り曲げると、ブレークポイントで分離します。




- 3 キャップをして、液相培地に検体を溶出させます
液相培地にピュアブロックウルトラ・スワブを入れると、チューブ内のガラス・ビーズが、検体を迅速に溶出・分散させます。


Ultra purity for ultra versatility

純度の高い検体をできるだけ高効率に回収できるように開発・設計されたピュアブロックウルトラ・スワブは、ユニトランズ-RT の液相培地と組み合わせられることにより、PCR、直接蛍光抗体法（DFA）、分子診断、ELISA 法等の、検体の高い純度を要求する高感度な試験法に最適な輸送システムとなります。


ピュアブロックウルトラ・スワブでは、ピューリタン社の特許取得済の植毛工法により、数十本の糸を撚り合わせた高密度繊維を使い、独自形状のポリエステル製マイクロファイバーを形成しています。

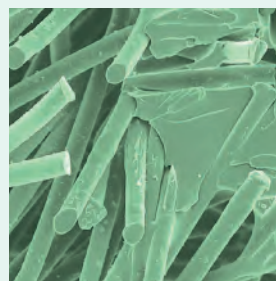


ピュアブロックウルトラ・スワブ
縦方向断面図 200x

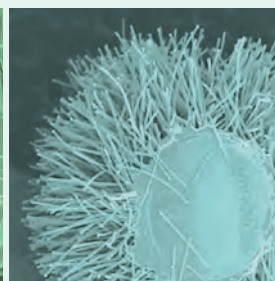

ピュアブロックウルトラ・スワブ
横方向断面図 18x

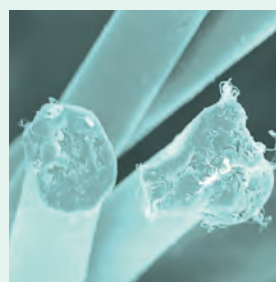

ピュアブロックウルトラ・スワブ
縦方向断面図 1000x

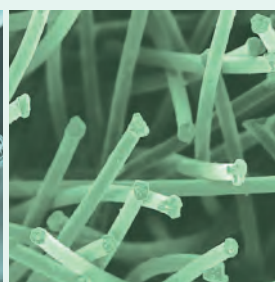

ピュアブロックウルトラ・スワブ
横方向断面図 250x

①防漏型、自動スワブ装着式キャップ

スクリュー式のキャップは防漏型で、バイオセーフティの観点からも安心してお使いいただけます。折ったスワブをチューブに入れてキャップを締めると、自動的にスワブがキャップに装着される仕組みになっており、その後のスワブの取り扱いに便利です。

②安全に多目的に使える輸送チューブ

輸送チューブは、従来式の検査方法や自動化機械に幅広く対応できるようなサイズ・形状に設計されています。輸送や保管をしやすいサイズ・形状で強度も充分。安全に検体の輸送・保管が行えます。

③輸送・保管に適したユニバーサル培地


室温での安定性が高く、ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマの生存率を高く維持できる組成です。1ml タイプと 3ml タイプがあります。(ハンクス緩衝塩類、ウシ血清アルブミン、L-システイン、ゼラチン、ショ糖、L-グルタミン酸、HEPES 緩衝液、バンコマイシン、アンフォテリシン B、コリスチン、フェノールレッド)

④ブレイクポイント

採取後、スワブ先端を輸送チューブに差し込み、輸送チューブを手で上向きに保持したままスワブの軸だけを下に折り曲げると、スワブ軸のブレイクポイント部分で簡単に分離します。スワブ先端部分だけを輸送チューブに収納し、余分な軸部分はそのまま廃棄します。検体採取時は長い軸で操作がしやすく、輸送・保管時は場所を取らないように設計されています。

⑤様々なスワブチップ形状

スワブチップの形状は、用途に応じて、ラージ (3ml 向けはオーバル)、ミニチップ、ウルトラファインからお選びいただけます。

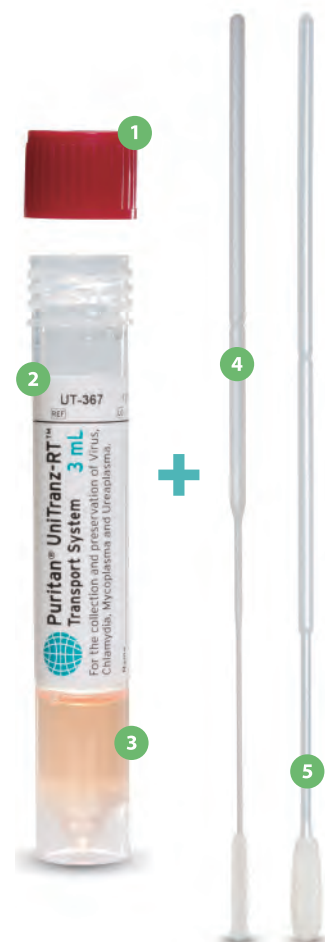

(スワブ材質：綿球 = ポリエステル・フロック繊維、軸 = ポリスチレン)

	品番	チップ形状	輸送チューブ	サイズ 充填培地量	スワブチップ形状	ブレイク ポイント	包装単位	価格(税別)
トランスポート・システム	UT-106			φ12 × 80mm 1ml	ラージ	80mm	50 セット	15,000 円
	UT-116				ミニチップ		50 セット	15,000 円
	UT-117				ウルトラファイン	100mm	50 セット	15,000 円
	UT-306			φ16 × 100mm 3ml	オーバル	100mm	50 セット	20,000 円
	UT-316				ミニチップ		50 セット	20,000 円
	UT-317				ウルトラファイン		50 セット	20,000 円
	UT-367				オーバル ウルトラファイン (2本入)		50 セット	23,000 円
トランスポート・メディア	UT-100	スワブなし 培地のみ		φ12 × 80mm 1ml	—	—	50 セット	13,000 円
	UT-300	スワブなし 培地のみ		φ16 × 100mm 3ml	—	—	50 セット	16,000 円

医療機器製造販売届出番号 13B2X10572000002

〈製造販売業者〉 株式会社スギヤマゲン
 〈外国製造業者〉 Puritan Medical Products Company LLC
 (ピューリタン メディカル プロダクツ カンパニー エルエルシー)
 国名：アメリカ合衆国

ウイルス輸送液

特 徴

- 細胞培養用培地に BSA、ペニシリン、ストレプトマイシン、ゲンタマイシン、アンフォテリシン B を添加し、フィルター滅菌したものを遠心管に分注しています。
- ウイルスの活性を保持する組成になっています。その他、検体懸濁後の -80°C 保存にも対応しています。

PCR 反応を阻害する成分は含まれていません。

品 名	ウイルス輸送液
品 番	SGVTM-3S
分 注 量	3ml
入 数	50 本/箱
有 効 期 限	製造後 6 ヶ月間
貯 法	冷蔵保存
価 格 (税 別)	23,000 円

- チューブは、安定供給のため予告なく変更することがあります。
- 本品は、毒劇物、医薬品、体外診断薬のいずれにも該当しません。また、SDS 交付義務対象ではありません。
- 本品は、グアニジン塩やアルコールを含んでいません。



不活化液 PCR メディア

特 徴

- 強力なタンパク質変性剤である塩酸グアニジンを 40% 含有しており、検体採取後の感染リスクを低減します。
- 「PCR メディア SG」の組成は、大型 PCR 装置向け PCR メディアを模しています。

大型装置に直接架設可能な保存液 4.3ml タイプ

品 名	PCR メディア SG
品 番	SGFK-4S
分 注 量	4.3ml
入 数	50 本/箱
有 効 期 限	製造後 18 ヶ月間
貯 法	15°C から 30°C
価 格 (税 別)	20,000 円

- 本製品は試薬や機器によりお使いいただけない場合がございます。後工程で使用するキットの添付文書の記載をご確認ください。



ウイルス検査コントロール 試料



フルプロセスコントロールが登場

！ 特 徴

- イギリス、Randox 社製の whole virus を加熱とガンマ線により不活化した溶液を凍結した商品です。
- SARS-CoV-2 に対する RNA 抽出作業からウイルスの検出工程まで完全にトレースできるため機器や検査手技の精度の確認が行えます。
- 精度管理用のフルプロセスコントロールに最適な商品です。

品 名	品 番	内 容 量	価 格 (送料込)
SARS-CoV-2 Q Control	SCV2QC	0.5ml × 5本入り	82,000円

約 10,000dc に調整された試料です。

品 名	品 番	内 容 量	価 格 (送料別)
SARS-CoV-2 Molecular Q Panel	SCV2MQP	0.5ml × 4本入り (各濃度 1本)	120,000円

約 10,000dc/ml、約 1,000dc/ml、約 100dc/ml の 3 濃度に調整された試料と陰性コントロールのセット。

品 名	品 番	内 容 量	価 格 (送料別)
SARS-CoV-2 Analytical Q Panel	SCV2AQP	0.5ml × 9本入り (各濃度 1本)	240,000円

約 1,000,000dc/ml、約 100,000dc/ml、約 10,000dc/ml、約 5,000dc/ml、約 1,000dc/ml、約 500dc/ml、約 100dc/ml、約 50dc/ml の 8 濃度に調整された試料と陰性コントロールのセット。

品 名	品 番	内 容 量	価 格 (送料別)
Q control Multiplex control	RTX1QC	0.7ml × 5本入り (全て同一濃度)	110,000円

「Influenza A Type H1N1」 「Influenza B Type Victoria」 「Respiratory Syncytial Virus Type A」 「SARS-CoV-2」 の 4 種類のウイルスをミックスした試薬になっております。

！ ご注意

- 保管温度 -20℃ 以下。
- dc とは、デジタルコピーという製造業者で
使用している測定法の単位となります。
- 他にも取り扱い試料がございます。



・製造元
RANDOX
イギリス：ランドックス社

医療用スワブにおけるピューリタン社の最先端技術

特 徴

- 植毛構造のポリエステルを綿球部分に使用しているため、検体の採取・放出が容易です。
- 弾力性のあるポリスチレン軸を採用し、従来品よりも挿入がスムーズです。
- 検体の採取量とリリース量が大幅に増加したことによって、高い測定感度を実現しました。
- 綿球内に検体を閉じ込めない構造にしたことで検体処理が迅速になりました。
- 輸送用の容器サイズに適応させるため、軸には簡単に折れるブレイクポイントを成形しています。
- 綿球の形状・サイズ、ブレイクポイントは用途、検体採取部位等に応じて選択できます。
- すべての製品が滅菌され、個包装（パウチ袋）されています。



従来品との比較

● 従来の繊維スワブ

検体は繊維の中に取り込まれます



取込まれた検体

採取した検体は繊維の中に浸透して取込まれます。

● フロックスワブ

検体の収集やリリースに優れています



収集された検体

採取した検体は綿球の表面に留まり80%以上*がリリースされます
*メーカー研究室によるデータ

● ハイドラフロック・スワブの優れた検体吸着・リリース能力


検体吸着

着色された水に付着させると、6.4秒でここまで水分を吸い上げます。




リリース

着色したスワブを再び水につけると、6.5秒でここまで溶出したします。

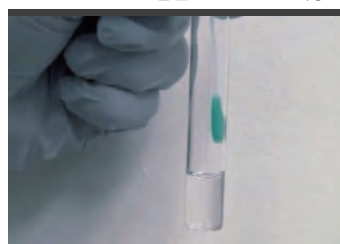


ハイドラフロック・スワブとは？


ハイドラとは、ギリシャ神話に登場する九つの頭を持つ海蛇 Hydra を語源としています。ポリエステル糸を何十本も撚り合わせ、先端を広げたハイドラ状繊維を使用する独自の技術により、ピューリタン社ハイドラフロック・スワブは非常に高い検体回収性能を達成しています。

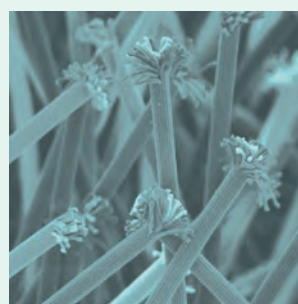

HydraFlock® 拡大写真 200x

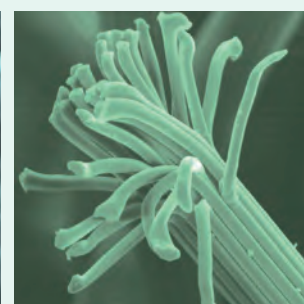

HydraFlock® 拡大写真 1000x

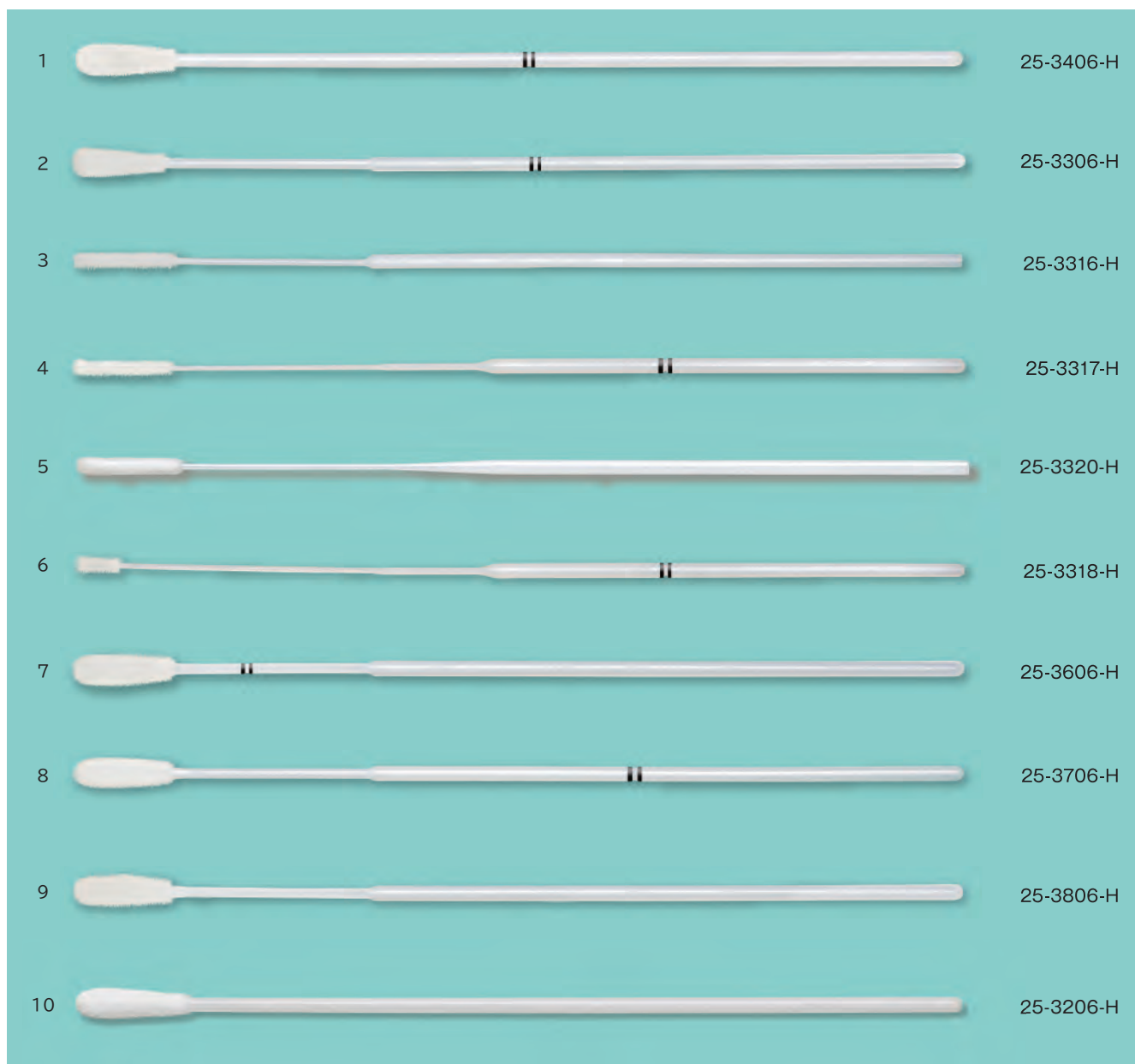

(材質：綿球＝ポリエステル・フロック繊維、軸＝ポリスチレン)

■：商品には付いておりません。

(50本入)

	品番	チップ形状	チップサイズ	ブレイクポイント	全長	おもな用途	価格(税別)
1	25-3406-H	ラージ	17.27 × 5.56mm	80mm	150.62mm	咽頭	4,400円
2	25-3306-H	スタンダード	17.52 × 5.08mm	80mm	153.41mm	口腔・咽頭	4,400円
3	25-3316-H	ミニチップ	20.32 × 3.42mm	なし	153.41mm	耳鼻・小児	4,800円
4	25-3317-H	ウルトラファイン	16.76 × 3.55mm	100mm	153.41mm	耳鼻・小児	4,500円
5	25-3320-H	ウルトラファイン	16.76 × 3.55mm	なし	153.41mm	耳鼻・小児	4,250円
6	25-3318-H	マイクロファイン	7.92 × 3.55mm	100mm	153.16mm	耳鼻・小児	4,500円
7	25-3606-H	オーバル	17.39 × 5.56mm	30mm	152.4mm	口腔・咽頭	5,500円
8	25-3706-H	オーバル	17.39 × 5.56mm	100mm	152.4mm	口腔・咽頭	5,500円
9	25-3806-H	オーバル	17.39 × 5.56mm	なし	152.4mm	口腔・咽頭	5,500円
10	25-3206-H	オーバル・ロング	19.56 × 5.56mm	なし	150.62mm	咽頭	4,200円

・チューブは付属していません。

医療機器製造販売届出番号 13B2X10572000007

〈製造販売業者〉 株式会社スギヤマゲン

〈外国製造業者〉 Puritan Medical Products Company LLC

(ピューリタン メディカル プロダクツ カンパニー エルエルシー)

国名：アメリカ合衆国

ドライトランスポート・システム




特徴

- 検体採取用のスワブとチューブのセットです。
- 輸送、保管に便利です。
- スワブは滅菌された状態でチューブに密閉されています。
- スワブはハイドラフロック・タイプです。

！ ご注意 本製品には培地は含まれていません。

ハイドラフロック・スワブ拡大図

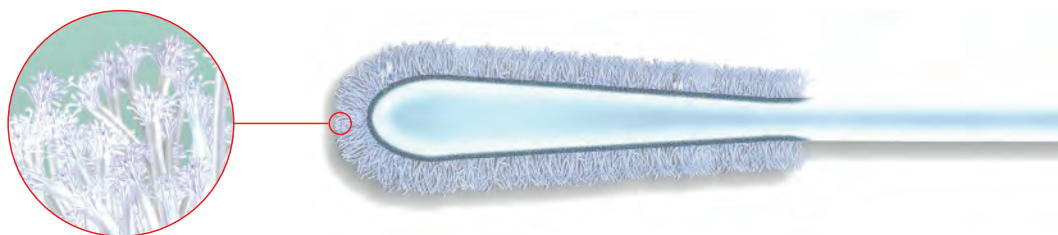

品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ (mm)	ブレイクポイント (mm)	全長 (mm)	おもな用途	価格 (税別)
25-3406-H BT	ラージ	赤	17.27 × 5.56	80	150.62	咽頭	16,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ (mm)	ブレイクポイント (mm)	全長 (mm)	おもな用途	価格 (税別)
25-3306-H BT	スタンダード	赤	17.52 × 5.08	80	153.41	口腔・咽頭	16,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ (mm)	ブレイクポイント (mm)	全長 (mm)	おもな用途	価格 (税別)
25-3316-H EMB80BT	ミニチップ	緑	20.32 × 3.42	80	153.41	耳鼻・小児	16,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ (mm)	ブレイクポイント (mm)	全長 (mm)	おもな用途	価格 (税別)
25-3316-H EMB100BT	ミニチップ	黄色	20.32 × 3.42	100	153.41	耳鼻・小児	16,000円

(すべて100本入)

II：商品には付いておりません。



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ(mm)	ブレイクポイント(mm)	全長(mm)	おもな用途	価格(税別)
25-3317-H BT	ウルトラファイン	オレンジ	16.76 × 3.55	100	153.41	耳鼻・小児	14,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ(mm)	ブレイクポイント(mm)	全長(mm)	おもな用途	価格(税別)
25-3319-H BT	ウルトラファイン	青	16.76 × 3.55	なし	152.9	耳鼻・小児	16,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ(mm)	ブレイクポイント(mm)	全長(mm)	おもな用途	価格(税別)
25-3318-H BT	マイクロファイン	白	7.92 × 3.55	100	153.16	耳鼻・小児	14,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ(mm)	ブレイクポイント(mm)	全長(mm)	おもな用途	価格(税別)
25-3606-H BT	オーバル	白	17.39 × 5.56	30	152.4	口腔・咽頭	16,000円



品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ(mm)	ブレイクポイント(mm)	全長(mm)	おもな用途	価格(税別)
25-3706-H BT PK	オーバル	ピンク	17.39 × 5.56	100	152.4	口腔・咽頭	16,000円




品番	チップ形状	キャップの色	チップサイズ(mm)	ブレイクポイント(mm)	全長(mm)	おもな用途	価格(税別)
25-3806-H BT PK	オーバル	ピンク	17.39 × 5.56	なし	152.4	口腔・咽頭	16,000円



- 純度の高い検体をできるだけ高効率に回収できるように開発・設計されたピュアフロックウルトラ・スワブは、ユニットランズ-RT の液相培地と組み合わせられることにより、PCR、直接蛍光抗体法（DFA）、分子診断、ELISA 法等の、検体の高い純度を要求する高感度な試験法に最適な輸送システムとなります。
- ピュアフロックウルトラ・スワブでは、ピューリタン社の特許取得済の植毛工法により、数十本の糸を撚り合わせた高密度繊維を使い、独自形状のポリエステル製マイクロファイバーを形成しています。

品 番	25-3320-U EMB 80	25-3317-U
綿球タイプ	ウルトラファイン	ウルトラファイン
主 な 用 途	耳鼻・小児	耳鼻・小児
ブレイクポイント	80mm	100mm
包 装 単 位	50本入	50本入
価 格 (税別)	4,200円	3,500円

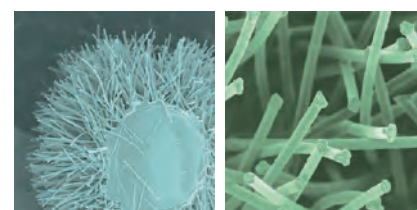

医療機器製造販売届出番号 13B2X10572000008

〈製造販売業者〉 株式会社スギヤマゲン

〈外国製造業者〉 Puritan Medical Products Company LLC

(ピューリタン メディカル プロダクツ カンパニー エルエルシー)

国名：アメリカ合衆国

エスティック



軸のスリット部分を前後に折りねじることによって折れます。

特 徴

- ポリエステル綿を使用し、ウイルスや細菌、DNA 採取、様々な検体向けに開発した綿棒です。
- 吸水性が高く、採取したウイルスや細菌の放出性に優れているので検体の採取率が良く検査の精度が向上します。吸水率は綿球の形状で調節できます。
- PA・PAX 軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく、綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ、検体採取時の違和感をなくしました。鼻腔や狭い箇所用の綿棒です。
- PX・PAX 軸はスリット入りで綿球部の軸を細くしているので柔軟性があり、軸を折ると 100mm の試験管に収納できます。

品 番	PX1503EZ	PAX1503PZ
軸 形 状	スリット	テーパー・スリット
長 さ	150mm	150mm
軸 質	PE	PP
入 数	400本	400本
価 格 (税別)	24,000円	24,000円

！ ご注意 フロックスワブではございません

医療機器製造販売届出番号 09B3X00006000047
09B3X00006000048

最近の輸送に適した液相輸送培地

詳しくは → P.8-9

特 徴

- 検体回収率が高い！
ピューリタン社が特許取得済のハイドラフロック・スワブにより、効率よく検体を吸着・溶出します。
- 幅広い検査法に対応！
オプティスワブ トランスポート・システムで採取・輸送した検体は、グラム染色や培養法はもちろん、PCR やイムノクロマト検査にも使用できます。自動塗抹装置でも使用可能です。
- 幅広い菌種に対応！
好気性菌はもちろん、嫌気性菌や栄養要求菌も高い生存率で回収できます。
- 検査の標準化を支援！
スワブに吸着した検体は液相培地に溶出され、均一な菌液として各種検査に使用できます。



ユニトランズ-RT トランスポートシステム

新しいウイルスの輸送システム

詳しくは → P.28-29


特 徴

- 検体回収率が高い！
ピューリタン社が特許取得済のピュアフロックウルトラ・スワブにより、効率よく検体を吸着・溶出します。さらに、チューブ内のガラス・ビーズが、検体を迅速に溶出・分散させます。
- ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマの検体輸送・保管に対応！
液相培地は、ウイルス、クラミジア、マイコプラズマ、ウレアプラズマの輸送・保管に適した環境となるよう、pH 調整され、抗生物質の添加により細菌・真菌のコンタミを防ぎます。
- 検査の標準化を支援！
スワブに吸着した検体は液相培地に溶出され、均一な菌液として検査に使用できます。
- 様々な温度帯の輸送・保管に対応
培地は室温での安定性に優れています。検体採取後の輸送や一時保管については、冷蔵（2℃～8℃）もしくは凍結したほうがよりよい生存率が得られます。凍結保存が可能です。




メディ・スワブ ーパウチ入り滅菌小包装スワブ


〈製造販売届出番号：13B2X10572000009〉

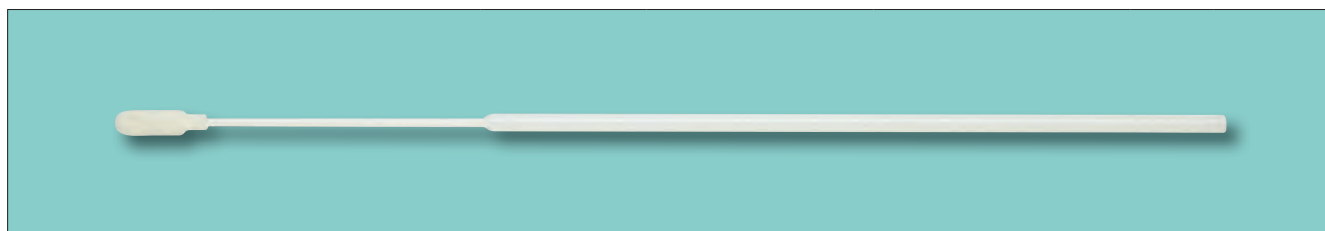


品番	綿球材質	綿球サイズ(mm)	スワブ軸材質	全長(mm)	入数	価格(税別)
25-1406 1PF50	ポリウレタンフォーム	13.8×3.5	アセタール	152.4	500本	54,000円

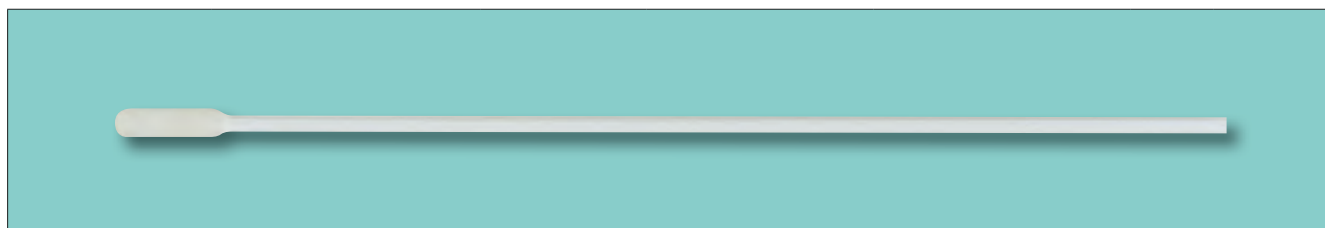


品番	綿球材質、形状	綿球サイズ(mm)	スワブ軸材質	全長(mm)	入数	価格(税別)
25-1506 1PF100	フォーム、スタンダード	16.0×4.775	ポリスチレン製	152.4	1,000本	48,000円

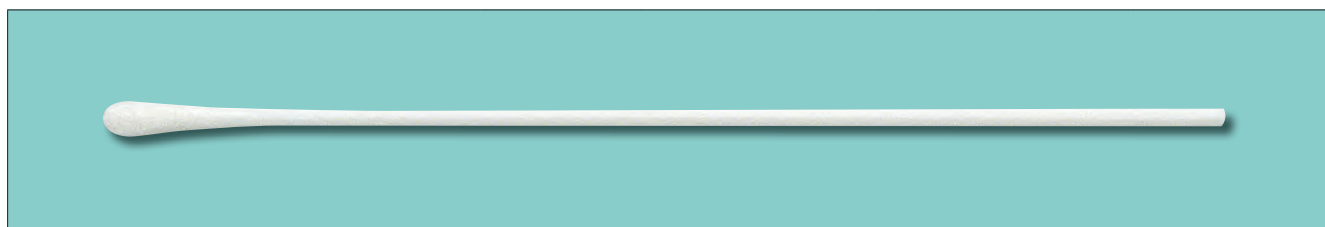


品番	綿球材質、形状	綿球サイズ(mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長(mm)	入数	価格(税別)
25-806 1PR	レーヨン製、スタンダード	17.45×5.16	ポリスチレン	2.54×152.4	1,000本	35,000円

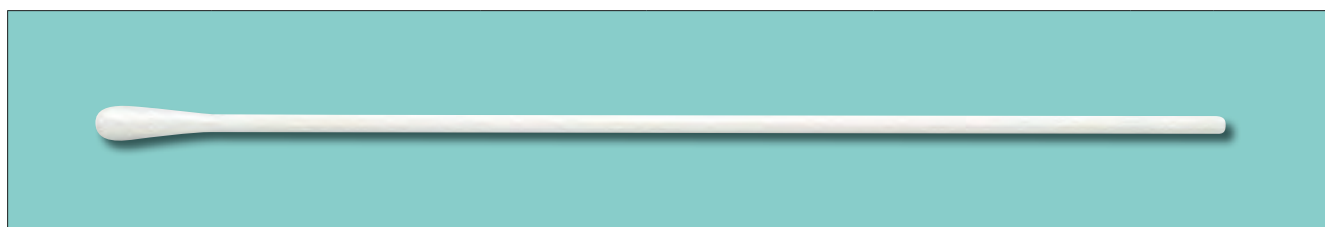

品番	綿球材質、形状	綿球サイズ(mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長(mm)	入数	価格(税別)
25-806 1PD	ポリエステル製、スタンダード	17.45×5.16	ポリスチレン	2.54×152.4	1,000本	34,000円

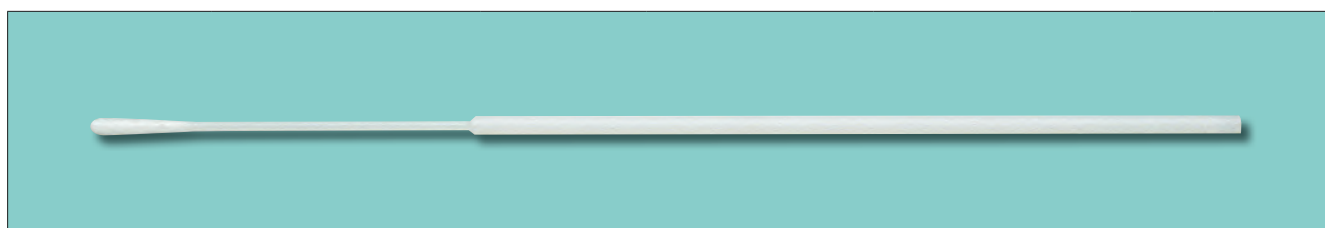

品番	綿球材質、形状	綿球サイズ(mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長(mm)	入数	価格(税別)
25-800 1PD 50	ポリエステル製、細型	17.45×1.98	ポリスチレン	2.49×1.32×154.0	500本	58,000円

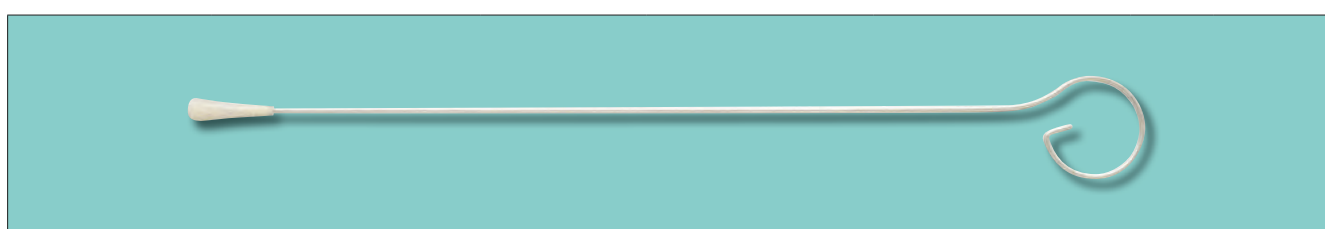

品番	綿球材質、形状	綿球サイズ(mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長(mm)	入数	価格(税別)
25-800 A 50	アルギン酸カルシウム製鼻咽頭用	11.10×1.98	アルミ	0.89×138.1	500本	70,000円

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品

チューブ入り滅菌個包装スワブ（培地なし）

（製造販売届出番号：13B2X10572000005）



品番	綿球材質、形状	綿球サイズ (mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長 (mm)	入数	価格 (税別)
25-1406 1PF BT	ポリウレタンフォーム、スモール	13.89 × 3.58	ナイロン	2.489 × 1.321 × 152.4	500本	55,000円



品番	綿球材質、形状	綿球サイズ (mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長 (mm)	入数	価格 (税別)
25-1506 1PF BT	ポリウレタンフォーム、レギュラー	16 × 4.78	ポリスチレン	2.54 × 152.4	500本	75,000円



品番	綿球材質、形状	綿球サイズ (mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長 (mm)	入数	価格 (税別)
25-806 1PR BT	レーヨン製、スタンダード	17.45 × 5.16	ポリスチレン	2.54 × 152.4	100本	10,000円



品番	綿球材質、形状	綿球サイズ (mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長 (mm)	入数	価格 (税別)
25-806 1PD BT	ポリエステル製、スタンダード	17.45 × 5.16	ポリスチレン	2.54 × 152.4	500本	38,000円



品番	綿球材質、形状	綿球サイズ (mm)	スワブ軸材質	スワブ軸径×全長 (mm)	入数	価格 (税別)
25-800 1SAR BT	レーヨン製、細型	17.45 × 1.98	アルミニウム	0.64 × 152.4	500本	128,000円

※価格は変更する場合がございます（2023年3月現在）

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送


検査器材

検査関連機器

感染対策商品

唾液採取セット（ストロー付き）

- 試験管サイズ：16φ×108mm
- 滅菌方法：電子線滅菌（EB）
- ストローサイズ：6φ×95mm

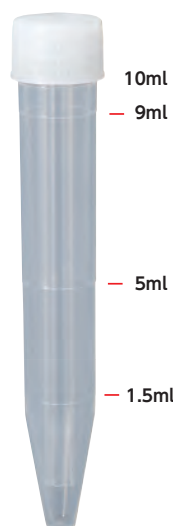

1.5ml、5ml、
9ml、10ml の
4 段階の目盛り付き

使用方法

1. 袋を切込みに沿って開封してください、試験管のキャップを開けストローを取出してください。
2. 口腔内に唾液を溜め、ストローを使って試験管に注入してください。コロナ検査に必要な唾液量は 1～2ml です。試験管下部の目盛り 1.5ml まで出してください。
3. 規定量の唾液を出したら、二次感染を防ぐため使用したストローは元の試験管に戻して、キャップを最後までしっかり閉め、絶対に漏れないようにしてください。

品 名	唾液採取セット滅菌（ストロー付き）
品 番	SG-915
注文単位	500 個/個包装
材 質	ポリプロピレン（PP）
価格（税別）	23,000 円

サリベット（唾液採取キット）

唾液の採取を衛生的かつ簡単に行うことができます

特 徴

- 2 分間で約 1ml の唾液を採取できます。
- 遠心処理で唾液から残渣と粘液成分を分離します（1000g×2 分）。
- 唾液を吐き出すことの心理的な抵抗感の軽減します。
- スリム設計で場所を取らず多検体を並べることが可能です。

品 名	サリベット - 唾液採取キット
品 番	SG-4351.3000
入 数	5 本×20 袋包装 ※滅菌済
材質（本体） （キャップ）	PP LD-PE
価格（税別）	22,000 円




唾液採取用綿棒「エススティック」

医療機器製造販売届出番号：09B3X00006000055

特 徴

- 吸水性と検体の採取率に優れたポリエステル製綿棒。
- 滅菌・一本個包装
- 唾液採集後、スリットを折って PCR メディア SG に収納できます。（ブレイクポイント 95mm、綿球φ 9mm）

品 名	品 番	長さ/容量	入 数	価格（税別）
エススティック	PX1509SZ	150mm	300 本	24,000 円

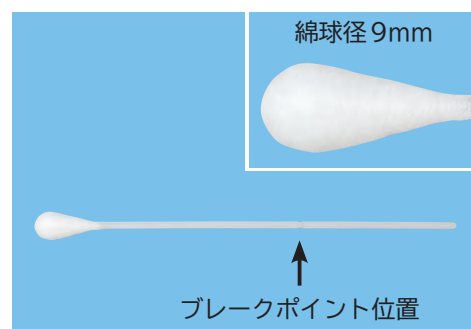

喀痰採取容器

特 徴

- 先端の形状はコンパクトサイズでかつ自立型タイプです。
- 管径が 30 φと広径なので容易に喀痰採取ができます。

製品情報

- 全長：78mm
- 管径（最大部）：30 φ
- キャップ径：37 φ
- 材質 管：PS キャップ：PE
- γ線滅菌済、個包装

1、2、3ml の位置にライン入り
唾液採取も可能です

品 番	品 名	入 数	包装形態	価格(税別)
SMPP-030	喀痰採取容器	400個入	個包装・10本×40袋入	30,000円




Microvette® 微量採血管

特徴

- プラスチック製のため、ガラス製に比べて安全に使用できます。



使用方法

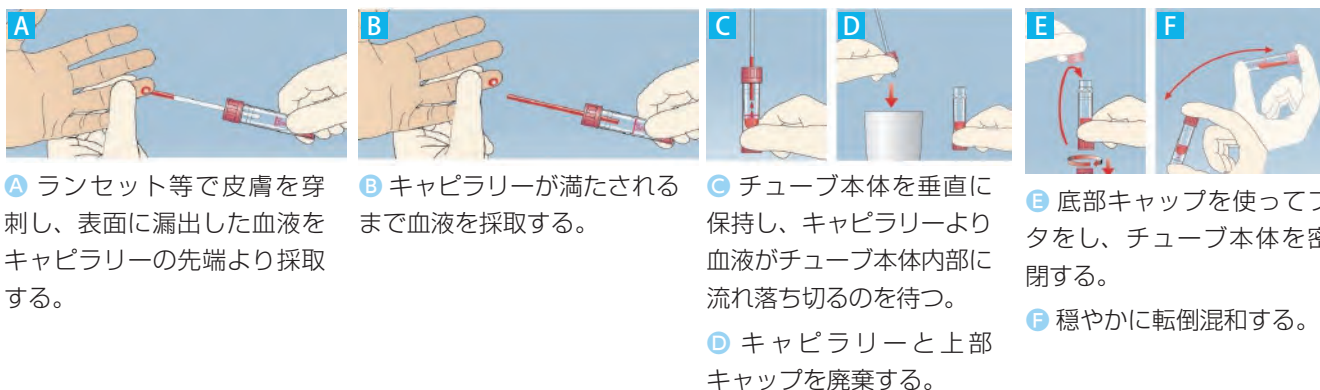

	品番	製品名	添加剤	材質(本体/キャップ)	カラーコード	入数	価格(税別)
①	20.1280.100.2	Microvette 微量採血管 100 Z	凝固促進剤	PP/PE	赤	100本	9,500円
②	20.1290.100.2	Microvette 微量採血管 200 Z	凝固促進剤	PP/PE	赤	100本	9,500円
③	20.1291.000.2	Microvette 微量採血管 200 Z-Gel	凝固促進剤/ゲル	PP/PE	茶	100本	10,400円
④	20.1282.100.2	Microvette 微量採血管 100 LH	ヘパリンリチウム	PP/PE	緑	100本	9,500円
⑤	20.1292.100.2	Microvette 微量採血管 200 LH	ヘパリンリチウム	PP/PE	緑	100本	9,500円
⑥	20.1278.100.2	Microvette 微量採血管 100 K3E	EDTA K3	PP/PE	紫	100本	9,500円
⑦	20.1288.100.2	Microvette 微量採血管 200 K3E	EDTA K3	PP/PE	紫	100本	9,500円

管理医療機器 一般の名称：開放型採血用チューブ 販売名：Microvette 微量採血管 医療機器認証番号：301AKBZI00011000

発売元／選任製造販売業者



ザルスタット株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-11
TEL:03-3526-3530 FAX:03-3526-0870

ベンキャッチ (ベンキャッチ・採取コンテナセット)



特 徴

- 衛生的、かつ、正確な採便が可能のため、検体検査の質が向上します。わずらわしい採便作業を簡単にし、便水に浸からないので確実な採便ができるキットです。
- 水流で流せる紙を採用しているため、使用後はそのまま便器で流すことができます。

ベンキャッチの特徴

- 中空構造のため尿やトイレの水と混ざらない。
- 立体形状のため、どのような便でもそのまま捕捉できる。
- 両面テープで便座の中央に固定できるので通常の姿勢で排便できる。
- 水解紙のため採便後トイレにそのまま流せる。



採取コンテナの特徴

- フタとスコップが一体化しているためゴミなどが出ない。
- 水様便でも取りやすい。
- スクリューキャップのためもれない。
- 便利なラベル付。


使用方法



1 準備
裏面にある両面テープの剥離紙を剥がしてください。
※剥離紙はトイレに流せません。



2 設置
便座を上げて、便器のふちに貼り付けます。
※設置してから形を整えてください。

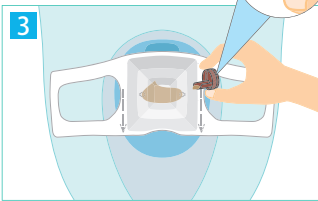

3 採便
用便後、便を採取してください。
※水様便の場合はスコップで液体をすくってください。



4 排水
便座からはがし、トイレに流してください。
※便座からはがす際は、両面テープが残らないようにゆっくりとはがしてください。急にはがすと採便シートの破れや糊残りの原因になります。

品 番	品 名	入 数	材 質	価格(税別)
BS-01	採便キット	ベンキャッチ 採取コンテナ 各1/袋×100セット入	ベンキャッチ：水解紙 採取コンテナ：PP/HD-PE	22,000円

個別販売

ベンキャッチ

品 番	材 質	包装単位	価格(税別)
B-01	水解紙	1枚包装×50袋/ケース	10,000円
B-200		200枚/ケース	26,000円

採取コンテナ

品 番	容 量	高さ/φ	数 量	包装単位	価格(税別)
SG-4299.720	70ml	55/44mm	500個	50個	51,200円
SG-4299.720J			100個		12,000円

※価格は変更する場合がございます(2023年3月現在)

感染性物質の輸送容器について



さまざまな国際規格や改正感染症法の規制に適合した輸送容器を提供。


感染性物質の輸送に関する国連規格に適合するカテゴリーA (UN2814/2900) の感染性物質用輸送容器や、臨床検査用検体の輸送に関する国連規格に適合するカテゴリーB (UN3373) の感染性物質輸送用容器を取り扱っています。改正感染症法の第1種、2種、3種、4種の特定病原体等の輸送容器に関わる規制や、国際規格IATA※、ADR等にも適合しています。

※IATA: International Air Transportation Association (国際航空運送協会)

2次容器 **BARRIERPOUCH®** に使用している技術


バリアパウチには、逆止弁方式という技術を使用しています。逆止弁方式とは、パウチ内面にフラップシートを設け、1次容器収納後フラップシートはシールされます。密着したフラップシートはパウチ内部に圧力が加わると、その内圧に同調してシール強度が増す構造で、高い耐圧性能を実現しています。

※逆止弁方式は当社独自の技術であり、日本、米国、EU及び中国にて特許取得済みです。

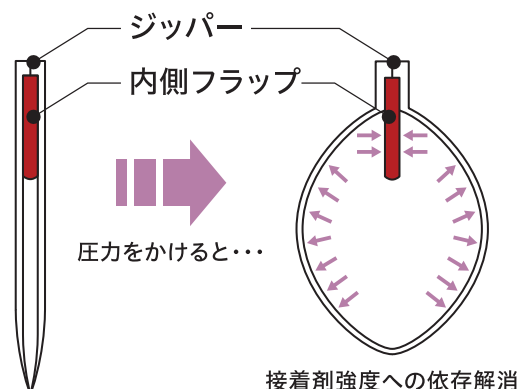

カテゴリー B の輸送に貢献します。

カテゴリー B の病原体・臨床検体・治験検体（UN3373）の輸送時は、三重梱包で送る必要があります。

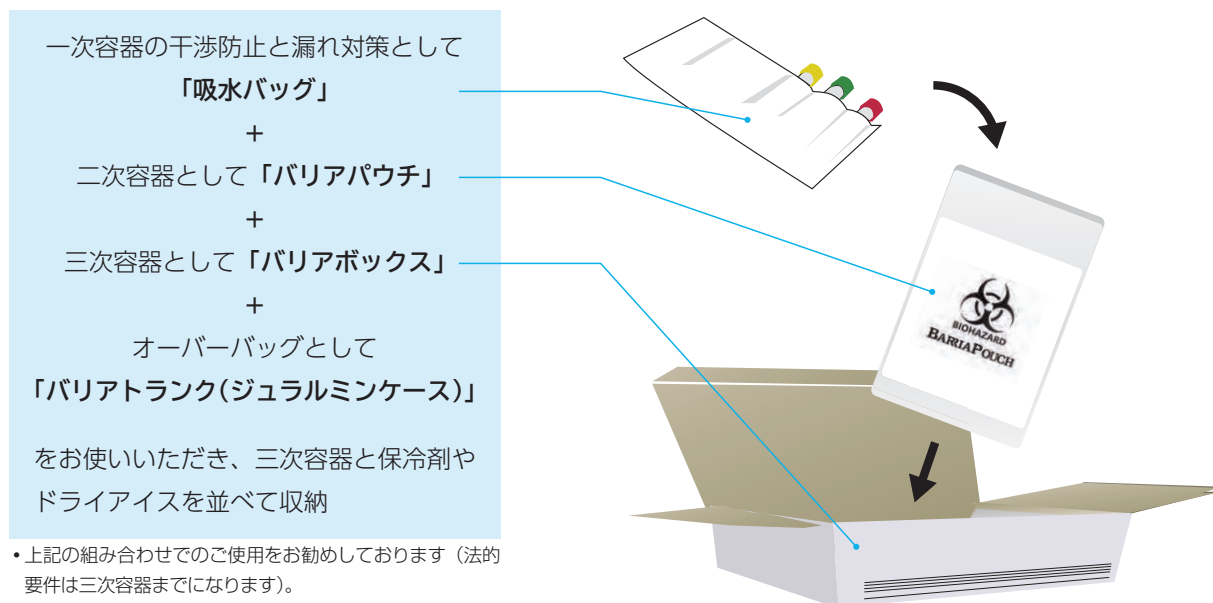

バリアパウチセット A5R10

セット内容

バリアパウチ A5R×10 枚

バリアボックス 5×10 個

吸水バッグ 6 連×10 枚

※写真は 1 セット分です

品 名	バリアパウチセット A5R
品 番	BRS-A5R10
価格(税別)	8,400円

- 一次容器（チューブ等）は付属されていません



単品でもご購入いただけます

バリアパウチ A5R → p46

バリアパウチは臨床検体や治験検体を安全に輸送できる 95kPa 耐圧パウチです。



バリアボックス 5 → p47

容易に組立可能な、コンパクトタイプ。常温輸送用。



吸水バッグ 6 連 → p46

試験管などの一次容器を保護し、万が一、液漏れが発生した時に内容物を吸収します。一次容器を収納して、バリアパウチと組み合わせてご利用いただけます。

二次容器 バリアパウチ

動画はこちら→



特徴

- 95kPa 耐圧・密封パウチ袋です。(日本国内の第三者公的機関で試験・実証済み)。
- 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現。高価な接着剤に頼らないことで、高耐圧性能と共に低価格化も実現しました。
- 試験管などの一次容器を収納できる吸水材も販売しています(別売)。

※特許取得国：日本・米国・EU 及び中国

● バリアパウチは密閉性を有しているため、ドライアイスは決して入れないでください。




バリアパウチ A5R



バリアパウチ B4R



有効内容積UP
ジッパー採用で20%UP

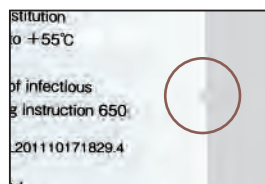

取り出しやすい
側面に切り込み




伝えやすい
背面に書類ポケット




わかりやすい
日本語の手順併記

耐圧試験

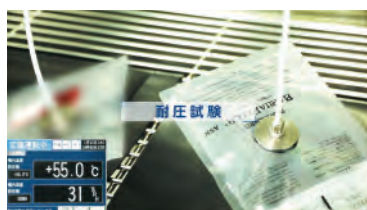

同条件下で耐圧試験を実施。

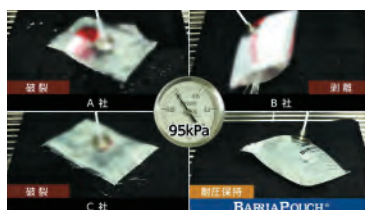

バリアパウチ以外の製品では水漏れが発生。



バリアパウチでは水漏れは発生しませんでした。

品名	品番	外寸(mm)	内寸(mm)	入数	価格(税別)
バリアパウチ A5R	BRP-A5R	250 × 185	190 × 155	20枚	5,600円
バリアパウチ B4R	BRP-B4R	385 × 270	260 × 240	20枚	8,400円

吸水バッグ・吸水シート・吸水材



BRP-AB3-N



BRP-AB6-B



BRP-ABS



BRP-ABF

品名	品番	仕様	入数	価格(税別)
吸水バッグ	BRP-AB3-N	15cc 試験管が3本収納できるポケット付 寸法：123 × 180 (mm)	20枚	1,800円
吸水バッグ6連	BRP-AB6-B	15cc 試験管が6本収納できるポケット付 寸法：123 × 318 (mm)	20枚	2,400円
吸水シート	BRP-ABS	寸法：250 × 330 (mm)	20枚	2,300円
吸水材	BRP-ABF	寸法：70 × 100 (mm)	100包	4,400円

三次容器 バリアボックス

特 徴

- 第三者試験機関にて降雨試験・落下試験「IATA 包装基準 650 (PI650) 適合」を実施・証明済です。
- 「バリアパウチ」を中に入れて使用することにより、IATA PI650 に適合するカテゴリー B の感染性物質 (UN3373) の輸送用外装容器として使用できます。
- 保冷性能を有する BRB1000 は、カテゴリー A の感染性物質 (UN2814/UN2900) の輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます。

(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れてください)

バリアボックス 1000



[商品構成]
外装容器 (紙製) × 1、断熱材 × 1、
パウチ保護用内箱 (紙製) × 1、吸水紙 × 1、
ラベル 4 種類 (UN3373 (大)、セキュリティ、
オーバーパック、ドライアイス × 各 1)

バリアボックス 450



[商品構成]
外装容器 (紙製) × 10、緩衝材 × 20、
セキュリティラベル × 10

バリアボックス 5



[商品構成]
外装容器 (紙製) × 20、
セキュリティラベル × 20

品 名	品 番	外寸 (mm)	内寸 (mm)	入 数	価格 (税別)
バリアボックス 1000	BRB1000	345 × 310 × 310	255 × 220 × H180	1 セット	7,700 円
バリアボックス 450	BRB-450	290 × 185 × 95	260 × 180 × H90	10 セット	16,500 円
バリアボックス 200	BRB-200	225 × 160 × 47	242 × 152 × H46	10 セット	6,600 円
バリアボックス 5	BRB5	200 × 120 × 30	196 × 110 × H27	20 セット	8,800 円

ラベルシール一覧



	品 名	品 番	サイズ (mm)	入 数	価格 (税別)
①	セキュリティ ラベル	—	34 × 75	20 枚	1,200 円
②	オーバーパック シール	—	100 × 50	20 枚	1,000 円
③	ドライアイス (クラス 9) ラベル	SPL-D-02	102 × 102	30 枚	1,200 円
④	病気を移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (大)	SPL-AL-01	100 × 100	15 枚	750 円
⑤		SPL-AL-02		60 枚	2,700 円
⑥	病気を移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (小)	SPL-AS-01	58 × 84	15 枚	750 円
⑦		SPL-AS-02		50 枚	2,250 円
⑧	UN3373 ラベル (大)	SPL-BL-01	100 × 138	15 枚	825 円
⑨		SPL-BL-02		60 枚	3,000 円
⑩	UN3373 ラベル (小)	SPL-BS-01	58 × 89	15 枚	750 円
⑪		SPL-BS-02		50 枚	2,250 円
⑫	セキュリティ ラベル	SPL-S-01	50 × 76	15 枚	750 円
⑬		SPL-S-02		50 枚	2,250 円

カテゴリー A の病原体（UN2814/UN2900） 輸送用国連規格容器

−40℃から+55℃の温度帯で 95kPa の内圧に耐えることができる
二次包装用プラスチック容器（バイオボトル・パソパック）

バイオボトル 1L、2L、3L

商品構成

- 輸送検体 IATA（空輸）/ADR（陸上）準拠を印刷した外装容器
- 一次容器が入れられるバブルラップパウチ
- 感染性物質表示ラベル

品 名	バイオ・ボトル 1L	バイオ・ボトル 2L	バイオ・ボトル 3L
品 番	SBB001	SBB002	SBB003
開 口 径	φ 70mm	φ 80mm	φ 110mm
有効内寸	φ 93 × H160mm	φ 120 × H230mm	φ 150 × H238mm
外箱外寸	110 × 120 × H175mm	125 × 125 × H245mm	155 × 155 × H255mm
価格（税別）	6,800円	7,800円	9,200円



パソパック 1L、2L

商品構成

- 輸送検体 IATA（空輸）/ADR（陸上）準拠を印刷した外装容器
- 一次容器が入れられるバブルラップパウチ
- 感染性物質表示ラベル
- シール用ラベル

品 名	パソパック 1L	パソパック 2L
品 番	SPP011	SPP012
開 口 径	φ 90mm	φ 127mm
有効内寸	φ 88 × H165mm	φ 125 × H170mm
外箱外寸	110 × 110 × H185mm	155 × 155 × H190mm
価格（税別）	6,800円	7,800円



バリアトランク シングル

検体安全輸送用
ジュラルミンケース（四次容器）

品 名	バリアトランク シングル
品 番	BRB-D-3
サ イ ズ	外寸：195 × 195 × H280mm 内寸：175 × 175 × H260mm
重 量	約 2.4kg
価格（税別）	26,800円

本容器に密閉性はありませので、保冷用に本容器内にドライアイスを受納した場合、昇華したガスは外部に抜けていきます。
（本容器に保冷性能はありません）

※二次三次容器はついてません。



感染性物質を輸送する際の注意点

感染性物質を航空機輸送する際には、国内、海外いずれの場合でも航空危険物規則書に記載されているルールを遵守しなければなりません。カテゴリー A とカテゴリー B では、容器や容量などが変わるので注意が必要です。
下記へカテゴリー A とカテゴリー B の主な違いをまとめました。

	カテゴリー A	カテゴリー B
包装基準	IATA 包装基準 PI620	IATA 包装基準 PI650
一次容器	防漏型の密閉されたもの	
二次容器	内圧差 95kPa に耐えるもの (−40℃～+55℃)	内圧差 95kPa に耐えるもの
三次容器 (外装容器)	国連のマークの記載要	国連のマークの記載不可
UN 番号	UN2814 UN2900	UN3373 (カテゴリー A の基準に該当しない感染性物質)

・ IATA = 国際航空運送協会・International Air Transportation Association の略

〈上記に関する補足事項〉

- ・一次容器が破損しないよう緩衝材で覆う。
- ・二次容器内には万が一、一次容器から漏れた場合に備えて内容物が全量吸収できる吸収剤を入れ、一次容器は二次容器内で固定する。
- ・二次容器と三次容器の間に内容物項目リストを入れる。
- ・外装容器には適切な表示をする。

感染性物質・臨床検体輸送容器製品リスト

	品 名	品 番	温度帯	適合・対応品
カテゴリー A	パンパック 1L	SPP011	常温・冷蔵・凍結	BRB-D-3・BRB1000
	パンパック 2L	SPP012	常温・冷蔵・凍結	BRB-D-3
	バイオボトル 1L	SBB001	常温・冷蔵・凍結	BRB-D-3・BRB1000
	バイオボトル 2L・3L	SBB002・SBB003	常温・冷蔵・凍結	BRB-D-3
カテゴリー B	バリアパウチ A5R	BRP-A5R	常温・冷蔵・凍結	BRB5・BRB-450・BRB1000
	バリアパウチ B4R	BRP-B4R	常温・冷蔵・凍結	BRB-450・BRB1000
	吸水バッグ 3連	BRP-AB3-N	常温・冷蔵・凍結	BRP-A5R・BRP-B4R
	吸水バッグ 6連	BRP-AB6-B	常温・冷蔵・凍結	BRP-A5R・BRP-B4R
	吸水シート	BRP-ABS	常温・冷蔵・凍結	BRP-A5R・BRP-B4R
	バリアボックス 5	BRB5	常温・冷蔵・凍結	BRP-A5R
	バリアボックス 450	BRB-450	常温・冷蔵・凍結	BRP-A5R・BRP-B4R
	バリアボックス 1000	BRB1000	常温・冷蔵・凍結	BRP-A5R・BRP-B4R・SPP011
オーバーバック	バリアトランク シングル	BRB-D-3	常温	SPP011・SPP012・SBB001・SBB002・SBB003

マイクロチューブ

左：セパレートタイプ
右：ループタイプ



容量		0.5ml	1.5ml	1.5ml	2.0ml	2.0ml	0.5ml	1.5ml	2.0ml
滅菌済 DNase- RNase- DNA- Free	品番	SG-037.712	SG-296.012	—	—	SG-496.712	SG-407.002	SG-607.002	SG-596.002
	キャップ	スクリュー (ループ)	スクリュー (ループ)	—	—	スクリュー (ループ)	プッシュ	プッシュ	プッシュ
	入数 (包装単位)	500本 (25本/袋) (250本/内箱)	500本 (25本/袋) (250本/内箱)	—	—	500本 (25本/袋) (250本/内箱)	500本 (50本/袋) (250本/内箱)	500本 (50本/袋) (250本/内箱)	500本 (50本/袋) (250本/内箱)
	価格(税別)	37,200円	34,500円	—	—	36,500円	13,900円	18,000円	20,900円


滅菌済 DNase- RNase- DNA- Free	品番	—	—	—	—	—	—	SG-607.102	SG-596.102
	キャップ	—	—	—	—	—	—	プッシュ	プッシュ
	入数 (包装単位)	—	—	—	—	—	—	120本 (1本/袋) (60本/内箱)	120本 (1本/袋) (60本/内箱)
	価格(税別)	—	—	—	—	—	—	7,800円	9,100円

DNase- RNase- DNA- Free	品番	SG-037.604	SG-296.504	—	SG-396.564	SG-496.604	SG-407.004	SG-607.004	SG-596.004
	キャップ	スクリュー (セパレート)	スクリュー (セパレート)	—	スクリュー (セパレート)	スクリュー (セパレート)	プッシュ	プッシュ	プッシュ
	入数 (包装単位)	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	—	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	2,000本 (250本/袋) (1,000本/内箱)	2,000本 (250本/袋) (1,000本/内箱)	2,000本 (250本/袋) (1,000本/内箱)
	価格(税別)	50,200円	45,200円	—	45,500円	49,100円	37,800円	19,900円	42,100円

タンパク 低吸着 DNase- RNase- DNA- Free	品番	—	—	—	—	SG-496.006	—	SG-607.006	SG-596.006
	キャップ	—	—	—	—	スクリュー (セパレート)	—	プッシュ	プッシュ
	入数 (包装単位)	—	—	—	—	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	—	800本 (50本/袋) (200本/内箱)	800本 (50本/袋) (200本/内箱)
	価格(税別)	—	—	—	—	52,000円	—	23,700円	23,900円

DNA 低吸着 DNase- RNase- DNA- Free	品番	—	—	SG-307.007	—	SG-496.007	—	SG-607.007	—
	キャップ	—	—	スクリュー (セパレート)	—	スクリュー (セパレート)	—	プッシュ	—
	入数 (包装単位)	—	—	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	—	1,000本 (100本/袋) (500本/内箱)	—	800本 (50本/袋) (200本/内箱)	—
	価格(税別)	—	—	62,800円	—	52,000円	—	15,700円	—

ラック

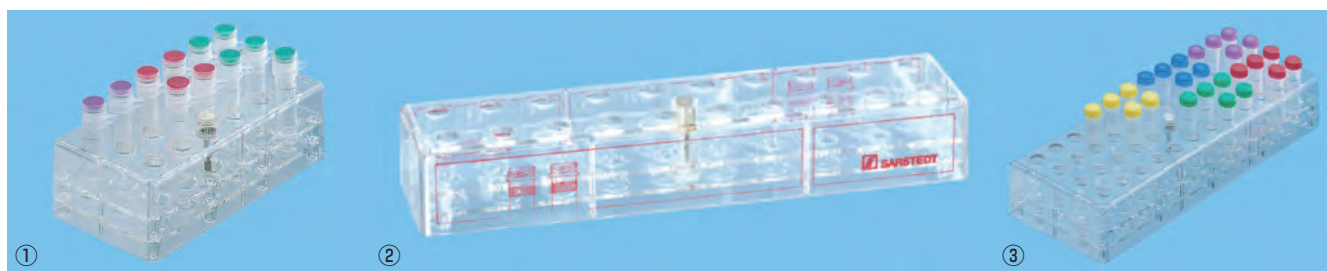

	品 名	品 番	サイズ(W×D×H)	材 質	価格(税別)
①	スペシャルラック18穴	SG-498	137×70×40	PC	9,000円
②	スペシャルラック20穴	SG-848.001	257×62×40	PC	9,600円
③	スペシャルラック48穴	SG-8241	257×90×40	PC	11,600円



フリーズボックス



	品 名	品 番	サイズ(W×D×H)	入 数	価格(税別)
①	フリーズボックス100穴	SG-001A	150×150×52	20個	18,500円
②	フリーズボックス81穴	SG-000A	135×135×53	20個	14,400円
③	フリーズボックス50穴	SG-050A	257×90×40	20個	14,400円

ピペットチップ

		品 名	品 番	容量 (μL)	数 量	価格 (税別)
①		ピタラックチップ ラック入り	SG-APR.02S	20 μ	576本	9,000円
		ピタラックチップ 交換プレート	SG-APR.02RS	20 μ	1152本	11,800円
②		ピタラックチップ ラック入り	SG-APR.002S	200 μ	576本	7,600円
		ピタラックチップ 交換プレート	SG-APR.002RS	200 μ	1152本	10,300円
③		ピタラックチップ ラック入り	SG-APR.0001S	1000 μ	576本	10,400円
		ピタラックチップ 交換プレート	SG-APR.0001RS	1000 μ	1152本	9,400円
④		フィルターチップ 20 μ ラック入り	SG-0203.552	20 μ	1920本	48,300円
		フィルターチップ 20 μ 交換プレート	SG-0203.553	20 μ	1920本	43,300円
⑤		フィルターチップ 200 μ ラック入り	SG-1303.552	200 μ	1920本	44,800円
		フィルターチップ 200 μ 交換プレート	SG-1303.553	200 μ	1920本	40,800円
⑥		フィルターチップ 1000 μ ラック入り	SG-0503.552.2	1000 μ	480本	11,600円
		フィルターチップ 1000 μ 交換プレート	SG-0503.553.2	1000 μ	480本	10,600円

対応ピペット表

ピペット本体	容 量	①	②	③	④	⑤	⑥
Eppendorf Reference 2	0.1-2.5 μl	●			●		
	0.5-10 μl	●			●		
	2-20 μl	●			●		
	2-20 μl		●			×	
	10-100 μl		●			×	
	50-200 μl		●			●	
	100-1000 μl			●			●
Eppendorf Reserch	0.1-2.5 μl	●			●		
	0.5-10 μl	●			●		
	2-20 μl		●			×	
	10-100 μl		●			×	
	20-200 μl		●			●	
	30-300 μl MC					×	
	100-1000 μl			●			●
Eppendorf Reserch plus	0.1-2.5 μl	●			●		
	0.5-10 μl				●		
	2-20 μl				●		
	2-20 μl					×	
	10-100 μl		●			×	
	20-200 μl		●			●	
	30-300 μl MC					×	
	100-1000 μl			●			●
Eppendorf Reference pro	0.5-10 μl	●			●		
	0.5-10 μl MC	●			●		
	5-100 μl		●				
	5-100 μl MC		●				
	20-300 μl					●	
	20-300 μl MC					●	
	50-1000 μl						●
Gilson Pipetman/Ultra/Concept	P2/U2 0.2-2 μl				●		
	P10/U10 0.1-10 μl				×		
	C8/C12 1-10 μl				×		
	P20/U20 2-20 μl					×	
	P100/U100 20-100 μl					×	
	P200/U200 20-200 μl					●	
	U8 20-300 μl					×	
	P1,000/U3,000 1000-5000 μl			●			●

滅菌済コンテナ・喀痰採取容器



	品 名	品 番	サイズ/φ	材質(本体/キャップ)	入 数	包装形態	価格(税別)
①	100ml コンテナ	SG-4531.400	74/62	PP/HD-PE	200個	個包装	16,000円
②	70ml コンテナ	SG-2299.447S	55/44	PP/HD-PE	250個	個包装	28,600円
③	250ml コンテナ	SG-2299.435	78/70	PP/HD-PE	240個	80/袋×3	56,800円
④	500ml コンテナ	SG-2299.318	150/70	PP/HD-PE	120個	40/袋×3	51,400円
⑤	喀痰採取容器	SMPP-030	30/37	PS/PE	400個	10本×40袋 個包装	30,000円

滅菌 V 底遠心チューブ



	品 名	品 番	サイズ/φ	材 質	入 数	包装形態	価格(税別)
①	10ml 遠心チューブ	SG-4299.482	100/16	PP	1000個	100本 / 袋×10	49,400円
②	10ml 遠心チューブ	SG-4299.382S	100/16	PP	500個	10本 / 袋×50	29,700円
③	ラック付き 15ml 遠心チューブ	SG-554.002	120/17	PP	500個	50本×10ラック	28,500円
③	15ml 遠心チューブ	SG-554.502	120/17	PP	500個	50本 / 袋×10	23,400円
④	ラック付き 50ml 遠心チューブ	SG-547.004	114/25	PP	300個	25本×12ラック	22,600円
④	50ml 遠心チューブ	SG-547.254	114/25	PP	300個	25本 / 袋×12	18,700円
④	50ml 遠心チューブ	SG-845.400S	114/25	PP	300個	10本 / 袋×30	22,300円

採取コンテナ (未滅菌)

➔ P.43 ペンキャッチ

	品 名	品 番	サイズ/φ	材質(本体/キャップ)	入 数	包装形態	価格(税別)
①	25ml コンテナ	SG-4299.410	54/28	PP/HD-PE	500個	50/ 袋×10	39,600円
①	25ml コンテナ	SG-4299.410J	54/28	PP/HD-PE	100個	50/ 袋×2	9,400円
②	70ml コンテナ	SG-4299.720	55/44	PP/HD-PE	500個	50/ 袋×10	51,200円
②	70ml コンテナ	SG-4299.720J	55/44	PP/HD-PE	100個	50/ 袋×2	12,000円



※価格は変更する場合がございます (2023 年 3 月現在)

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品

スポイト各種

👍 特 徴

- 使い残しのスポイトも密閉できるよう、ジップロック式袋を採用しています。
- 滅菌方法は、電子線滅菌を採用しており、EOG 滅菌品のように毒ガスの残留がなく、検査データの不安を一掃しています。
- 多検体の分注でも頭部が柔らかく疲れにくいソフトなバルブです。
- ポリエチレン（PE）製で焼却時に有毒ガスは発生しません。
- 滅菌済で衛生的なジップロック式袋包装です。

スポイト 0.5cc 2号



サイズ：長さ 143mm

目 盛：15 μ l, 30 μ l, 0.1ml, 0.2ml, 0.3ml, 0.4ml, 0.5ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
22612	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	23,000円
22611	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	22,000円

スポイト 0.5cc



サイズ：長さ 127mm

目 盛：0.1ml, 0.2ml, 0.3ml, 0.4ml, 0.5ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20024	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	22,000円
20021	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	21,500円

スポイト 1cc



サイズ：長さ 155mm

目 盛：15 μ l, 30 μ l, 80 μ l, 0.15ml, 0.5ml, 1.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20127	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	24,000円
20123	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	23,000円

スポイト 1cc (J)



サイズ：長さ 139mm

目 盛：10 μ l, 15 μ l, 0.25ml, 0.5ml, 0.75ml, 1.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
26034	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	23,000円
26031	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	22,000円

スポイト 1cc (L)



サイズ：長さ 150mm

目 盛：0.25ml, 0.5ml, 0.75ml, 1.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20524	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	33,000円
20521	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	27,500円

ロングスポイト 1cc



サイズ：長さ 230mm

目 盛：1.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20622	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	40,000円
20620	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	32,500円

スポイト 2cc (S)



サイズ：長さ 139mm

目 盛：0.1ml, 0.2ml …… 1.9ml, 2.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20224	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	34,000円
20221	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	27,500円

スポイト 2cc



サイズ：長さ 155mm

目 盛：1.0ml, 2.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20264	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	34,000円
20262	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	27,500円

スポイト 2cc (L)



サイズ：長さ 190mm

目 盛：0.1ml, 0.2ml, 0.3ml, 0.5ml, 1.0ml, 1.5ml, 2.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20284	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	36,000円
20281	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	29,000円

スポイト 3cc (GS)



サイズ：長さ 160mm

目 盛：0.5ml, 1.0ml, 1.5ml, 2.0ml, 2.5ml, 3.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
22205	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	34,000円
22215	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	27,500円

スポイト 3cc (L)



サイズ：長さ 240mm

目 盛：0.5ml, 1.0ml, 1.5ml, 2.0ml, 2.5ml, 3.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20344	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	42,000円
20243	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	32,000円

スポイト 5cc



サイズ：長さ 217mm

目 盛：1.0ml, 2.0ml, 3.0ml, 4.0ml, 5.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
25213	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	42,000円
25220	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	34,000円

毛細管付スポイト 3.5cc



サイズ：長さ 145mm

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20714	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	36,000円
20712	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	29,000円

喀痰用スポイト




サイズ：長さ 162mm

目 盛：0.5ml, 1.0ml, 1.5ml, 2.0ml

品 番	仕 様	収納枚数	価格(税別)
20364	滅菌 10本包装	2,000本 (10本×200)	36,000円
20361	滅菌 1本包装	1,000本 (1本×1000)	29,000円

シャーレ・スタック (3 兄弟)

SS-48 / SS-80

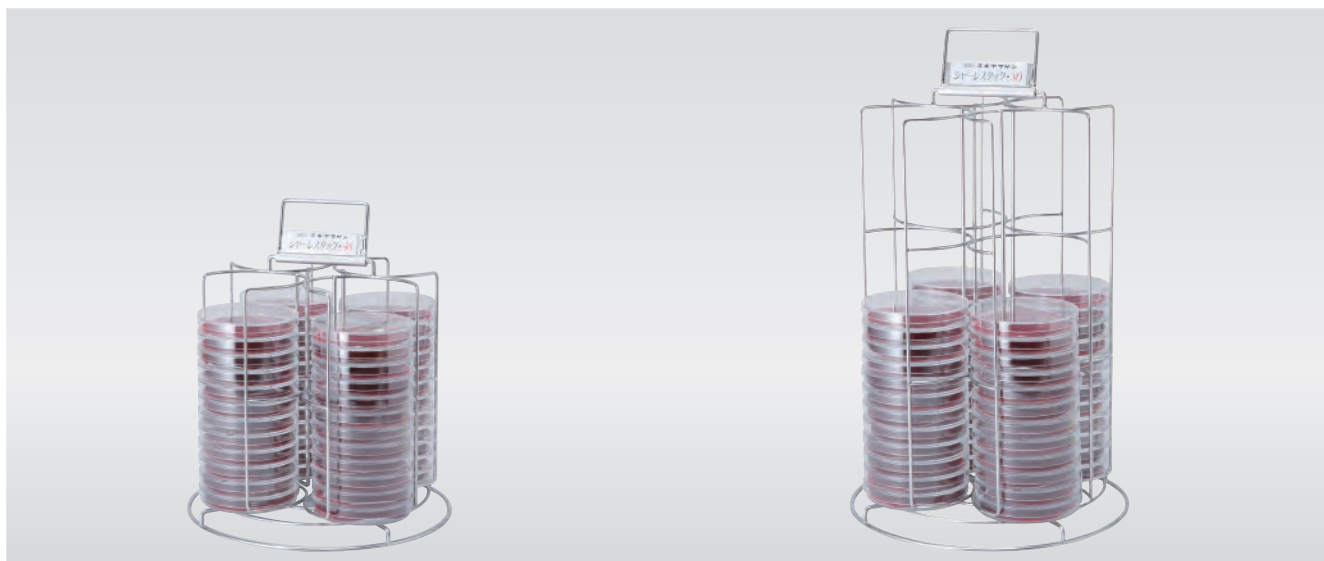

SS-48：ヨンパー（48枚用）

SS-80：エイティ（80枚用）

積み上げたシャーレの震災時安全対策としても最適！


細菌検査ラボで使われる 90mm シャーレは膨大な数量で、これらの管理と搬送はひと苦勞です。

うず高く積み重なったシャーレの山から目的のシャーレを取り出す場合、シャーレスタックならいちいち山を崩さずに、上段／中段／下段のどこからでも自在にシャーレを抜き出せます。

シャーレスタックには、90mm シャーレを 48 枚収容できる「SS-48：ヨンパー」と「SS-80：エイティ」の 2 器種があり、それぞれ小型・軽量。折り畳みの取っ手も付いて、使い勝手に優れています。

品 番	外 寸	収 納 枚 数	価 格 (税 別)
SS-48	φ 230 × H230 (mm)	12 × 4 列 = 48 枚用	12,000 円
SS-80	φ 230 × H355 (mm)	20 × 4 列 = 80 枚用	14,000 円

SS-10 / SS-20

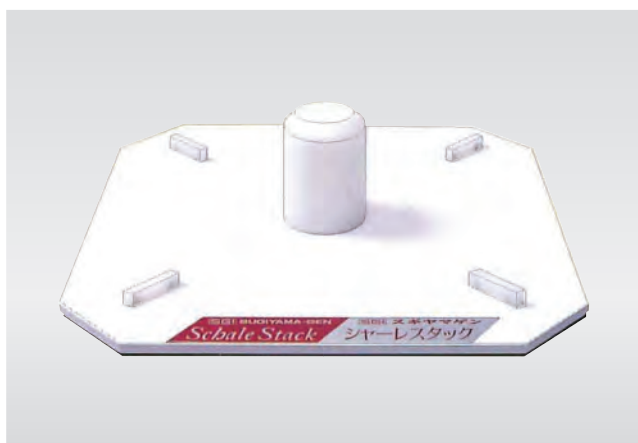

SS-10：ロータ（回転台）



SS-20：キャリー（シャーレスタック架台）

品 番	SS-10
外 寸	W250 × D250 × H70 (mm)
材 質	ベース：塩ビ+合成ゴム センターロッド&レール：PE 製
価 格 (税 別)	8,000 円

品 番	SS-20
外 寸	W820 × D400 × H800 (mm)
材 質	ボディ：SUS-304 キャスター：鉄、合成ゴム製
価 格 (税 別)	オープン価格

シャーレ・スタック (新型)

SS-15 / SS-18 / SS-24 (一列型)



品 番	外 寸	収 納 枚 数	価 格 (税 別)
SS-15	W100 × D100 × H255 (mm)	15 × 1 列 = 15 枚用	10,000 円 (2 個入)
SS-18	W110 × D110 × H290 (mm)	18 × 1 列 = 18 枚用	11,400 円 (2 個入)
SS-24	W110 × D110 × H405 (mm)	24 × 1 列 = 24 枚用	10,800 円 (2 個入)

SS-30 / SS-36 / SS-39 (二列型、三列型)



品 番	外 寸	収 納 枚 数	価 格 (税 別)
SS-30	W200 × D100 × H255 (mm)	15 × 2 列 = 30 枚用	8,000 円 (1 個入)
SS-36	W215 × D110 × H290 (mm)	18 × 2 列 = 36 枚用	12,800 円 (2 個入)
SS-39	W330 × D110 × H230 (mm)	13 × 3 列 = 39 枚用	9,800 円 (1 個入)

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品

シャーレ・スタック（新型）

SS-54 / SS-72



品 番	外 寸	収 納 枚 数	価 格 (税 別)
SS-54	W320 × D110 × H290 (mm)	18 × 3列 = 54枚用	10,800円 (1個入)
SS-72	W425 × D110 × H290 (mm)	18 × 4列 = 72枚用	15,200円 (1個入)

SS-48S / SS-80S（四列型）



品 番	外 寸	収 納 枚 数	価 格 (税 別)
SS-48S	W210 × D210 × H220 (mm)	12 × 4列 = 48枚用	12,000円
SS-80S	W210 × D210 × H365 (mm)	20 × 4列 = 80枚用	14,000円

※ 特注のご相談も申し受けます。

落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN™

👍 特 徴

一台二役！ レバーを切り替えるだけで落射蛍光顕微鏡としても、光学顕微鏡としても使えます。

- LED 光源により、“昼光”での観察を実現。その低温性により長期にわたって顕微鏡の高い品質が維持されます。
- LUMIN™ 落射蛍光モジュールの搭載により、簡単なレバーの出し入れだけで、標準の i-4 顕微鏡からフル機能の落射蛍光顕微鏡に切り替えることができます。そのイメージは、従来の高価な顕微鏡システムに匹敵します。

対物レンズ：無限補正 Semi Plan または Plan アクロマート対物レンズ
4 ×、10 ×、40 × R、100 × R (oil)

調整機構：粗動調整レンジ = 30mm 範囲、微動調整 = 2 μm 目盛

イルミネーション：＜明視野＞可動型アッベ集光レンズ (NA1.25)、虹彩絞り、LED 長寿命光源
＜落射蛍光＞ LED 長寿命光源、励起波長 = FITC を標準(LED485nm)搭載
他のフィルターキューブは要請に応じて利用可能

寸法と重量：寸法 = W152.5 × D267.5 × H457.2 (mm) 重量 = 10.9kg、



品 番	構 成 品 目	価格(税別)
LI4S-EPT4-ISL3	三筒タイプ、4,10,40,100X の4個の Semi Plan 対物レンズ	650,000 円
LI4S-EPT4-IPL3	三筒タイプ、4,10,40,100X の4個の Plan 対物レンズ	690,000 円

LUMIN™ 落射蛍光モジュール

お手持ちのニコン製、オリンパス製(CXシリーズ)顕微鏡に取り付けられます。

⚠️ ご注意

- ニコン用、オリンパス用を兼用することはできません。

品 名	品 番	価格(税別)
ニコン用モジュール	LNKN-EPIL-485N	405,000 円
オリンパス CX 用モジュール	LOLY-EPIL-485N	405,000 円
カールツァイス用モジュール	LZSS-EPIL-485N	405,000 円



動画はこちら↑



細菌検査
遺伝子・ウイルス検査
検体採取・検体容器
検体輸送
検査器材
検査関連機器
感染対策商品

※価格は変更する場合がございます（2023 年 3 月現在）

ヒートブロックシステム 高性能タイプ HBWK-2

MALDI バイオタイパーによるマイコバクテリアの抽出の際、
検体の入ったチューブ全体に 95℃、30 分の加熱滅菌処理が行えます。

特 徴

- 加熱フタで均一な加熱と保温が可能。
- 加熱フタでチューブからの蒸発が少ない。
- タッチパネルで簡単操作。
- 温度変化がグラフで確認できます。
- 99 件のプログラムを記憶できます。
- 温度 / 時間を 4 セクション登録でき、自由自在に温度変化を設定できます。
- 最大 99 サイクルまで繰り返し可能。



タッチパネル



本体左側面部に USB ポート付

対応容器

0.2/0.5/1.5/2.0/5ml チューブ

96/384 ウェル PCR プレート

品 番	HBWK-2
温 度 範 囲	室温 + 5℃ ~ 100℃
設 定 時 間	20分以内 (40℃ → 100℃ 上昇時)
加 熱 時 間	DC12V、50/60Hz、120W
電 源 / 電 力	円板装着時 (容器ホルダー)
外 形 寸 法	225 × 420 × 150mm/5.5kg
価 格 (税 別)	340,000円

小型ロータリーミキサー強力型

“MALDI バイオタイパー” による真菌（糸状菌）の
同定を行う際に必要となる回転培養に最適です！！

型 式	SG-30D
回 転 速 度	1 ~ 15rpm
回 転 制 御	電圧調整式
角 度 可 変 範 囲	90度 (垂直 - 水平)
外 形 寸 法	円板装着時 (容器ホルダー)
電 源	AC100V 50/60Hz 1A



品 番	品名 / 規格	価格 (税別)
SG-30D	小型ロータリーミキサー	89,000円
SG-30D-4R	15ml 遠沈管 4本用	9,500円
SG-30D-16R	15ml 遠沈管 16本用	16,000円

付属品：専用ホルダー

品 名	
品番：SG-30D-4R	15ml 遠沈管 4本用
品番：SG-30D-16R	15ml 遠沈管 16本用

新型電気滅菌器 SPEED STERI



特 徴

- ・ウォームアップのいらない電気バーナー。
- ・5～10 秒で 750～1000℃になります。
- ・タッチレス IR センサー技術により自動的に滅菌をスタートします。
- ・火傷防止ランプ機能が搭載しています。
- ・自動電源 OFF 機能付（15 分、30 分、60 分）。

品 名	品 番	附 属 品	価 格 (税 別)
SPEED STERI	HY-1000	白金耳、石英ガラス、白金耳スタンド	208,000 円

電気滅菌器 (ループシネレーター)

特 徴

- ・滅菌作業を燃焼管内で行うため、菌などが飛散することがなく、安全で簡単に使用できます。
- ・電気ヒーターによる滅菌方法なので、ガス配管の必要もなく、安全です。発熱量はガスバーナーに比べてわずか 1/6 です。

品 名	品 番	寸 法	価 格 (税 別)
ループシネレーター	SL-21	口径 = 15mm 外寸 = W95 × D170 × H200mm	85,000 円
(交換部品) ヒーターカートリッジ			35,600 円

電子着火式ブンゼンバーナー (フェーゴ)

特 徴

- ・マイクロプロセッサ制御方式の新型安全バーナーです。
- ・電子着火式なので種火の必要がなく、安全キャビネット内で安心して使用できます。
- ・フェーゴ SCS ベーシック、フェーゴ SCS は液晶ディスプレイにより、細かい設定が可能。
- ・フェーゴ SCS プロはオプションとの組み合わせにより、ガス配管のない場所、電源のとれない場所での使用が可能です。
- ・白金耳を 3 本立てておけるスタンドを標準装備。

品 名	品 番	内 容	価 格 (/ 税 別)
フェーゴ SCS ベーシック	2000020	フットペダル&ファンクションノブ	98,000 円
フェーゴ SCS	2000010	フットペダル&ファンクションノブ	125,000 円
フェーゴ SCS プロ	2000030	フットペダル&ファンクションノブ&赤外線センサー	135,000 円
ガスカートリッジ・アダプター	2050100	フェーゴ SCS プロ用	23,000 円
ガスカートリッジ	2050440	10 本入り 1 箱	18,800 円
スプレイプロテクター	2050190	滅菌時の菌の飛散を防ぎます	8,500 円
ウインドシールド	2050060	周囲からの風を防ぎます	5,800 円



電源：100V、50/60Hz、600w
寸法：110×170×180 (W×H×D) mm
重量：約 1.8kg
滅菌温度：750～1000℃
滅菌加熱時間：5～10 秒
滅菌チューブ：径 16mm、チューブ長 112mm



内部滅菌温度：800～850℃ (滅菌温度到達時間：10 分)
電源：AC100V、50/60Hz、1.5A (ヒーター 130W)



電 源：AC100V ～ 240V、50 / 60Hz、DC9V、1A (フェーゴ SCS プロは付属の充電バッテリーでも使用可能)
本体重量、寸法：700g、W103 × D130 × H49mm
適応ガス：天然ガス、プロパン、ブタンガス

※価格は変更する場合がございます (2023 年 3 月現在)

高圧蒸気滅菌器（医療用） HV シリーズ

数々の機能や操作性を兼ね備えたオートクレーブのベストセラーモデル

特 徴

- **エレクトロ・メカニカルロックシステム**
ワンタッチレバーでフタの開閉が簡単確実に行えます。圧力シール方法による安全対策も施しています。（特許取得）
- **ダブルインターロック機構**
滅菌中の缶内圧力と温度を検知し、フタをロックします。停電や手動で途中停止した場合※¹でもロック状態を維持します。
- **ダブルセンシングシステム**
滅菌不良を引き起こす缶内の残留空気をダブル※²で検知し、常に収容状況に適した滅菌状態を維持します。
- **排気レベルが選択可能**
事前に排気量（％）を設定することで、自動で微細排気が行えます。排気中でも微細排気の調整が可能です。
- **溶解コース**
凝固した寒天培地を溶解する便利なコースです。
- **予約タイマー機能**
セットした時間に運転が開始されるタイマー機能です。
- **メモリー機能**
コースごとに設定した内容を登録できます。
- **オートカット「OFF」機能※³**



- ※¹ 停止および手動停止後もインターロック機構は機能しています。
※² 97℃に到達し、空気抜きタイマー動作時と過圧排気時に残留空気を検知します。
※³ 30分以上の場合。

システムアップのオプション機器（後付可能）
A：強制冷却（空冷）……滅菌後の取り出し時間の短縮
F：フローティングセンサー……被滅菌物が設定温度に達した後、滅菌タイマー作動。
R：レコーダーまたはプリンター……データ収集
W：自動給水……わずらわしい水入れをカット
Z：フル装備……強制冷却（空冷）、フローティングセンサー、レコーダー（またはプリンター）、自動給水が装備されています。

管医Ⅱ：医療機器

型 式		HV-25 II	HV-50 II	HV-85 II	HV-110 II
医 療 機 器					
缶 体 寸 法 (φ × Dmm)		240 × 550	300 × 710	420 × 615	420 × 795
有 効 容 量		25 ℓ	50 ℓ	85 ℓ	100 ℓ
コ ー ス 選 択		液体コース・器具コース・廃棄物コース・寒天コース・溶解コース / 8メモリー			
温 度 設 定	滅 菌 温 度	105～121℃可変式	105～135℃可変式	105～128℃可変式 ※ 1	105～123℃可変式 ※ 1
	溶 解 温 度	60～100℃可変式			
	保 温 温 度	45～60℃可変式			
	フ タ ロ ッ ク 温 度	液体、寒天、溶解コース：60～95℃可変式 / 器具、廃棄物コース：60～97℃可変式 ※ 1			
時 間 設 定	滅 菌 タ イ マ ー	1～250分・残時間表示方式			
	溶 解 タ イ マ ー	1～60分・残時間表示方式			
	予 約 タ イ マ ー	1分後～1週間後・時刻設定方式			
	空 気 抜 き 時 間	3～9分可変式		6～18分可変式	
排 気 設 定		3段階（無・微少・少）			
最 高 使 用 圧 力 (MPa)		0.137	0.255	0.196	0.157
温 度 計		デジタル表示5.0～123.9℃	デジタル表示5.0～137.9℃	デジタル表示5.0～130.9℃	デジタル表示5.0～125.9℃
圧 力 計		デジタル 0～0.3MPa / アナログ表示 0～0.4MPa			
安 全 警 報 装 置		圧力安全弁・漏電及び過電流ブレーカー・空焚き防止装置 警報表示（空焚き・温度センサー断線・過温・過冷・過圧・フタ異常・開閉レバーロック異常）			
外 寸 法 (W × D × Hmm)		485 × 470 × 949	547 × 532 × 1046	667 × 652 × 1026	667 × 652 × 1206
重 量 (約)		44kg	60kg	83kg	89kg
圧 力 容 器 の 種 類		簡易压力容器		小型压力容器	
釜 体 材 質		ステンレス (SUS304)			
電 源		AC100V 15A 1.5kW	AC100V 20A 2.0kW	AC200V 15A 3.0kW	AC200V 20A 4.0kW
必 要 な 電 源 設 備		単相 AC100V (50/60Hz) 15A 以上	単相 AC100V (50/60Hz) 20A 以上	単相 AC200V (50/60Hz) 15A 以上	単相 AC200V (50/60Hz) 20A 以上
電 源 接 続 部 形 状		アース付 	丸端子 		
主 な 付 属 品		金網カゴ(2個)・排気ボトル・スノコ・排水ホース (50cm)・排気ホース (50cm)・ドレン回収ボトル・インシュロック・キャスターSTOPパー・保証書・取扱説明書・自主検査確認書・添付文章・小型压力容器明細書 (HV-25 II 除く)・アンケートハガキ			
医 療 機 器 認 証 番 号		229AABZX00056000	229AABZX00056000	229AABZX00056000	229AABZX00056000
管 理 医 療 機 器 (ク ラ ス II)		○	○	○	○
特 定 保 守 管 理 医 療 機 器		○	○	○	○
EMC 適 合 JIS C 1806-1:2010		○	○	○	○
価 格 (税 別)		605,000円	705,000円	865,000円	990,000円

※¹：沸点の設定値により上限値が変わります。※外寸法：外寸法のD寸法には、フタ開閉スライドレバーは含まれていません。※電源コード：AC100V 15A を超える製品と AC200V の製品は、3 芯の圧着丸端子付になります。本体専用ブレーカー、または手元開閉器等をご用意して接続してください。コンセントの場合は、形状をお知らせ頂き有償にて適合プラグをご用意致します。※電源設備：HV-50 II の電源設備は、AC100V 30A 以上を推奨します。※納品・検収費用：製品に関する納品・検収費用は別途料金になります。

遠心分離機

冷却タイプ H-60R / 冷却卓上タイプ H-30R



- バイオハザード対策用に、シーリングキャップ付アダプタが使用可能（3,000 × g、抗酸菌対応）です。冷却機能も付いています（設定温度範囲：－ 45℃～＋ 45℃）。
- ステップモード運転は 6 つの運転記憶が可能です。
- カルチャーチューブ 50ml が 8 本まで架けられます（抗酸菌対応の MES-110 バケット使用の場合）。
- 耐久性に優れたカーボンレス高周波モータの採用により、静かな運転を実現。カーボンのサンプルへのコンタミありません。
- 自動識別センサーでロータ条件を自動的に読み取ります。
- 安全性、操作性を重視し前面パネルを採用、また運転中を識別するために上蓋に透明アクリル板を使用しました。回転数の計測が安全にでき、キャリブレーションが容易にできます。

仕様

品 番	H - 60R	H - 30R
速 度 表 示	10rpm ～ 15,000rpm	Digital 10 or 100rpm
遠 心 力 表 示	10 × g ～ 16,110 × g	Digital 10 or 100rpm
温度設定・表示	Digital - 45℃ ～ + 45℃	
タイマ設定・表示	Digital 1 ～ 999min. 1 or 10min. unit	
	Digital 1 ～ 999sec. 1 or 10sec. unit	
g・Sec	1.00 ～ 4.00 × 10 ⁹ g・sec.	
制 御 方 式	マイクロコンピュータ + インバーター	
電 源	AC 1 φ 100V 15A 1.5kVA	AC 1 φ 100V 15A 1.0kVA
寸 法	W480 × D633 × H850 (mm)	W480 × D570 × H440 (mm)
重 量	85kg	58kg
価 格 (税 別)	800,000円	750,000円

ロータ及びバケット・ケース (抗酸菌対応)

	品 番	仕 様	価格(税別)
ロ ー タ	RF-110	スイングロータ	110,000円
バケット・ケース	MES-110	50ml チューブ×8本収納	200,000円
抗酸菌用密閉容器	ADS-012	8本セット	100,000円

※価格は変更する場合がございます（2023 年 3 月現在）

細菌検査
遺伝子・ウイルス検査
検体採取・検体容器
検体輸送
検査器材
検査関連機器
感染対策商品

安全キャビネット 傾斜 10 型クラス II A2

特徴

● JIS 自己適合宣言品

JIS 規格 (K3800:2009) 自己適合宣言品です。

● 使い勝手の向上

前面ガラススライドシャッターは無理なく作業ができる傾斜型です。
シャッター開口高さは標準設定の 250mm、または 200mm に設定可能です。

- ・ 前面開口高さ設定については、お客様からの高さ指定に対し工場出荷時の検査および現場検査を実施することにより指定の開口高さでご使用いただけます。

● 省電力

高効率 DC ブラシレスファン、長寿命 LED 照明を採用した省エネ型です。

● タッチ式操作パネル

ボタンスイッチとパネル画面で各種情報を表示します。画面は視認性を考慮した液晶パネルです。

● 前面シャッターと連動した自動モード

前面シャッターと連動したインターロック機構により、開閉動作で運転・停止、照明と殺菌灯の点灯・消灯ができます。殺菌灯による紫外線暴露を防ぎます。

● 調光機能付き LED 照明

5 段階の調光ができます。

● メンテナンスを考慮した構造

ファン、HEPA フィルター等の主要装備品は上部前面より、保守・点検ができます。前面スライドシャッターガラスは内側からの清掃が容易な構造です。

● 抗菌塗装

外装は無機銀系の抗菌塗装仕上げです。



BHC-1310 II A2 (JIS 自己適合宣言品)


本体構造

ガラスシャッター内側からも清掃可能な構造です。



前面スライドシャッター

使いやすい傾斜型ガラスシャッターで開口高さは標準設定が250mmです。ご要望により200mmに設定可能です。

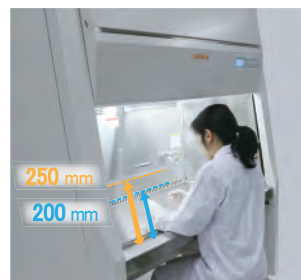

操作パネル

ディスプレイ画面を付加した使いやすい操作パネルです。



タッチパネル画面表示

各種情報を表示するタッチパネル画面



傾斜 10 型クラスⅡ A2 寸法図 / 仕様

BHC-1010ⅡA2
BHC-1310ⅡA2


型式	BHC-1010ⅡA2	BHC-1310ⅡA2
W10	1200	1500
W11	1000	1300
W12	1000	1300

単位：(mm)

BHC-1610ⅡA2
BHC-1910ⅡA2

型式	BHC-1610ⅡA2	BHC-1910ⅡA2
W20	1800	2100
W21	1600	1900
W22	1600	1900

単位：(mm)

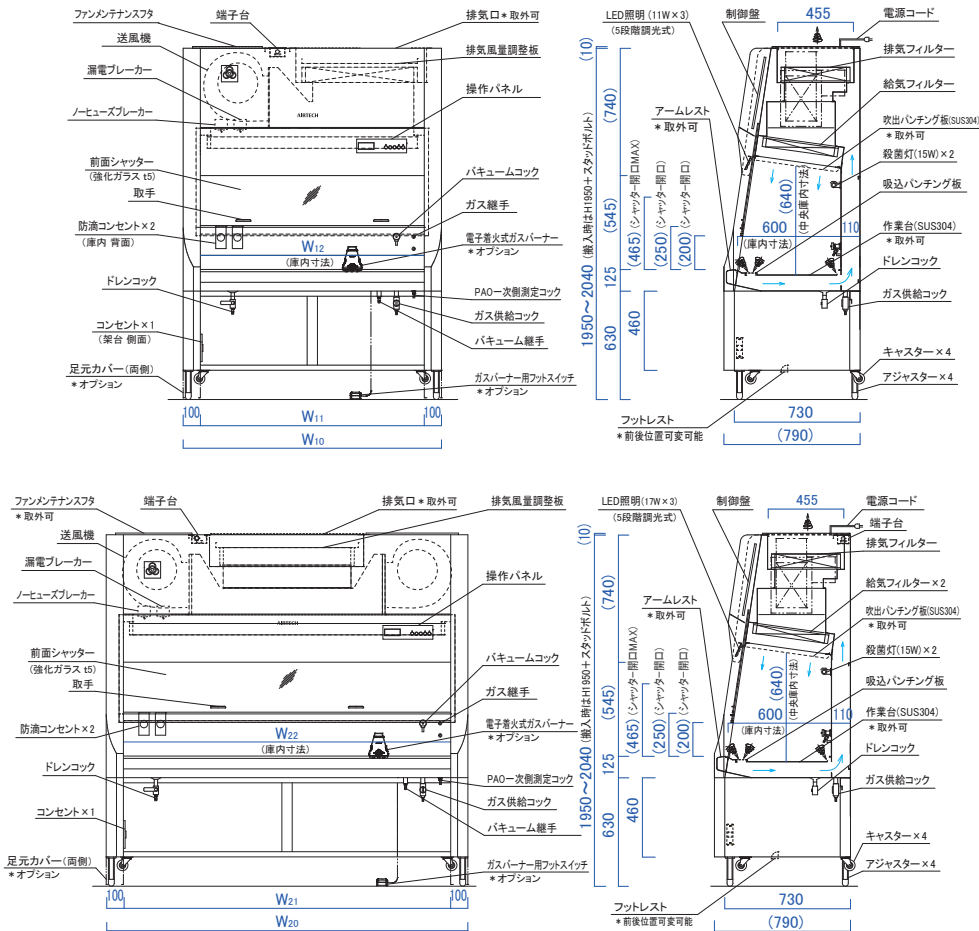

品番	BHC-1010ⅡA2	BHC-1310ⅡA2	BHC-1610ⅡA2	BHC-1910ⅡA2
集塵効率	0.3 μm 粒子にて99.99%以上 * スキャンテスト品			
集塵要素	給気用HEPAフィルター * スキャンテスト品	(CD3130962)	(CD3130965)	(CD3150283) × 2
	排気用HEPAフィルター * スキャンテスト品	(CD3151319)	(CD3148479)	(CD3151320)
処理風量：給気 (m³/min)	* 前面開口寸法200mm時	11.0 (循環気率 約60%)	14.3 (循環気率 約62%)	16.2 (循環気率 約62%)
	* 前面開口寸法250mm時	13.1 (循環気率 約63%)	17.1 (循環気率 約62%)	20.0 (循環気率 約61%)
処理風量：排気 (m³/min)	* 前面開口寸法200mm時	6.6	8.6	10.2
	* 前面開口寸法250mm時	8.3	10.7	12.2
作業室内風速 (m/s)	* 前面開口寸法200mm時	0.33±0.025	0.33±0.025	0.31±0.025
	* 前面開口寸法250mm時	0.40±0.025	0.40±0.025	0.38±0.025
前面流入風速 (m/s)	* 前面開口寸法200mm時	0.55±0.025	0.55±0.025	0.53±0.025
	* 前面開口寸法250mm時	0.55±0.025	0.55±0.025	0.51±0.025
電源	AC100V 1 φ 50/60Hz			
消費電力 (W)	約280	約400	約490	約560
設備電力 (VA)	約440	約550	約660	約700
LED照明 * 5段階段階調光式	8W × 3	11W × 3	14W × 3	17W × 3
殺菌灯	15W × 2	15W × 2	15W × 2	15W × 2
重量 (kg)	約300	約330	約410	約440
最小搬入寸法 (mm)	W1200 × D730 × H1970	W1500 × D730 × H1970	W1800 × D730 × H1970	W2100 × D730 × H1980
構造	本体、架台：鋼板製焼付塗装、作業室、アームレスト、吹出パンチング板：ステンレス製			
価格(税別)	1,710,000円	1,820,000円	2,520,000円	3,005,000円


* 給気/排気HEPAフィルターはスキャンテスト品です。 * 前面シャッター開口高さは200mmまたは250mmに設定されています。予め設定された開口高さにてご使用ください。 * 作業室内風速は前面開口寸法200mm時の場合、作業台上335mmの位置にて計測。前面開口寸法250mm時の場合、作業台上385mmの位置にて計測した数値です。 * 開放式ダクト(キャノピーフード)にて室外排気をおこなう場合、安全キャビネットの排気風量に対し、約1.5倍(約150%)の建屋側排気設備を確保することを推奨します。設置は屋外排気用ダクトチャンバーが別途必要です。(オプション) * 消費電力は送風機+照明運転時の数値で、コンセント容量は含みません。 * インバーター式殺菌灯はシャッターとのインターロック機構付です。 * 最小搬入寸法は表記寸法に+20mm程度の余裕を取ってください。

オプション	電子着火式ガスバーナー（フットスイッチ付）、排気フィルター差圧計、オートビペット	警報	下記の場合、ブザーおよび表示（表示器）にて異常を警報します。
	バキュームポンプまたはアスピレーター、専用ハンガーパイプ、足元カバー		1)ファンの異常発生時
	差圧スイッチによる排気HEPAフィルター目詰まり警報（表示、ブザー付）		2)前面流入風速および給気風速異常時
	屋外排気用ダクトチャンバー（開放ダクト式）＋φ250ポリウムダンパー		3)前面シャッター開口の設定（200mmまたは250mm）と使用開口高さが異なる場合。
	*ポリウムダンパーを取付ける場合は、キャノピーフード先端より1m以上離してください。		4)その他警報発生時（内容については取扱説明書をご参照ください）

安全キャビネット 卓上傾斜型クラスⅡ A2

特徴

- 作業台上や狭いスペースにも設置できる安全キャビネットです。小型化と軽量化を実現しました。
- 作業を重視し、傾斜型スライドシャッターを採用しました。
- DC ブラシレスモーター・LED 照明により省エネです。
- 薬局、病院等の薬品調合用や生物学実験等、幅広い用途にご使用できます。
- 専用の排気フードを使った室外排気仕様もオプションで用意しました。

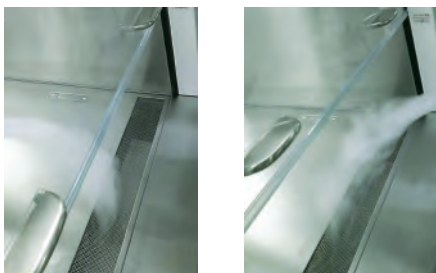

作業室内部、および装置外部からのエアバリアを形成します。




従来品との比較(当社比)

高さ
-200mm

奥行
-50mm

重さ
-約28%

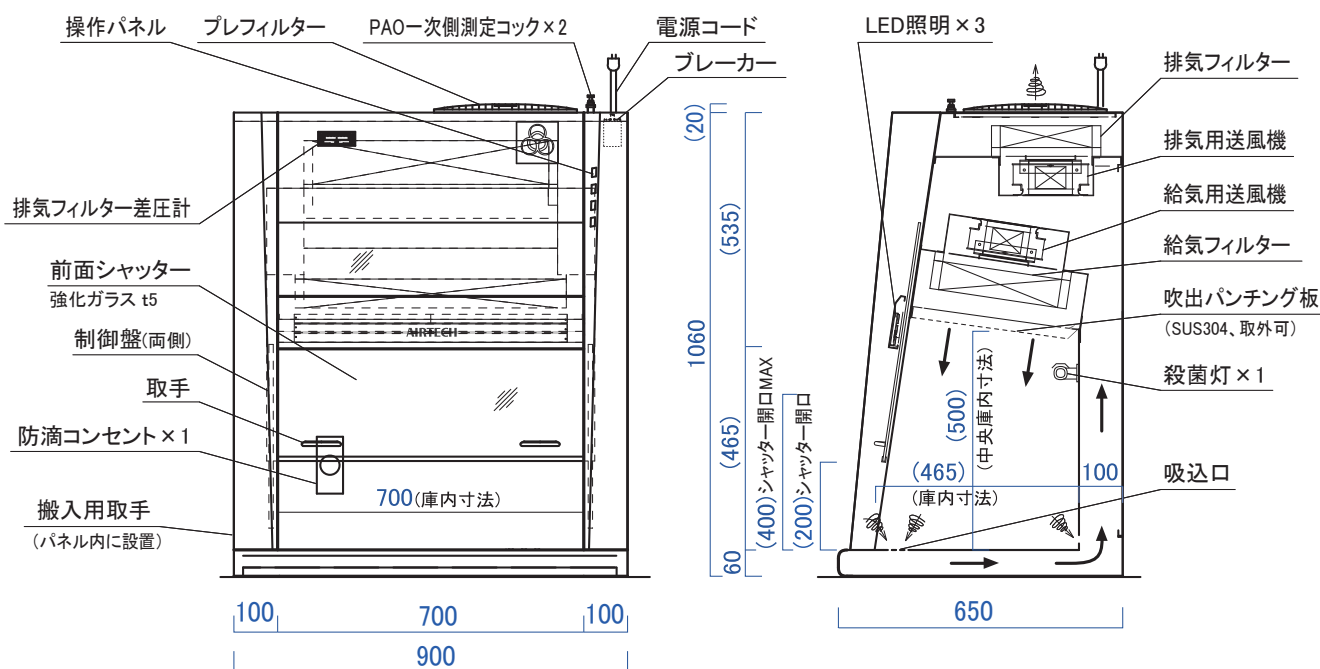

品番	SBHC-T701 II A2
集塵効率	0.3 μm粒子 (PAO) にて99.99%以上 *スキャンテスト品
集塵要素	給気 HEPA フィルター: CD3203374、排気 HEPA フィルター: CD3203443、プレフィルター: サランネットフィルター
処理風量	給気: 約5.7m³/min、排気: 約4.4m³/min
吹出風速	約0.32m/s
流入風速	約0.53m/s
電源	AC100V 1 φ 50/60Hz
消費電力	約160W(ファン+照明運転時、コンセント容量は含まず)
設備電力	約160VA
照明 *LED 照明	8W × 3
殺菌灯 * インバーター式	15W × 1
重量	約90kg
最小搬入寸法	W900 × D650 × H1210mm (左記寸法+20mm 程度の余裕を取ってください)
構造	本体: 鋼板製焼付塗装、作業室: ステンレス
オプション	電子着火式ガスバーナー、鋼板製専用架台、オートピペット、専用ハンガーパイプ、ドレンコック、バキュームコック、室外排気チャンバー
価格 (税別)	1,125,000円 SBHC-T701 II A2-G は ¥1,150,000 (ガスバーナー用配管付)

- 開放式ダクト (キャノピーフード) にて室外排気をおこなう場合、安全キャビネットの排気風量に対し、約 1.5 倍 (約 150%) の建屋側排気設備を確保することを推奨します。
- 設置時に装置周囲のメンテナンス空間の確保を推奨します。(背面 100mm、天井まで 500mm、左右 200mm、および前面は 1000mm)

電子着火式ガスバーナー+フットスイッチ

- 転倒時自動消火や消し忘れ機能を付加した安全性重視のガスバーナーです。
- 対象ガスの種類を選べます。(都市ガス 13A仕様、LPG仕様 他)
- ガスホースは消耗品です。定期的な点検、交換が必要です。



品番	GB-60E9
価格(税別)	106,000円(フットスイッチを含む)

屋外排気用ダクトチャンバー(開放ダクト)

- キャノピーフードを取り外した密封ダクト式も可能です。
- φ 250 ポリウムダンパー付



品名	排気チャンバー+ VD	キャノピーフード
価格(税別)	90,000円	38,000円

排気フィルター用差圧スイッチ(高圧、低圧)

- 排気フィルターの圧力で排気風量の異常を検出できます。
- 警報用
- 流入/給気の風速異常警報は標準装備です。



価格(税別)	45,000円
--------	---------

オートピペット

- 充電式です。
- 100V 電源に接続すれば連続使用もできます。



価格(税別)	75,000円
--------	---------

専用ハンガーパイプ(混注パイプ)

- ハンガーパイプは全てステンレス製で10個の吊フック付です。



品名	1300タイプ
価格(税別)	27,000円

エアー・リキッド製小型吸引機

アスピレーター+フットスイッチ

- フットスイッチと連動できます。



最大吸引圧: -84kPa
最大流量: 25 l/min
吸引瓶: 1000ml

品番	SP-30
価格(税別)	77,000円(フットスイッチを含む)

屋外排気用ファン、ダクト部材

- 屋外排気用ファン: 設置条件に合わせて、ご提案いたします。
- ダクト部材: フレキシブルダクトはステンレス製、塩ビ製などの材質選択ができます。



価格(税別)	都度見積
--------	------

バキュームポンプ+フットスイッチ

- フットスイッチと連動できます。作業室内には排水トラップとフィルターが必要です。




処理空気量: 約 15/18 l/min
到達圧力: 約 39.9kPa

品名	バキュームポンプ	フットスイッチ ULVAC 製 (DAP-15)
価格(税別)	40,000円	22,000円

排気フィルター差圧計

- 標準の1本置き針(赤)式のほか、2本置き針(赤、緑)式も選べます。

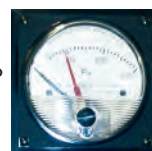

価格(税別)	25,000円
--------	---------


卓上型クリーンベンチ

省電力、高性能な卓上型！

- 省電力、高効率の DC ブラシモーター、LED 照明を採用した、省エネ卓上型クリーンベンチです。※消費電力 30%以上減（従来比）
- 殺菌灯を標準装備。全面シャッターはインターロック機構の装備で、殺菌灯は全閉したときのみ点灯します。
- 操作パネルは右斜め上にレイアウトし、操作性が向上しました。



品番	SG-KVM-757
洗浄度	ISO-5 (クラス100)
集塵効率	0.3 μm 以上粒子 (大気塵) にて 99.99% 以上
集塵要素	メインフィルター：低圧損型 HEPA フィルター プレフィルター：丸型サラネットフィルター
処理風量	約 5.0m³/min
吹出風速	約 0.34m/sec
電源	AC100V 1φ 50/60Hz
消費電力	約 60W ※コンセント容量は含まず
送風機	1台 ※ DC ブラシレスモーター
照明	5.3W × 2 (LED 照明)
殺菌灯	15W × 1 (インバーター式)
重量	約 50kg
最小搬入寸法	W900 × D650 × H1,210mm ※左記寸法に 20mm 程度の余裕を取ってください
構造・その他	本体、背板：銅板製焼付塗装、 作業台：SUS304ヘアーライン仕上げ 殺菌灯はシャッター全閉時のみ転倒します
価格(税別)	443,000円

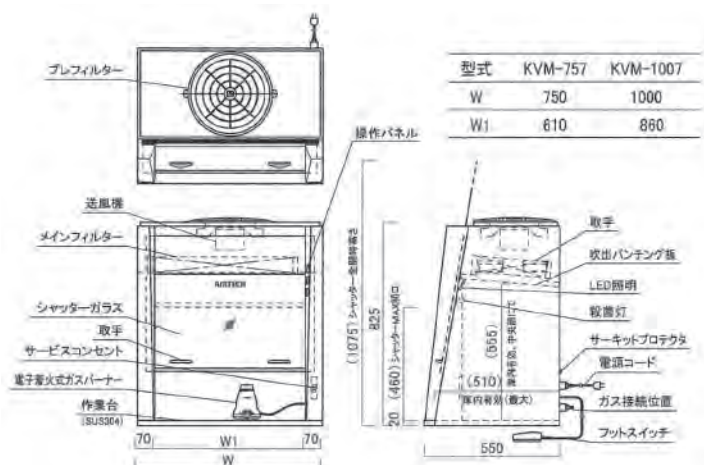

オートクレーブ用廃棄物袋 「捨テリーパウチ」


特徴

- 安全キャビネット、クリーンベンチ、実験台等に使えます。
- 三層フィルムにより穴が開きにくい構造となっています。
- 強力な接着剤により、キャビネット壁等に貼って使えます。糊の跡は残らず綺麗に剥がせます。
- オートクレーブバッグとしてご使用になる際は、糊り付けされている白いプラスチックワイヤを剥がして留め具としてご利用できます。

品番	入数	標準価格(税別)
SG-A4	200枚	20,000円



【取扱い手順】

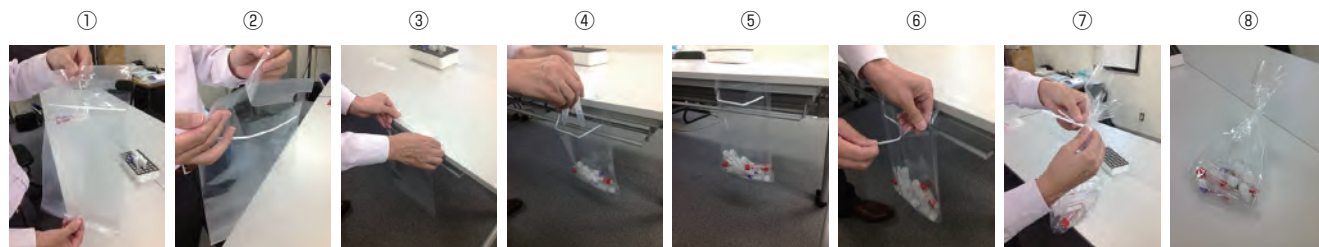

簡易キャビネット



持ち運びに便利な軽量設計！

👍 特 徴

- HEPA フィルタにより安全な作業環境を実現しました。
- 非接触スイッチで稼働します。
- 軽量設計のため、持ち運びに便利です。

品 番	SG-SKK100
サ イ ズ	W500 × D400 × H500
重 量	5kg
排 気 能 力	風量 0.54m ³ /min 静圧 347Pa
電 源	100V 50/60Hz
価 格 (税 別)	200,000円

 吉川工業株式会社

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品


温度管理システム

「システム構築・運用・監視」 そのすべてをスマートに

監視機能付き無線ロガーMD8000 seriesのイーサネット接続モデルはイーサネット上に受信器を最大6台接続することを可能とし、各受信器は60台の送信器のデータを収集・監視することができ、多彩な警報判定と外部出力により充実した発報を行えます。サーミスタ温度センサ、温湿度センサ以外にも、熱電対、測温抵抗体、電圧接続が可能で、より広い用途での利用が可能です。

上位のアプリケーションソフトでは最大360台の送信器のシステム管理とデータの一元管理を行います。イーサネット接続と特定小電力無線を組み合わせることにより、無線通信だけでは難しかった、広域エリアの収録データの一元管理を安価に行うことができます。

■システム構築イメージ

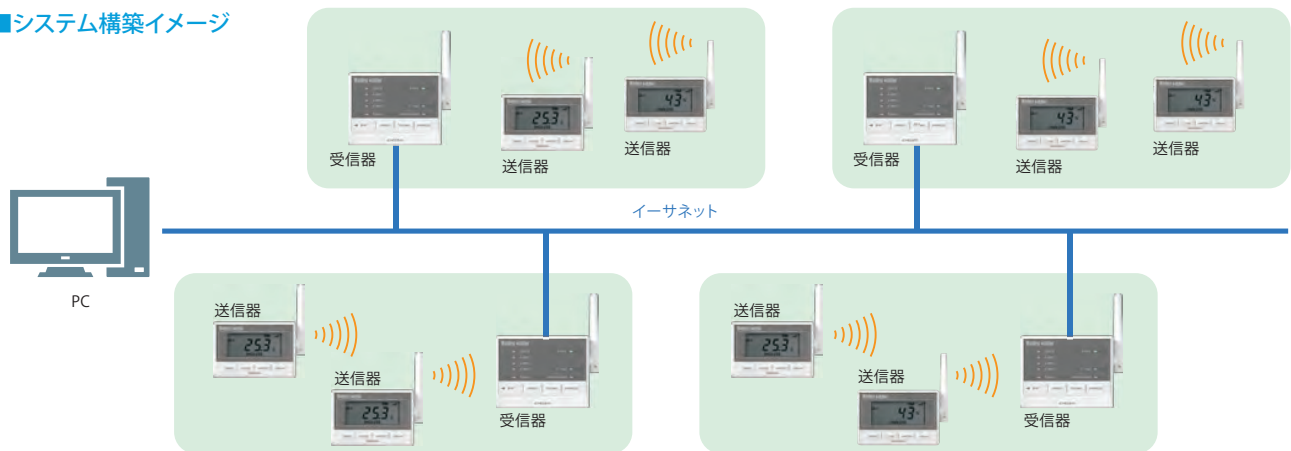

■医薬品製造・保管

厳格な温湿度管理が求められる医薬品製造・保管の計測・監視にもワイヤレスウォッチャは適しています。ワイヤレスウォッチャのソフトウェアは、データ収集・監視におけるFDA21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応しているため、厳しい管理が求められる現場で選ばれています。



■クリーンルーム・試験室

入退室が厳しく管理されているクリーンルームでは、現場に行くための入室許可や、防護服・白衣への着替えが必要になります。ワイヤレスウォッチャは、データ確認が、専用アプリケーションソフトにてPC上で簡単に確認できるので、現場に行く手間暇を解消します。



■研究施設

研究内容の多様化精密化に伴い、研究設備にもフレキシブルなレイアウト対応が求められています。ワイヤレスウォッチャは、すべての送信器に中継機能を内蔵しており電波状況に応じて最大6段階まで中継できるので、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。



■品質・製造管理

製品の品質維持のためには、厳密な温湿度管理だけでは無く、温度や湿度に異常があった場合に、素早い対応ができるシステムが必要です。ワイヤレスウォッチャは、異常があった際に即時に無線通信を開始し、アラームを作動させ、製品の品質維持をサポートします。



■食品工場

大規模調理施設などは作業区域が細かく分かれているために、無線通信だけでは温湿度データの一元管理を行うのは困難でした。ワイヤレスウォッチャは、イーサネット接続と特定小電力無線を組み合わせることにより、複数箇所の温湿度データの一元管理を簡単に行うことができます。



■美術館・文化財


文化遺産等の展示スペースの温湿度管理をする場合、収録データを管理用のパソコンに転送するための敷設工事に手間と時間が掛かってしまいます。特定小電力無線を利用したワイヤレスウォッチャなら配線・電源工事が不要で簡単に温湿度管理が行えます。



ワイヤレスウォッチャは、 計測モニタリングにおけるリスクの軽減、 業務負担の削減に貢献いたします。

ワイヤレスウォッチャは、分散配置された最大360台の送信器から無線で送られる収録データをイーサネット上に接続された6台の受信器を介して計測・監視するシステムです。

また、送信器に16,000データ保存可能な内蔵メモリーを搭載しています。そのため、通信障害等が起こってもデータ欠損のリスクを軽減いたします。パソコンに収集したデータは高いセキュリティ機能を有したデータベースに格納されるので、データの管理も容易です。

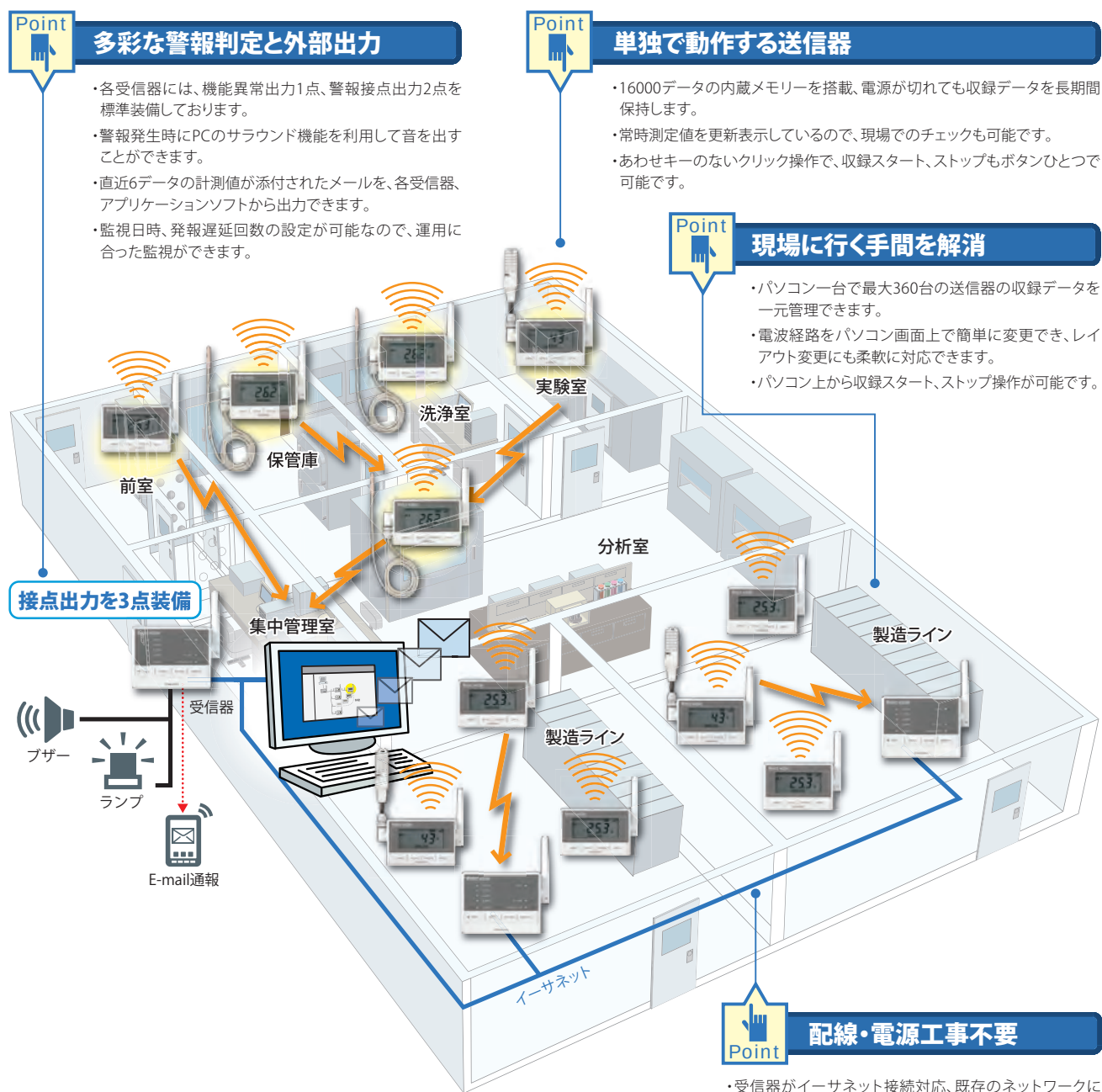

手洗いトレーニングキット「てあらいくん」

医療従事者の方や食品を取り扱う方のための、
「正しい手の洗い方」の体感的学習教材として最適です！

商品構成

●手洗いトレーニング UV 照射ボックス「てあらいくん」

紫外線ランプが洗い残したローションまたはオイルを浮かび上がらせます。

●手洗いトレーニング オイル、蛍光ローション

オイルかローションを手に摺り込んだ後、手を洗います。手洗いが不十分でオイルまたはローションが残っていると、その部分が紫外線照射により光って浮かび上がって見えます。

●手洗いトレーニング パウダー

身の回りの書類、机、OA 機器などにふりかけたパウダーが、人やモノなどを介して広がっていく様子が視覚的に確認できます。接触感染の拡がり方、怖さを体感的に学習できます。



品 名	品 番	数 量	価 格(税別)
UV 照射ボックス「てあらいくん」	GG-100	1 台	32,000 円
手洗いトレーニング・オイル 238ml	GG-002	1 本	7,000 円
手洗いトレーニング・蛍光ローション 100ml	GG-004		3,200 円
手洗いトレーニング・パウダー 113g	GG-003		6,000 円

使用方法

手洗いトレーニング・オイル

1. オイルの入った容器を良く振ります。
2. オイルを手にハンドローションのように塗ります。
3. 流水下で、普段と同じように石鹸を使用して手を洗ってください。
4. 手洗いが完了したら、普段と同じように手を拭いてください（ペーパータオル等）。
5. その後、UV ランプを当てれば洗い残し部位が明るく光ります。

手洗いトレーニング・パウダー

1. パウダーを少量、手の平に振り掛けます。
2. まわりの人と握手をしたり、電話機、ドアノブ等に触れてみます。
3. その後、触れた部位に UV ランプを当てればパウダーに含まれている疑似細菌が光り細菌の伝播状況がわかります。

●使用例

手洗い講習会などで配布する資料等にパウダーをふりかけておきます（パウダーがふりかけてあることは秘密にしておきます）。

資料を読んだら手渡しで次の人に回してもらい、全員が資料に触れた後に各自の手に UV を当てることで、交差感染の伝播がわかります。

！ ご注意 この使用例は一例です。お客様のアイデアで使用方法が広がります。

光の力で細菌ウイルスを除去するエアーリア

強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。

紫外線による除菌は、細胞を司る DNA や RNA に直接作用し不活化させる原理のため、細菌やウイルスが突然変異した場合においても効果が期待できる除菌手段です。

エアーリアコンパクト

- **強力な除菌力** 強力な紫外線で細菌（枯草菌芽胞）を 99% 除菌します。
- **安全・安心** 紫外線が外に出ない構造のため人や室内の品物に影響を与えません。
また、紫外線除菌は薬品と異なり耐性菌をつくりません。
- **メンテナンスが簡単** フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単。
1 日 24 時間の連続使用でも 1 年近くランプ交換が不要。

品 名	エアーリア コンパクト 15W × 2 灯タイプ
品 番	FZST15202GL15/16
処 理 方 式	送風式
使 用 目 的	空中浮遊菌の除去
使用ランプ	GL15 × 2 灯
重 量	9.6kg
処 理 風 量	約 1.1m ³ /min
価 格 (税 別)	オープン価格



エアーリアプラス

200 畳の空間を 2 時間使用で除菌可能な大容量タイプ

品 名	エアーリアプラス
品 番	FMST15202EH1
処 理 方 式	紫外線＋ファン送風方式
使 用 目 的	浮遊菌の除菌
適合ランプ	QGL15-2 × 2 灯
消費電力	82W (50Hz)、91W (60Hz)
質 量	30kg
処 理 風 量	7m ³ /min
価 格 (税 別)	オープン価格



エアーリアパワー

400 畳の空間を 2 時間使用で除菌可能な 大容量タイプ

品 名	エアーリアパワー
品 番	FKST15501EH1
処 理 方 式	紫外線＋ファン送風方式
使 用 目 的	浮遊菌の除菌
適合ランプ	QGL15-2 × 5 灯
消費電力	180W (50Hz)、220W (60Hz)：強運転時
質 量	42kg
処 理 風 量	(強) 14m ³ /min、(中) 11m ³ /min、(弱) 7m ³ /min
価 格 (税 別)	オープン価格



エアーリアシーリング

天井取り付けタイプ

品 名	エアーリアシーリング
品 番	FZS15202GL15/16
使用ランプ	GL15 × 2 灯
寸 法	巾 250 × 厚み 159 × 長さ 703 (mm)
処 理 風 量	約 1.1m ³ /min
消費電力	53.1W (50Hz)、45.2W (60Hz) / (AC100V)
適用空間	100m ³
価 格 (税 別)	オープン価格



※価格は変更する場合がございます（2023 年 3 月現在）

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器


感染対策商品

クリーンパーティション

特徴

- 超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。
- 軽量・コンパクトで種々の用途にご利用いただけます。
- クリーン仕様（A 型/B 型）と汚染除去仕様（C 型/D 型）があります。ご使用目的により、お選びいただけます。
- SIAA ISO22196 抗菌加工

〔外形図〕

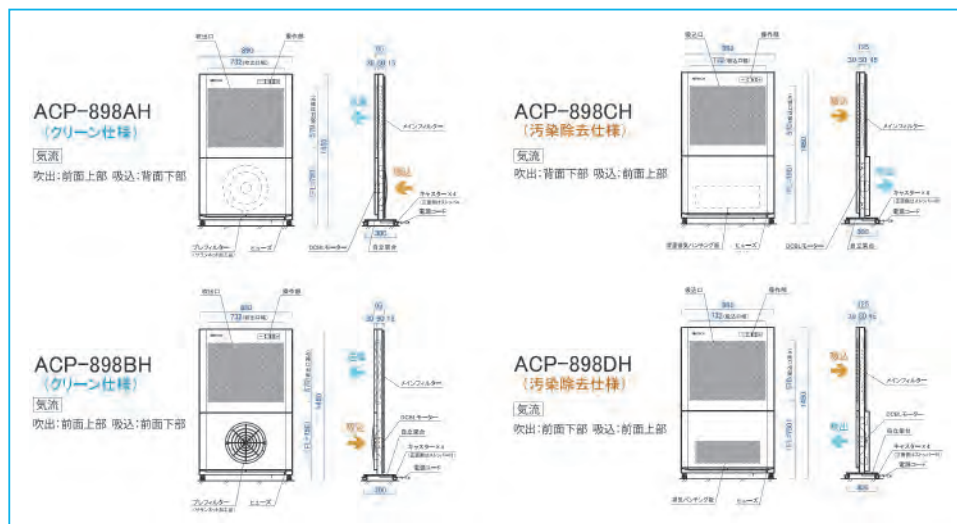

PUSH-PULL 型

プッシュ式とプル式のクリーンパーティションの組み合わせにより空気感染防止と室内の空気清浄化に効果があります。医療従事者への感染防止効果が期待できます。



清浄空気吹出型

簡易型のクリーンベンチとして、清浄空気の環境下で作業できます。



汚染空気吸込型

調剤時の薬塵除去、その他有害物質の取り扱い時に効果を発揮します




品番	ACP-898-AH/ACP-898-BH			ACP-898-CH/ACP-898-DH		
集塵効率	0.3 μm 以上粒子 (大気塵) にて 99.99%以上					
集塵要素	プレフィルター：サランネット加工品 メインフィルター：HEPA フィルター					
構造	銅板製焼付塗装仕上					
重量	約 40kg			約 43kg		
電源	AC100V, 1 φ, 50/60Hz					
風量設定	大風量モード	強モード	静音モード	大風量モード	強モード	静音モード
処理風量	約 12.5m³/min	約 6.5m³/min	約 3.0m³/min	約 11.5m³/min	約 6.5m³/min	約 3.0m³/min
吹出/吸込風速	約 0.50m/sec	約 0.26m/sec	約 0.12m/sec	約 0.46m/sec	約 0.26m/sec	約 0.12m/sec
騒音	約 58dBA	約 45dBA	約 36dBA	約 58dBA	約 45dBA	約 36dBA
価格(税別)	260,000円			280,000円		

マスク専用 手動式自動販売機

感染予防対策をサポート

特 徴

- お求めやすい本体価格です。
- 電源を必要としないので、経済的に優れています。
- コンパクトで、施設内のスペースを有効に活用できます。
- 24 時間販売することができます。

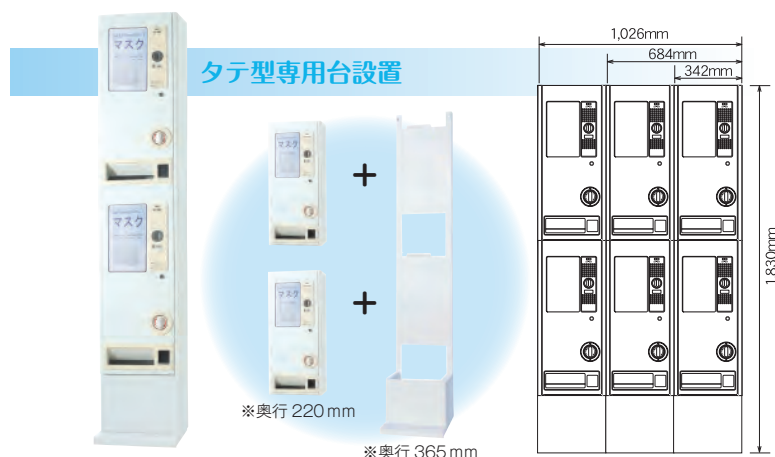

最大32個入ります。

マスク専用自動販売機

品 番	品 名	数量	標準価格(税別)
SMV-DF8A	マスク専用自動販売機	1台	130,000円
SMV-DF8ATD	DF8用 タテ型専用台	1台	21,000円
SMV-DF8ABD	DF8用 ボックス専用台	1台	17,000円

つめ替え用マスク(紙箱入り)

自動販売機に充填して販売するマスクを当社から供給させていただきます。

品 番	品 名	数量	標準価格(税別)
SMD-S406-1	自販機用マスク2枚/1箱	200箱	18,000円
SDD01-N95-1	大人用 N95 マスク1枚/1箱	200箱	48,000円

※上記のマスク価格は自動販売機での販売価格ではありません。
自動販売機での販売価格は設置・管理を行われるお客様のほうで最終的に設定していただくことになります。

細菌検査

遺伝子・ウイルス検査

検体採取・検体容器

検体輸送

検査器材

検査関連機器

感染対策商品

N95 マスク

- 高性能で、しかも顔にぴったり密着して安全。
- 個別包装で衛生的、しかも長期保管が可能で安全。
- 携帯しやすいコンパクトな名刺サイズ。しかも、省スペースで備蓄ができて、いざという時も安全。
- しめ紐は調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプで、長時間装着しても耳の痛みはありません。



品番	SDD01-N95
価格(税別)	3,100円(10個入)

三層不織布マスク

- マスク上部にノーズフィットワイヤー付きなので顔にぴったりフィットします。
- 三層構造でウイルス、花粉、ほこりの侵入をブロック(GB2626-2006規格)



品番	SMD-S810
価格(税別)	2,400円(50枚/箱)

作業用ゴーグル

- 大型タイプの為、メガネと併用可能
- レンズは曇り止め加工
- ハードコーティングでレンズ部に傷が付きにくい。
- 通気溝無



品番	RG-99
価格(税別)	2,800円(1個)

フェイスシールド SFS-1

- 息で曇らない!
- メガネ装着時でも使用可能!
- ヘッドパッド及びストラップは、非アレルギー性!
- 超軽量(15g)で体に負担がかからない。
- 使いきりで衛生的!
(十分なアルコール清拭による消毒で再利用可)
- 環境に優しく焼却してもダイオキシンは発生しません。



品番	SFS-1
価格(税別)	12,000円(24枚入)

防護服 (PPE)

- 飛沫感染・接触感染など、感染症のリスクを軽減できます。
- ポリプロピレン製の一枚布から出来ており、縫製部分も少なく高性能です。



品番	MPC-L
価格(税別)	39,800円(10枚入)

ウィロックスプレー

界面活性剤を主成分に採用

- 幅広い菌・ウイルスへの除菌効果。
- 抗菌持続性にも優れており、長時間にわたり微生物コントロールが可能。
- 環境や人体に優しい成分で、多様な場面で使用可能。
- 病院内、老人施設内の接触感染予防に最適。

布や金属にも問題なく噴霧いただけ、たくさんの人の手が触れるカーペットや手すりなどにも幅広くご利用いただけます。

品番	VS 001	VS 002
規格	500 g スプレー付容器 (12本入)	2kg (4本入) 詰替用
価格(税別)	オープン価格	オープン価格



保護クリーム

手荒れ防止で感染防止の間接強化に

- 手指消毒前にご利用いただくことで、皮膚に保護膜を作るため手荒れ防止効果は抜群。
- だから手荒れを気にせず徹底的に手指消毒が行えます。
- 塗ってから3～4時間は手洗いしても保護膜が落ちないため、朝と昼、2回ご利用いただくと、手荒れを気にせず1日仕事をしていただけます。

品番	BP-X 2-15	BP-X 2-75	BP-X 2-240	BP-X 2-480
容量	15ml (120本入)	75ml (1本)	240ml (1本)	480ml (1本)
価格(税別)	72,000円	1,380円	3,700円	6,200円



キャリット (院内外検体輸送容器)

院内（外）短時間の検体・血液製剤等の搬送に最適

持ちやすくプラスチック製のため、水洗い可能で衛生的です。また、液漏れの心配はありません。

ベルトを引くことで蓋を締めつけ、開くのを防止します

ベルト調整可能

※上記画像はスパーサー、保冷剤が含まれております



品 番	SBE-CRT
サイズ	外寸：310×210×280mm 内寸：235×145×240mm
価格(税別)	6,000円

オプション（上記キャリットと組み合わせて使用可能）

2-6℃定温スパーサー（保冷剤立て）


※4℃融点蓄熱剤内装

2-6℃定温スパーサー搭載で、臨床検体や血液製剤等の搬送の際、2-6℃の範囲内で正確に維持することが可能です。




品 番	SBE-CRT-CT
有効内寸	W145×D135×H115mm
価格(税別)	6,800円

冷却スパーサー（保冷剤立て）

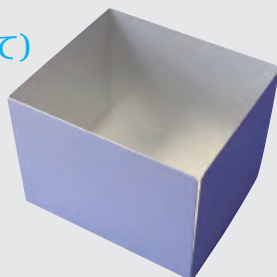

品 番	SBE-CRT-C
有効内寸	W155×D135×H115mm
価格(税別)	3,800円

ISO 15189/病院評価機構の温度管理に対応！

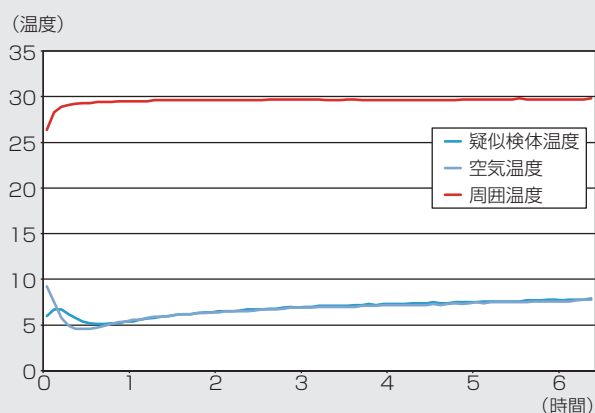

保冷剤（キャリット用）



品 番	SBE-500N-1
仕様	0℃融点500g
サイズ	W190×D140×H25+4mm
価格(税別)	400円/1枚

価格一覧表

品名	品番	価格 (税別)	頁
細菌検査			
アネロパック®・ケンキ(指示薬+クリップ)	A-02	12,500 円	3
アネロパック®・ケンキ	A-03	12,500 円	3
アネロパック®・ケンキ (高温菌用)	A-05	14,000 円	3
アネロパック®・ケンキ (3.5L)	A-06	11,000 円	3
アネロパック®・ケンキ 5% (細胞の虚血実験用)	A-07	8,000 円	3
アネロパック®・ケンキ 10% (薬剤感受性試験用)	A-09	10,400 円	3
アネロパウチ®・ケンキ	A-13	10,000 円	3
アネロパック®・ケンキ (高温菌用)	A-205	8,700 円	3
アネロパウチ®・ケンキ	A-213	4,400 円	3
アネロパウチ®・微好気 (パウチ袋用)	A-25	4,200 円	4
アネロパウチ®・微好気 (薄型ジャー用)	A-27	4,200 円	4
アネロパック®・微好気 (角型ジャー用)	A-28	7,500 円	4
アネロパック®・微好気 (大型ジャー 7L 用)	A-29	11,500 円	4
アネロパック®・CO ₂	A-61	4,500 円	4
アネロパック®・CO ₂	A-62	8,600 円	4
アネロパウチ®・CO ₂	A-63	4,200 円	4
嫌気指示薬	A-66	3,400 円	4
角型ジャー (標準型) 2.5L	A-110	7,500 円	5
角型ジャー (薄型) 500ml	A-111	6,000 円	5
角型ジャー (大型) 7.0L	A-112	11,000 円	5
角型ジャー (中型) 3.5L	A-119	8,500 円	5
スタンディングパウチ用 アネロパック・キープ	A-37	6,400 円	5
専用パウチ袋用アネロパウチ・ キープ (指示薬無)	A-39	3,800 円	5
シャーレラック (ステンレス製) スタンディングパウチ用	A-59	5,000 円	5
W チェック付パウチ袋 (小)	A-65	4,800 円	5
シャーレラック (ステンレス製)・ 標準ジャー用	A-68	4,500 円	5
試験管立て (ステンレス製)・ 標準ジャー用	A-69	2,400 円	5
W チェック付スタンディング パウチ袋	A-98	5,500 円	5
アネロパック®・ケンキ	A-04	5,500 円	7
アネロパウチ・ケンキ (指示薬+ 指示薬用クリップ付)	A-12	11,200 円	7
角型ジャー (標準)・ケンキシステム (標準ジャー+剤/指示薬+クリップ)	A-41	13,800 円	7
W チェックパウチシステム・ケンキ (W チェック+剤/指示薬各 20 +クリップ 1)	A-17	8,200 円	7
W チェックパウチシステム・ 微好気 (W チェック+剤)	A-18	6,300 円	7
パウチ袋 (小)	A-58	5,400 円	7
パウチ袋 (中)	A-92	5,600 円	7
W チェックパウチ袋 (中)	A-92W	5,200 円	7
パウチ袋 (大)	A-93	6,600 円	7
パウチ袋 (特大)	A-94	6,500 円	7
嫌気性パウチ (PT /パウチ同等品)	A-99	19,000 円	7
嫌気性パウチ (PT /パウチ同等品)	A-99-1	2,800 円	7
密閉クリップ・17L (パウチ用/A-58 用)	A-72	4,000 円	7
密閉クリップ・24L (A-92 用)	A-74	2,500 円	7
密閉クリップ・28L (A-93 用)	A-75	2,900 円	7
密閉クリップ・33L (300 × 440 用/A-94 用)	A-76	3,500 円	7
耐熱クリップ・24L (A-92 用)	A-82	3,500 円	7
耐熱クリップ・28L (A-93 用)	A-83	4,200 円	7
耐熱クリップ・32L (300 × 440 用/A-94 用)	A-84	4,800 円	7
角型ジャー (標準/薄型・共通) の フタ (留具付・パッキン無)	A-51F	3,800 円	7

品名	品番	価格 (税別)	頁
角型ジャー (標準/薄型・共通) の パッキンのみ	A-51P	900 円	7
角型ジャー (大) のフタ (留具付・ パッキン無)	A-112F	5,900 円	7
角型ジャー (大) のパッキンのみ	A-112P	1,500 円	7
角型ジャー (中) のフタ (留具付・ パッキン無)	A-119F	4,700 円	7
角型ジャー (中) のパッキンのみ	A-119P	1,100 円	7
アネロパック CO ₂ 滅菌グレード品	ACP-1	6,000 円	7
水素発生材	S-01	1,900 円	7
オブティスワプトランスポート・ システム (ロング)	LA-106	10,600 円	8, 9
オブティスワプトランスポート・ システム (ミニチップ)	LA-116	10,600 円	8, 9
オブティスワプトランスポート・ システム (ウルトラファイン)	LA-117	10,600 円	8, 9
染色トレイ	TS-03-Z01	9,600 円	10
新型染色トレイ標準セット	TS-03	29,600 円	10
グラム染色コントロール・スライド	SDL360	11,000 円	10
グラム染色コントロール・スライド	SDL361	37,500 円	10
グラム染色コントロール・スライド	SDL361-C-1	28,000 円	10
新型自動染色装置	GS-20B	220,000 円	11
真菌標本作製用染色・固定液 (マイコパーム・ブルー)	SDL753	15,000 円	12
真菌標本作製用カバースリップ・ テープ (ファンギ・テープ)	SDL745	11,600 円	12
<i>Cryptococcus neoformans</i>	SDL671-03	6,000 円	13
<i>Geotrichum candidum</i>	SDL671-04	6,000 円	13
<i>Hansenula</i> sp.	SDL671-05	6,000 円	13
<i>Rhizopus</i> sp.	SDL672-06	6,000 円	13
<i>Syncephalastrum</i> sp.	SDL672-09	6,000 円	13
<i>Alternaria</i> sp.	SDL673-01	6,000 円	13
<i>Chaetomium</i> sp.	SDL673-03	6,000 円	13
<i>Cladosporium</i> sp.	SDL673-04	6,000 円	13
<i>Curvularia</i> sp.	SDL673-05	6,000 円	13
<i>Scedosporium apiospermum</i>	SDL673-15	6,000 円	13
<i>Scedosporium prolificans</i>	SDL673-16	6,000 円	13
<i>Wangiella dermatiditis</i>	SDL673-19	6,000 円	13
<i>M. gypseum</i>	SDL674-07	6,000 円	13
<i>M. vanbreuseghemii</i>	SDL674-08	6,000 円	13
<i>T. ajelloi</i>	SDL674-09	6,000 円	13
<i>T. mentagrophytes</i>	SDL674-13	6,000 円	13
<i>T. rubrum</i>	SDL674-14	6,000 円	13
<i>Acremonium</i> sp.	SDL675-01	6,000 円	13
<i>Aspergillus flavus</i>	SDL675-06	6,000 円	13
<i>Aspergillus fumigatus</i>	SDL675-07	6,000 円	13
<i>Aspergillus niger</i>	SDL675-09	6,000 円	13
<i>Chrysosporium</i> sp.	SDL675-16	6,000 円	13
<i>Fusarium</i> sp.	SDL675-18	6,000 円	13
<i>Paecilomyces</i> sp.	SDL675-19	6,000 円	13
<i>Penicillium</i> sp.	SDL675-20	6,000 円	13
<i>Scopulariopsis</i> sp.	SDL675-32	6,000 円	13
<i>Sepedonium</i> sp.	SDL675-33	6,000 円	13
改良オーラミン O 染色キット	SDL345	19,000 円	14
抗酸菌染色コントロール・スライド	SDL350	10,000 円	14
抗酸菌染色コントロール・スライド	SDL351	30,000 円	14
スナップ & ダイジェスト 75ml/10 本 ドライ・パフアー・パウダー/5 包	SDL667	20,000 円	15
スナップ & ダイジェスト 150ml/10 本 ドライ・パフアー・パウダー/10 包	SDL668	39,500 円	15
500ml コンテナ/ロート、ラック (2 個入)	SDL251	8,800 円	15
1000ml コンテナ/ロート、ラック (2 個入)	SDL252	9,800 円	15

※価格は変更する場合がございます (2023 年 3 月現在)

品名	品番	価格 (税別)	頁	品名	品番	価格 (税別)	頁
スライドグラス加温染色用器具 「かおんくん」	KOK-1	9,300 円	15	ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (オーバル・ウルトラ ファイン 2 本入)	UT-367	23,000 円	28, 29
交換用セラミック (先端部 5 個入)	KOK-S5	11,000 円	15	ユニットランズ-RT 輸送ポート メディア	UT-100	13,000 円	28, 29
ブチレート・ディスク	SDL398-9131	15,000 円	16	ユニットランズ-RT 輸送ポートメディア	UT-300	16,000 円	28, 29
馬尿酸塩ディスク	SDL-K710310	13,000 円	17	ウイルス輸送液	SGVTM-3S	23,000 円	30
馬尿酸塩ディスク	SDL-K710315	6,500 円	17	PCR メディア SG (4.3ml)	SGFK-4S	20,000 円	30
ニンヒドリン試薬	SDL398-K475	8,000 円	17	SARS-CoV-2 Q Control	SCV2QC	82,000 円	31
PYR ディスク	SDL-K1538B	13,000 円	18	SARS-CoV-2 Molecular Q Panel	SCV2MQP	120,000 円	31
2%デオキシコール酸 ナトリウム水溶液	SG-2-DEOXY	1,500 円	19	SARS-CoV-2 Analytical Q Panel	SCV2AQP	240,000 円	31
10%デオキシコール酸 ナトリウム水溶液	SG-10-DEOXY	1,500 円	19	Q control Multiplex control	RTX1QC	110,000 円	31
3%水酸化カリウム水溶液	SG-3-KOH	1,500 円	20	検体採取・検体容器			
スポットインドール試薬	SG-SPOTIND-5	6,600 円	21	ハイドラフロック・スワブ (ラージ)	25-3406-H	4,400 円	32, 33
3%過酸化水素水	SG-H2O2	1,500 円	22	ハイドラフロック・スワブ (スタンダード)	25-3306-H	4,400 円	32, 33
0.5%硫酸水 15mL	SG-SULF-15	1,800 円	23	ハイドラフロック・スワブ (ミニチップ)	25-3316-H	4,800 円	32, 33
0.5%硫酸水 100mL	SG-SULF-100	2,500 円	23	ハイドラフロック・スワブ (ウルトラファイン)	25-3317-H	4,500 円	32, 33
ハードループ 1μl	8175 CSR40	14,000 円	24	ハイドラフロック・スワブ (ウルトラファイン)	25-3320-H	4,250 円	32, 33
ハードループ 10μl	8177 CSR40	14,000 円	24	ハイドラフロック・スワブ (マイクロファイン)	25-3318-H	4,500 円	32, 33
ソフトループ 1μl	8178 CSR40	14,000 円	24	ハイドラフロック・スワブ (オーバル)	25-3606-H	5,500 円	32, 33
ソフトループ 10μl	8179 CSR40	14,000 円	24	ハイドラフロック・スワブ (オーバル)	25-3706-H	5,500 円	32, 33
ディスポニードル	8176 CSR40	14,000 円	24	ハイドラフロック・スワブ (オーバル)	25-3806-H	5,500 円	32, 33
ディスポニードル・ミニ	8183 CS10	16,000 円	24	ハイドラフロック・スワブ (オーバル・ロング)	25-3206-H	4,200 円	32, 33
ループスタンド	K 24C	9,000 円	24	ドライトランスポート・システム (ラージ)	25-3406-H BT	16,000 円	34
ステンレスループスタンド	S 24C	4,200 円	24	ドライトランスポート・システム (スタンダード)	25-3306-H BT	16,000 円	34
ミニエーゼ 10μ (ディスポループ)	SG-MINI10	15,000 円	25	ドライトランスポート・システム (ミニチップ)	25-3316-H EMB80BT	16,000 円	34
ミニエーゼ 1μ (ディスポループ)	SG-MINI1	15,000 円	25	ドライトランスポート・システム (ミニチップ)	25-3316-H EMB100BT	16,000 円	34
ループ 10μ (ディスポザブル)	S86.1562.010	17,900 円	25	ドライトランスポート・システム (ウルトラファイン)	25-3317-H BT	14,000 円	35
ループ 1μ (ディスポザブル)	S86.1567.010	17,900 円	25	ドライトランスポート・システム (ウルトラファイン)	25-3319-H BT	16,000 円	35
ニードル (ディスポザブル)	S86.1568.010	17,900 円	25	ドライトランスポート・システム (マイクロファイン)	25-3318-H BT	14,000 円	35
ステンレス・ループ (φ1.0mm)	SMSN-61	48,000 円	26	ドライトランスポート・システム (オーバル)	25-3606-H BT	16,000 円	35
ステンレス・ループ (φ2.0mm)	SMSN-62	42,000 円	26	ドライトランスポート・システム (オーバル)	25-3706-H BT PK	16,000 円	35
ステンレス・ループ (φ3.0mm)	SMSN-63	42,000 円	26	ドライトランスポート・システム (オーバル)	25-3806-H BT PK	16,000 円	35
ステンレス・ループ (φ4.0mm)	SMSN-64	42,000 円	26	ピュアフロックウルトラ・スワブ (ウルトラファイン)	25-3320-U EMB 80	4,200 円	36
ステンレス・ニードル	SMSN-60	42,000 円	26	ピュアフロックウルトラ・スワブ (ウルトラファイン)	25-3317-U	3,500 円	36
ステンレス・滅菌缶 S	SMSR-30	15,000 円	26	エススティック (スリット)	PX1503EZ	24,000 円	36
ステンレス・滅菌缶 L	SMSR-40	15,000 円	26	エススティック (テーパー・スリット)	PAX1503PZ	24,000 円	36
白金線挟み (ニューム製)	S04240-10S	6,000 円	27	メディ・スワブ (ポリウレタンフォーム)	25-1416 1PF50	54,000 円	38
白金線挟み (真鍮製)	S04240-09S	6,000 円	27	メディ・スワブ (フォーム、スタンダード)	25-1516 1PF100	48,000 円	38
白金線挟み (通し)	S04240-13S	8,000 円	27	メディ・スワブ (レーヨン製、 スタンダード)	25-806 1PR	35,000 円	38
白金線挟み (通し)	S04240-12S	19,000 円	27	メディ・スワブ (ポリエステル製、 スタンダード)	25-806 1PD	34,000 円	38
白金耳 (φ2mm 輪付・長さ 50mm、 線径φ0.3mm)	S04240-50	3,000 円	27	メディ・スワブ (ポリエステル製、細型)	25-800 1PD 50	58,000 円	38
代用線 (コバルトクロム線) φ3mm 輪付・長さ 60mm、線径φ0.5mm	S04240-30S	5,800 円	27	メディ・スワブ (アルギン酸カル シウム製鼻咽喉用)	25-800 A 50	70,000 円	38
代用線 (コバルトクロム線) 輪なし・ 線のみ・長さ 60mm、線径φ0.5mm	S04240-32S	5,600 円	27	チューブ入り滅菌個包装スワブ (ポリウレタンフォーム、スモール)	25-1406 1PF BT	55,000 円	39
代用線 (コバルトクロム線) 輪なし・ 1000mm 巻き、線径φ0.5mm	S04240-31	5,500 円	27	チューブ入り滅菌個包装スワブ (ポリウレタンフォーム、レギュラー)	25-1506 1PF BT	75,000 円	39
代用線 (ニクロム線) 輪なし・線のみ・ 長さ 60mm、線径φ0.5mm	S04240-24S	2,000 円	27	チューブ入り滅菌個包装スワブ (レーヨン製、スタンダード)	25-806 1PR BT	10,000 円	39
代用線 (ニクロム線) 輪なし・ 1000mm 巻き、線径φ0.5mm	S04240-20S	2,000 円	27	チューブ入り滅菌個包装スワブ (ポリエステル製、スタンダード)	25-806 1PD BT	38,000 円	39
遺伝子・ウイルス検査							
ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (ラージ)	UT-106	15,000 円	28, 29				
ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (ミニチップ)	UT-116	15,000 円	28, 29				
ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (ウルトラファイン)	UT-117	15,000 円	28, 29				
ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (オーバル)	UT-306	20,000 円	28, 29				
ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (ミニチップ)	UT-316	20,000 円	28, 29				
ユニットランズ-RT 輸送ポート システム (ウルトラファイン)	UT-317	20,000 円	28, 29				

品名	品番	価格 (税別)	頁
チューブ入り滅菌個包装スワブ (レーヨン製、細型)	25-800 1SAR BT	128,000 円	39
唾液採取セット滅菌 (ストロー付き)	SG-915	23,000 円	40
サリベット - 唾液採取キット	SG-4351.3000	22,000 円	40
唾液採取用綿棒エススティック	PX1509SZ	24,000 円	40
喀痰採取容器	SMPP-30	30,000 円	41
Microvette 微量採血管 100 Z	20.1280.100.2	9,500 円	42
Microvette 微量採血管 200 Z	20.1290.100.2	9,500 円	42
Microvette 微量採血管 200 Z-Gel	20.1291.0002	10,400 円	42
Microvette 微量採血管 100 LH	20.1282.100.2	9,500 円	42
Microvette 微量採血管 200 LH	20.1292.100.2	9,500 円	42
Microvette 微量採血管 100 K3E	20.1278.100.2	9,500 円	42
Microvette 微量採血管 200 K3E	20.1288.100.2	9,500 円	42
採便キット (ベンキャッチ・採取コンテナセット)	BS-01	22,000 円	43
ベンキャッチ	B-01	10,000 円	43
ベンキャッチ	B-200	26,000 円	43
採取コンテナ	SG-4299.720	51,200 円	43
採取コンテナ	SG-4299.720J	12,000 円	43
検体輸送			
バリアパウチセット A5R	BRS-A5R10	8,400 円	45
バリアパウチ A5R	BRP-A5R	5,600 円	45, 46
バリアパウチ B4R	BRP-B4R	8,400 円	46
吸水バッグ	BRP-AB3-N	1,800 円	46
吸水バッグ 6 連	BRP-AB6-B	2,400 円	45, 46
吸水シート	BRP-ABS	2,300 円	46
吸水材	BRP-ABF	4,400 円	46
バリアボックス 1000	BRB1000	7,700 円	47
バリアボックス 450	BRB-450	16,500 円	47
バリアボックス 200	BRB-200	6,600 円	47
バリアボックス 5	BRB5	8,800 円	45, 47
セキュリティラベル	—	1,200 円	47
オーバーパックシール	—	1,000 円	47
ドライアイス (クラス 9) ラベル	SPL-D-02	1,200 円	47
ウイルスを移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (大) 15 枚	SPL-AL-01	750 円	47
ウイルスを移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (大) 60 枚	SPL-AL-02	2,700 円	47
ウイルスを移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (小) 15 枚	SPL-AS-01	750 円	47
ウイルスを移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (小) 50 枚	SPL-AS-02	2,250 円	47
UN3373 ラベル (大) 15 枚	SPL-BL-01	825 円	47
UN3373 ラベル (大) 60 枚	SPL-BL-02	3,000 円	47
UN3373 ラベル (小) 15 枚	SPL-BS-01	750 円	47
UN3373 ラベル (小) 50 枚	SPL-BS-02	2,250 円	47
セキュリティラベル 15 枚	SPL-S-01	750 円	47
セキュリティラベル 50 枚	SPL-S-02	2,250 円	47
バイオ・ボトル 1L	SBB001	6,800 円	48
バイオ・ボトル 2L	SBB002	7,800 円	48
バイオ・ボトル 3L	SBB003	9,200 円	48
パソパック 1L	SPP011	6,800 円	48
パソパック 2L	SPP012	7,800 円	48
バリアトランクシングル	BRB-D-3	26,800 円	48
検査器材			
マイクロチューブ スクリュー (ループ)	SG-037.712	37,200 円	50
マイクロチューブ スクリュー (ループ)	SG-296.012	34,500 円	50
マイクロチューブ スクリュー (ループ)	SG-496.712	36,500 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-407.002	13,900 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-607.002	18,000 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-596.002	20,900 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-607.102	7,800 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-596.102	9,100 円	50

品名	品番	価格 (税別)	頁
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-037.604	50,200 円	50
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-296.504	45,200 円	50
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-396.564	45,500 円	50
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-496.604	49,100 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-407.004	37,800 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-607.004	19,900 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-596.004	42,100 円	50
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-496.006	52,000 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-607.006	23,700 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-596.006	23,900 円	50
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-307.007	62,800 円	50
マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	SG-496.007	52,000 円	50
マイクロチューブ プッシュ	SG-607.007	15,700 円	50
スペシャルラック 18 穴	SG-498	9,000 円	51
スペシャルラック 20 穴	SG-848.001	9,600 円	51
スペシャルラック 48 穴	SG-8241	11,600 円	51
フリーズボックス 100 穴	SG-001A	18,500 円	51
フリーズボックス 81 穴	SG-000A	14,400 円	51
フリーズボックス 50 穴	SG-050A	14,400 円	51
ピタラックチップ ラック入	SG-APR.02S	9,000 円	52
ピタラックチップ 交換プレート	SG-APR.02RS	11,800 円	52
ピタラックチップ ラック入	SG-APR.002S	7,600 円	52
ピタラックチップ 交換プレート	SG-APR.002RS	10,300 円	52
ピタラックチップ ラック入	SG-APR.0001S	10,400 円	52
ピタラックチップ 交換プレート	SG-APR.0001RS	9,400 円	52
フィルターチップ 20μ ラック入	SG-0203.552	48,300 円	52
フィルターチップ 20μ 交換プレート	SG-0203.553	43,300 円	52
フィルターチップ 200μ ラック入	SG-1303.552	44,800 円	52
フィルターチップ 200μ 交換プレート	SG-1303.553	40,800 円	52
フィルターチップ 1000μ ラック入	SG-0503.552.2	11,000 円	52
フィルターチップ 1000μ 交換プレート	SG-0503.553.2	10,600 円	52
滅菌済コンテナ (100ml)	SG-4531.400	16,000 円	53
滅菌済コンテナ (70ml)	SG-2299.447S	28,600 円	53
滅菌済コンテナ (250ml)	SG-2299.435	56,800 円	53
滅菌済コンテナ (500ml)	SG-2299.318	51,400 円	53
喀痰採取容器	SMPP-030	30,000 円	53
遠心チューブ (10ml)	SG-4299.482	49,400 円	53
遠心チューブ (10ml)	SG-4299.382S	29,700 円	53
ラック付き 15ml 遠心チューブ	SG-554.002	28,500 円	53
遠心チューブ (15ml)	SG-554.502	23,400 円	53
ラック付き 50ml 遠心チューブ	SG-547.004	22,600 円	53
遠心チューブ (50ml)	SG-547.254	18,700 円	53
遠心チューブ (50ml)	SG-845.400S	22,300 円	53
採取コンテナ (25ml)	SG-4299.410	39,600 円	53
採取コンテナ (25ml)	SG-4299.410J	9,400 円	53
採取コンテナ (70ml)	SG-4299.720	51,200 円	53
採取コンテナ (70ml)	SG-4299.720J	12,000 円	53
スポイト 0.5cc 2 号 滅菌 10 本包装	22612	23,000 円	54
スポイト 0.5cc 2 号 滅菌 1 本包装	22611	22,000 円	54
スポイト 0.5cc 滅菌 10 本包装	20024	22,000 円	54
スポイト 0.5cc 滅菌 1 本包装	20021	21,500 円	54
スポイト 1cc 滅菌 10 本包装	20127	24,000 円	54
スポイト 1cc 滅菌 1 本包装	20123	23,000 円	54
スポイト 1cc (J) 滅菌 10 本包装	26034	23,000 円	54

品名	品番	価格 (税別)	頁	品名	品番	価格 (税別)	頁
スポイト 1cc (J) 滅菌 1 本包装	26031	22,000 円	54	遠心分離機 冷却タイプ H-60R	H-60R	800,000 円	63
スポイト 1cc (L) 滅菌 10 本包装	20524	33,000 円	54	遠心分離機 冷却卓上タイプ H-30R	H-30R	750,000 円	63
スポイト 1cc (L) 滅菌 1 本包装	20521	27,500 円	54	ロータ	RF-110	110,000 円	63
ロングスポイト 1cc 滅菌 10 本包装	20622	40,000 円	54	バケット・ケース	MES-110	200,000 円	63
ロングスポイト 1cc 滅菌 1 本包装	20620	32,500 円	54	抗菌菌用密閉容器	ADS-012	100,000 円	63
スポイト 2cc (S) 滅菌 10 本包装	20224	34,000 円	55	安全キャビネット傾斜 10 型クラスⅡ A2	BHC-1010 Ⅱ A2	1,710,000 円	64, 65
スポイト 2cc (S) 滅菌 1 本包装	20221	27,500 円	55	安全キャビネット傾斜 10 型クラスⅡ A2	BHC-1310 Ⅱ A2	1,820,000 円	64, 65
スポイト 2cc 滅菌 10 本包装	20264	34,000 円	55	安全キャビネット傾斜 10 型クラスⅡ A2	BHC-1610 Ⅱ A2	2,520,000 円	64, 65
スポイト 2cc 滅菌 1 本包装	20262	27,500 円	55	安全キャビネット傾斜 10 型クラスⅡ A2	BHC-1910 Ⅱ A2	3,050,000 円	64, 65
スポイト 2cc (L) 滅菌 10 本包装	20284	36,000 円	55	安全キャビネット卓上傾斜型クラスⅡ A2	SBHC-T701 Ⅱ A2	1,125,000 円	66
スポイト 2cc (L) 滅菌 1 本包装	20281	29,000 円	55	安全キャビネット卓上傾斜型クラスⅡ A2 (ガスバーナー用配管付)	SBHC-T701 Ⅱ A2-G	1,150,000 円	66
スポイト 3cc (GS) 滅菌 10 本包装	22205	34,000 円	55	電子着火式ガスバーナー+フットスイッチ	GB-60E9	106,000 円	67
スポイト 3cc (GS) 滅菌 1 本包装	22215	27,500 円	55	アスピレーター+フットスイッチ	SP-30	77,000 円	67
スポイト 3cc (L) 滅菌 10 本包装	20344	42,000 円	55	排気チャンバー+VD	—	90,000 円	67
スポイト 3cc (L) 滅菌 1 本包装	20243	32,000 円	55	キャノピーフード	—	38,000 円	67
スポイト 5cc 滅菌 10 本包装	25213	42,000 円	55	屋外排気用ファン、ダクト部材	—	都度見積	67
スポイト 5cc 滅菌 1 本包装	25220	34,000 円	55	排気フィルター用差圧スイッチ	—	45,000 円	67
毛細管付スポイト 3.5cc 滅菌 10 本包装	20714	36,000 円	55	バキュームポンプ	—	40,000 円	67
毛細管付スポイト 3.5cc 滅菌 1 本包装	20712	29,000 円	55	フットスイッチ ULVAC 製	DAP-15	22,000 円	67
喀痰用スポイト 滅菌 10 本包装	20364	36,000 円	55	オートピペット	—	75,000 円	67
喀痰用スポイト 滅菌 1 本包装	20361	29,000 円	55	排気フィルター差圧計	—	25,000 円	67
シャーレ・スタック (3 兄弟) 48 枚用	SS-48	12,000 円	56	専用ハンガーパイプ (混注パイプ)	1300 タイプ	27,000 円	67
シャーレ・スタック (3 兄弟) 80 枚用	SS-80	14,000 円	56	卓上型クリーンベンチ	SG-KVM-757	443,000 円	68
ロテータ (回転台)	SS-10	8,000 円	56	オートクレープ用廃棄物袋 捨テリパウチ	SG-A4	20,000 円	68
キャリア (シャーレスタック架台)	SS-20	オープン価格	56	簡易キャビネット	SG-SKK100	200,000 円	69
シャーレ・スタック (新型) 15 枚用	SS-15	10,000 円	57	感染対策商品			
シャーレ・スタック (新型) 18 枚用	SS-18	11,400 円	57	UV 照射ボックス「てあらいくん」	GG-100	32,000 円	72
シャーレ・スタック (新型) 24 枚用	SS-24	10,800 円	57	手洗いトレーニング・オイル 238ml	GG-002	7,000 円	72
シャーレ・スタック (新型) 30 枚用	SS-30	8,000 円	57	手洗いトレーニング・蛍光ローション 100ml	GG-004	3,200 円	72
シャーレ・スタック (新型) 36 枚用	SS-36	12,800 円	57	手洗いトレーニング・パウダー 113g	GG-003	6,000 円	72
シャーレ・スタック (新型) 39 枚用	SS-39	9,800 円	57	エアリアルコンパクト 15W × 2 灯タイプ	FZST15202 GL15/16	オープン価格	73
シャーレ・スタック (新型) 54 枚用	SS-54	10,800 円	58	エアリアルプラス	FMST15202EH1	オープン価格	73
シャーレ・スタック (新型) 72 枚用	SS-72	15,200 円	58	エアリアルパワー	FKST15501EH1	オープン価格	73
シャーレ・スタック (四列型) 48 枚用	SS-48S	12,000 円	58	エアリアルシーリング	FZS15202 GL15/16	オープン価格	73
シャーレ・スタック (四列型) 80 枚用	SS-80S	14,000 円	58	クリーンパーティション	ACP-898-AH/ACP-898-BH	260,000 円	74
検査関連機器				クリーンパーティション	ACP-898-CH/ACP-898-DH	280,000 円	74
落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN™	LI4S-EPT4-ISL3	650,000 円	59	マスク専用自動販売機	SMV-DF8A	130,000 円	75
落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN™	LI4S-EPT4-IPL3	690,000 円	59	DF8 用タテ型専用台	SMV-DF8ATD	21,000 円	75
LUMIN™ 落射蛍光モジュール (ニコン用)	LNKN-EPIL-485N	405,000 円	59	DF8 用ボックス専用台	SMV-DF8ABD	17,000 円	75
LUMIN™ 落射蛍光モジュール (オリンパス CX 用)	LOLY-EPIL-485N	405,000 円	59	自販機用マスク 2 枚/1 箱	SMD-S406-1	18,000 円	75
LUMIN™ 落射蛍光モジュール (カルツァイス用)	LZSS-EPIL-485N	405,000 円	59	大人用 N95 マスク 1 枚/1 箱	SDD01-N95-1	48,000 円	75
ヒートブロックシステム	HBWK-2	340,000 円	60	N95 マスク	SDD01-N95	3,100 円	76
小型ロータリーミキサー	SG-30D	89,000 円	60	三層不織布マスク	SMD-S810	2,400 円	76
遠沈管 4 本用 (15ml)	SG-30D-4R	9,500 円	60	作業用ゴーグル	RG-99	2,800 円	76
遠沈管 16 本用 (15ml)	SG-30D-16R	16,000 円	60	フェイスシールド SFS-1	SFS-1	12,000 円	76
SPEED STERI	HY-1000	208,000 円	61	防護服 (PPE)	MPC-L	39,800 円	76
電気滅菌器 (ループシネレーター)	SL-21	85,000 円	61	ウイロックスプレー	VS 001	オープン価格	77
フェーゴ SCS ベーシック	2000020	98,000 円	61	ウイロックスプレー (詰替用)	VS 002	オープン価格	77
フェーゴ SCS	2000010	125,000 円	61	保護クリーム 15ml (120 本入)	BP-X 2-15	72,000 円	77
フェーゴ SCS プロ	2000030	135,000 円	61	保護クリーム 75ml (1 本)	BP-X 2-75	1,380 円	77
ガスカートリッジ・アダプター	2050100	23,000 円	61	保護クリーム 240ml (1 本)	BP-X 2-240	3,700 円	77
ガスカートリッジ	2050440	18,800 円	61	保護クリーム 480ml (1 本)	BP-X 2-480	6,200 円	77
スプレイプロテクター	2050190	8,500 円	61	キャリット (院内外検体輸送容器)	SBE-CRT	6,000 円	78
ウインドシールド	2050060	5,800 円	61	2-6℃定温スペーサー (保冷剤立て)	SBE-CRT-CT	6,800 円	78
高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-25 Ⅱ	HV-25 Ⅱ	605,000 円	62	冷却スペーサー (保冷剤立て)	SBE-CRT-C	3,800 円	78
高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-50 Ⅱ	HV-50 Ⅱ	705,000 円	62	保冷剤 (キャリット用)	SBE-500N-1	400 円	78
高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-85 Ⅱ	HV-85 Ⅱ	865,000 円	62				
高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-110 Ⅱ	HV-110 Ⅱ	990,000 円	62				

品番索引

[20.1278.100.2]	Microvette 微量採血管 100 K3E	42	[A-06]	アネロパック・ケンキ (3.5L)	3	
[20.1280.100.2]	Microvette 微量採血管 100 Z	42	[A-07]	アネロパック・ケンキ 5% (細胞の虚血実験用)	3	
[20.1282.100.2]	Microvette 微量採血管 100 LH	42	[A-09]	アネロパック・ケンキ 10% (薬剤感受性試験用)	3	
[20.1288.100.2]	Microvette 微量採血管 200 K3E	42	[A-110]	角型ジャー (標準型) 2.5L	5	
[20.1290.100.2]	Microvette 微量採血管 200 Z	42	[A-111]	角型ジャー (薄型) 500ml	5	
[20.1291.0002]	Microvette 微量採血管 200 Z-Gel	42	[A-112]	角型ジャー (大型) 7.0L	5	
[20.1292.100.2]	Microvette 微量採血管 200 LH	42	[A-112F]	角型ジャー (大) のフタ (留具付・パッキン無)	7	
[2000010]	フェーゴ SCS	42	[A-112P]	角型ジャー (大) のパッキンのみ	7	
[2000020]	フェーゴ SCS ベーシック	61	[A-119]	角型ジャー (中型) 3.5L	5	
[2000030]	フェーゴ SCS プロ	61	[A-119F]	角型ジャー (中) のフタ (留具付・パッキン無)	7	
[20021]	スポイト 0.5cc 滅菌 1 本包装	61	[A-119P]	角型ジャー (中) のパッキンのみ	7	
[20024]	スポイト 0.5cc 滅菌 10 本包装	54	[A-12]	アネロパウチ・ケンキ (指示薬+指示薬用クリップ付)	7	
[20123]	スポイト 1cc 滅菌 1 本包装	54	[A-13]	アネロパウチ・ケンキ	3	
[20127]	スポイト 1cc 滅菌 10 本包装	54	[A-17]	W チャックパウチシステム・ケンキ (W チャック+剤/指示薬各 20 +クリップ 1)	7	
[20221]	スポイト 2cc (S) 滅菌 1 本包装	54	[A-18]	W チャックパウチシステム・微好気 (W チャック+剤)	7	
[20224]	スポイト 2cc (S) 滅菌 10 本包装	55	[A-205]	アネロパック・ケンキ (高温菌用)	3	
[20243]	スポイト 3cc (L) 滅菌 1 本包装	55	[A-213]	アネロパウチ・ケンキ	3	
[20262]	スポイト 2cc 滅菌 1 本包装	55	[A-25]	アネロパウチ・微好気 (パウチ袋用)	4	
[20264]	スポイト 2cc 滅菌 10 本包装	55	[A-27]	アネロパウチ・微好気 (薄型ジャー用)	4	
[20281]	スポイト 2cc (L) 滅菌 1 本包装	55	[A-28]	アネロパック・微好気 (角型ジャー用)	4	
[20284]	スポイト 2cc (L) 滅菌 10 本包装	55	[A-29]	アネロパック・微好気 (大型ジャー 7L 用)	4	
[20344]	スポイト 3cc (L) 滅菌 10 本包装	55	[A-37]	スタンディングパウチ用アネロパック・キープ	5	
[20361]	喀痰用スポイト 滅菌 1 本包装	55	[A-39]	専用パウチ袋用アネロパウチ・キープ (指示薬無)	5	
[20364]	喀痰用スポイト 滅菌 10 本包装	55	[A-41]	角型ジャー (標準)・ケンキシステム (標準ジャー+剤/指示薬+クリップ)	7	
[2050060]	ウインドシールド	55	[A-51F]	角型ジャー (標準/薄型・共通) のフタ (留具付・パッキン無)	7	
[2050100]	ガスカートリッジ・アダプター	61	[A-51P]	角型ジャー (標準/薄型・共通) のパッキンのみ	7	
[2050190]	スプレイロテクター	61	[A-58]	パウチ袋 (小)	7	
[2050440]	ガスカートリッジ	61	[A-59]	シャーレラック (ステンレス製) スタンディングパウチ用	5	
[20521]	スポイト 1cc (L) 滅菌 1 本包装	61	[A-61]	アネロパック・CO ₂	4	
[20524]	スポイト 1cc (L) 滅菌 10 本包装	54	[A-62]	アネロパック・CO ₂	4	
[20620]	ロングスポイト 1cc 滅菌 1 本包装	54	[A-63]	アネロパウチ・CO ₂	4	
[20622]	ロングスポイト 1cc 滅菌 10 本包装	54	[A-65]	W チャック付パウチ袋 (小)	5	
[20712]	毛細管付スポイト 3.5cc 滅菌 1 本包装	54	[A-66]	嫌気指示薬	4	
[20714]	毛細管付スポイト 3.5cc 滅菌 10 本包装	55	[A-68]	シャーレラック (ステンレス製)・標準ジャー用	5	
[22205]	スポイト 3cc (GS) 滅菌 10 本包装	55	[A-69]	試験管立て (ステンレス製)・標準ジャー用	5	
[22215]	スポイト 3cc (GS) 滅菌 1 本包装	55	[A-72]	密閉クリップ・17L (パウチ用/A-58 用)	7	
[22611]	スポイト 0.5cc 2 号 滅菌 1 本包装	55	[A-74]	密閉クリップ・24L (A-92 用)	7	
[22612]	スポイト 0.5cc 2 号 滅菌 10 本包装	54	[A-75]	密閉クリップ・28L (A-93 用)	7	
[25-1406 1PF BT]	チューブ入り滅菌個包装スワブ (ポリウレタンフォーム、スモール)	54	[A-76]	密閉クリップ・33L (300 × 440 用/A-94 用)	7	
[25-1416 1PF50]	メディ・スワブ (ポリウレタンフォーム)	39	[A-82]	耐熱クリップ・24L (A-92 用)	7	
[25-1506 1PF BT]	チューブ入り滅菌個包装スワブ (ポリウレタンフォーム、レギュラー)	38	[A-83]	耐熱クリップ・28L (A-93 用)	7	
[25-1516 1PF100]	メディ・スワブ (フォーム、スタンダード)	39	[A-84]	耐熱クリップ・32L (300 × 440 用/A-94 用)	7	
[25-3206-H]	ハイドラフロック・スワブ (オーバル・ロング)	38	[A-92]	パウチ袋 (中)	7	
[25-3306-H]	ハイドラフロック・スワブ (スタンダード)	32, 33	[A-92W]	W チャックパウチ袋 (中)	7	
[25-3306-H BT]	ドライトランスポート・システム (スタンダード)	32, 33	[A-93]	パウチ袋 (大)	7	
[25-3316-H]	ハイドラフロック・スワブ (ミニチップ)	34	[A-94]	パウチ袋 (特大)	7	
[25-3316-H EMB100BT]	ドライトランスポート・システム (ミニチップ)	32, 33	[A-98]	W チャック付スタンディングパウチ袋	5	
[25-3316-H EMB80BT]	ドライトランスポート・システム (ミニチップ)	34	[A-99]	嫌気性パウチ (PT パウチ同等品)	7	
[25-3317-H]	ハイドラフロック・スワブ (ウルトラファイン)	34	[A-99-1]	嫌気性パウチ (PT パウチ同等品)	7	
[25-3317-H BT]	ドライトランスポート・システム (ウルトラファイン)	32, 33	[ACP-1]	アネロパック CO ₂ 滅菌グレード品	7	
[25-3317-U]	ピュアフロックウルトラ・スワブ (ウルトラファイン)	35	[ACP-898-AH/ACP-898-BH]	クリーンパーティション	74	
[25-3318-H]	ハイドラフロック・スワブ (マイクロファイン)	36	[ACP-898-CH/ACP-898-DH]	クリーンパーティション	74	
[25-3318-H BT]	ドライトランスポート・システム (マイクロファイン)	32, 33	[ADS-012]	抗菌菌用密閉容器	63	
[25-3319-H BT]	ドライトランスポート・システム (ウルトラファイン)	35	B			
[25-3320-H]	ハイドラフロック・スワブ (ウルトラファイン)	32, 33	[B-01] ベンキャッチ			43
[25-3320-U EMB 80]	ピュアフロックウルトラ・スワブ (ウルトラファイン)	36	[B-200] ベンキャッチ			43
[25-3406-H]	ハイドラフロック・スワブ (ラージ)	32, 33	[BHC-1010 II A2] 安全キャビネット傾斜 10 型クラス II A2			64, 65
[25-3406-H BT]	ドライトランスポート・システム (ラージ)	34	[BHC-1310 II A2] 安全キャビネット傾斜 10 型クラス II A2			64, 65
[25-3606-H]	ハイドラフロック・スワブ (オーバル)	32, 33	[BHC-1610 II A2] 安全キャビネット傾斜 10 型クラス II A2			64, 65
[25-3606-H BT]	ドライトランスポート・システム (オーバル)	35	[BHC-1910 II A2] 安全キャビネット傾斜 10 型クラス II A2			64, 65
[25-3706-H]	ハイドラフロック・スワブ (オーバル)	32, 33	[BP-X 2-15] 保護クリーム 15ml (120 本入)			77
[25-3706-H BT PK]	ドライトランスポート・システム (オーバル)	35	[BP-X 2-240] 保護クリーム 240ml (1 本)			77
[25-3806-H]	ハイドラフロック・スワブ (オーバル)	32, 33	[BP-X 2-480] 保護クリーム 480ml (1 本)			77
[25-3806-H BT PK]	ドライトランスポート・システム (オーバル)	35	[BP-X 2-75] 保護クリーム 75ml (1 本)			77
[25-800 1PD 50]	メディ・スワブ (ポリエステル製、細型)	38	[BRB1000] バリアボックス 1000			47
[25-800 1SAR BT]	チューブ入り滅菌個包装スワブ (レーヨン製、細型)	39	[BRB-200] バリアボックス 200			47
[25-800 A 50]	メディ・スワブ (アルギン酸カルシウム製鼻咽頭用)	38	[BRB-450] バリアボックス 450			47
[25-806 1PD]	メディ・スワブ (ポリエステル製、スタンダード)	38	[BRB5] バリアボックス 5			45, 47
[25-806 1PD BT]	チューブ入り滅菌個包装スワブ (ポリエステル製、スタンダード)	39	[BRB-D-3] バリアトランクシングル			48
[25-806 1PR]	メディ・スワブ (レーヨン製、スタンダード)	38	[BRP-A5R] バリアパウチ A5R			45, 46
[25-806 1PR BT]	チューブ入り滅菌個包装スワブ (レーヨン製、スタンダード)	39	[BRP-AB3-N] 吸水バッグ			46
[25213]	スポイト 5cc 滅菌 10 本包装	55	[BRP-AB6-B] 吸水バッグ 6 連			45, 46
[25220]	スポイト 5cc 滅菌 1 本包装	55	[BRP-ABF] 吸水材			46
[26031]	スポイト 1cc (J) 滅菌 1 本包装	54	[BRP-ABS] 吸水シート			46
[26034]	スポイト 1cc (J) 滅菌 10 本包装	54	[BRP-B4R] バリアパウチ B4R			46
			[BRS-A5R10] バリアパウチセット A5R			45
			[BS-01] 採便キット (ベンキャッチ・採取コンテナセット)			44
8						
[8175 CSR40]	ハードループ (1μl)	24	D			
[8176 CSR40]	ディスポニードル	24	[DAP-15] フットスイッチ ULVAC 製			67
[8177 CSR40]	ハードループ (10μl)	24	F			
[8178 CSR40]	ソフトループ (1μl)	24	[FKST15501EH1] エアーリアパワー			73
[8179 CSR40]	ソフトループ (10μl)	24	[FMST15202EH1] エアーリアプラス			73
[8183 CS10]	ディスポニードル・ミニ	24	[FZS15202GL15/16] エアーリアシーリング			73
			[FZST15202GL15/16] エアーリアコンパクト 15W × 2 灯タイプ			73
A						
[A-02]	アネロパック・ケンキ (指示薬+クリップ)	3	G			
[A-03]	アネロパック・ケンキ	3	[GB-60E9] 電子着火式ガスパナー+フットスイッチ			67
[A-04]	アネロパック・ケンキ	7				
[A-05]	アネロパック・ケンキ (高温菌用)	3				

[GG-002]	手洗いトレーニング・オイル 238ml	72	[SDL673-01]	<i>Alternaria</i> sp.	13
[GG-003]	手洗いトレーニング・パウダー 113g	72	[SDL673-03]	<i>Chaetomium</i> sp.	13
[GG-004]	手洗いトレーニング・蛍光ローション 100ml	72	[SDL673-04]	<i>Cladosporium</i> sp.	13
[GG-100]	UV 照射ボックス 「てあらいくん」	72	[SDL673-05]	<i>Curvularia</i> sp.	13
[GS-20B]	新型自動染色装置	11	[SDL673-15]	<i>Scedosporium apiospermum</i>	13
			[SDL673-16]	<i>Scedosporium prolificans</i>	13
H			[SDL673-19]	<i>Wangiella dermatiditis</i>	13
[H-30R]	遠心分離機冷却卓上タイプ H-30R	63	[SDL674-07]	<i>M. gypseum</i>	13
[H-60R]	遠心分離機冷却タイプ H-60R	63	[SDL674-08]	<i>M. vanbreuseghemii</i>	13
[HBWK-2]	ヒートブロックシステム	60	[SDL674-09]	<i>T. ajelloi</i>	13
[HV-110 II]	高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-110 II	62	[SDL674-13]	<i>T. mentagrophytes</i>	13
[HV-25 II]	高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-25 II	62	[SDL674-14]	<i>T. rubrum</i>	13
[HV-50 II]	高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-50 II	62	[SDL675-01]	<i>Acremonium</i> sp.	13
[HV-85 II]	高圧蒸気滅菌器 (医療用) HV-85 II	62	[SDL675-06]	<i>Aspergillus flavus</i>	13
[HY-1000]	SPEED STERI	61	[SDL675-07]	<i>Aspergillus fumigatus</i>	13
			[SDL675-09]	<i>Aspergillus niger</i>	13
K			[SDL675-16]	<i>Chrysosporium</i> sp.	13
[K 24C]	ループスタンド	24	[SDL675-18]	<i>Fusarium</i> sp.	13
[KOK-1]	スライドガラス加温染色用器具「かおんくん」	15	[SDL675-19]	<i>Paecilomyces</i> sp.	13
[KOK-S5]	交換用セラミック (先端部 5 個入, かおんくん用)	15	[SDL675-20]	<i>Penicillium</i> sp.	13
			[SDL675-32]	<i>Scopulariopsis</i> sp.	13
L			[SDL675-33]	<i>Sepedonium</i> sp.	13
[LA-106]	オプティスワプトランスポート・システム (ロング)	8, 9	[SDL745]	真菌標本作製用カバースリップ・テープ (ファンギ・テープ)	12
[LA-116]	オプティスワプトランスポート・システム (ミニチップ)	8, 9	[SDL753]	真菌標本作製用染色・固定液 (マイコパーム・ブルー)	12
[LA-117]	オプティスワプトランスポート・システム (ウルトラファイン)	8, 9	[SDL-K1538B]	PYR ディスク	18
[LI45-EPT4-IPL3]	落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN	59	[SDL-K710310]	馬尿酸塩ディスク	17
[LI45-EPT4-ISL3]	落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN	59	[SDL-K710315]	馬尿酸塩ディスク	17
[LNKN-EPIL-485N]	LUMIN 落射蛍光モジュール (ニコン用)	59	[SFS-1]	フェイスシールド SFS-1	76
[LPLY-EPIL-485N]	LUMIN 落射蛍光モジュール (オリンパス CX 用)	59	[SG-000A]	フリーズボックス 81 穴	51
[LZSS-EPIL-485N]	LUMIN 落射蛍光モジュール (カールツァイス用)	59	[SG-001A]	フリーズボックス 100 穴	51
			[SG-0203.552]	フィルターチップ 20μ ラック入	52
M			[SG-0203.553]	フィルターチップ 20μ 交換プレート	52
[MES-110]	バケット・ケース	63	[SG-037.604]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[MPC-L]	防護服 (PPE)	76	[SG-037.712]	マイクロチューブ スクリュー (ループ)	50
			[SG-050A]	フリーズボックス 50 穴	51
P			[SG-0503.552.2]	フィルターチップ 1000μ ラック入	52
[PAX1503PZ]	エススティック (テーパー・スリット)	36	[SG-0503.553.2]	フィルターチップ 1000μ 交換プレート	52
[PX1503EZ]	エススティック (スリット)	36	[SG-067.212]	フィルターチップ 100μ ラック入	52
[PX1509SZ]	エススティック (唾液採取用綿棒)	40	[SG-10-DEOXY]	10% デオキシコール酸ナトリウム水溶液	19
			[SG-1303.552]	フィルターチップ 200μ ラック入	52
R			[SG-1303.553]	フィルターチップ 200μ 交換プレート	52
[RF-110]	ロータ	63	[SG-2-DEOXY]	2% デオキシコール酸ナトリウム水溶液	19
[RG-99]	作業用ゴーグル	76	[SG-2299.318]	滅菌済コンテナ (500ml)	53
[RTX1QC]	Q control Multiplex control	31	[SG-2299.435]	滅菌済コンテナ (250ml)	53
			[SG-2299.447S]	滅菌済コンテナ (70ml)	53
S			[SG-296.012]	マイクロチューブ スクリュー (ループ)	50
[S-01]	水素発生材	7	[SG-296.504]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[S 24C]	ステンレスループスタンド	24	[SG-307.007]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[S04240-09S]	白金線挟み (真鍮製)	27	[SG-30D]	小型ロータリーミキサー	60
[S04240-10S]	白金線挟み (ニウム製)	27	[SG-30D-16R]	遠沈管 16 本用 (15ml)	60
[S04240-12S]	白金線挟み (通し)	27	[SG-30D-4R]	遠沈管 4 本用 (15ml)	60
[S04240-13S]	白金線挟み (通し)	27	[SG-396.564]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[S04240-20S]	代用線 (ニクロム線) 輪なし・1000mm 巻き、線径φ0.5mm	27	[SG-3-KOH]	3% 水酸化カリウム水溶液	20
[S04240-24S]	代用線 (ニクロム線) 輪なし・線のみ・長さ 60mm、線径φ0.5mm	27	[SG-407.002]	マイクロチューブ プッシュ	50
[S04240-30S]	代用線 (コバルトクロム線) φ3mm 輪付・長さ 60mm、線径φ0.5mm	27	[SG-407.004]	マイクロチューブ プッシュ	50
[S04240-31]	代用線 (コバルトクロム線) 輪なし・1000mm 巻き、線径φ0.5mm	27	[SG-4299.382S]	遠心チューブ (10ml)	53
[S04240-32S]	代用線 (コバルトクロム線) 輪なし・線のみ・長さ 60mm、線径φ0.5mm	27	[SG-4299.410]	採取コンテナ (25ml)	53
[S04240-50]	白金耳 φ2mm 輪付・長さ 50mm、線径φ0.3mm)	27	[SG-4299.410J]	採取コンテナ (25ml)	53
[S86.1562.010]	ディスボーザブル ループ 10μ	25	[SG-4299.482]	遠心チューブ (10ml)	53
[S86.1567.010]	ディスボーザブル ループ 1μ	25	[SG-4299.720]	採取コンテナ	43
[S86.1568.010]	ディスボーザブル ニードル	25	[SG-4299.720]	採取コンテナ (70ml)	53
[SBB001]	バイオ・ボトル 1L	48	[SG-4299.720J]	採取コンテナ	43
[SBB002]	バイオ・ボトル 2L	48	[SG-4299.720J]	採取コンテナ (70ml)	53
[SBB003]	バイオ・ボトル 3L	48	[SG-4351.3000]	サリベット・唾液採取キット	40
[SBE-500N-1]	保冷剤 (キャリット用)	78	[SG-4531.400]	滅菌済コンテナ (100ml)	53
[SBE-CRT]	キャリット (院内外検体輸送容器)	78	[SG-496.006]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[SBE-CRT-C]	冷却スペーサー (保冷剤立て)	78	[SG-496.007]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[SBE-CRT-CT]	2-6℃定温スペーサー (保冷剤立て)	78	[SG-496.604]	マイクロチューブ スクリュー (セパレート)	50
[SBHC-T701 II A2]	安全キャビネット卓上傾斜型クラス II A2	66	[SG-496.712]	マイクロチューブ スクリュー (ループ)	50
[SBHC-T701 II A2-G]	安全キャビネット卓上傾斜型クラス II A2 (ガスバーナー用配管付)	66	[SG-498]	スペシャルラック 18 穴	51
[SCV2AQP]	SARS-CoV-2 Analytical Q Panel	31	[SG-554.002]	ラック付き 15ml 遠心チューブ	53
[SCV2MQP]	SARS-CoV-2 Molecular Q Panel	31	[SG-554.502]	遠心チューブ (15ml)	53
[SCV2QC]	SARS-CoV-2 Q Control	31	[SG-547.004]	ラック付き 50ml 遠心チューブ	53
[SDD01-N95]	N95 マスク	76	[SG-547.254]	遠心チューブ (50ml)	53
[SDD01-N95-1]	大人用 N95 マスク 1 枚/1 箱	75	[SG-596.002]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL251]	500ml コンテナ/ロート、ラック (2 個入)	15	[SG-596.004]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL252]	1000ml コンテナ/ロート、ラック (2 個入)	15	[SG-596.006]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL345]	改良オーラミン O 染色キット	14	[SG-596.102]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL350]	抗酸菌染色コントロール・スライド	14	[SG-607.002]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL351]	抗酸菌染色コントロール・スライド	14	[SG-607.004]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL360]	グラム染色コントロール・スライド	10	[SG-607.006]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL361]	グラム染色コントロール・スライド	10	[SG-607.007]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL361-C-1]	グラム染色コントロール・スライド	10	[SG-607.102]	マイクロチューブ プッシュ	50
[SDL398-9131]	プチレート・ディスク	16	[SG-8241]	スペシャルラック 48 穴	51
[SDL398-K475]	ニンヒドリン試薬	17	[SG-845.400S]	遠心チューブ (50ml)	53
[SDL667]	スナップ&ダイジェスト 75ml/10 本, ドライ・バッファー・パウダー/5 包	15	[SG-848.001]	スペシャルラック 20 穴	51
[SDL668]	スナップ&ダイジェスト 150ml/10 本, ドライ・バッファー・パウダー/10 包	15	[SG-915]	唾液採取セット滅菌 (ストロー付き)	40
[SDL671-03]	<i>Cryptococcus neoformans</i>	13	[SG-A4]	オートクレーブ用廃棄物袋 捨テリパウチ	68
[SDL671-04]	<i>Geotrichum candidum</i>	13	[SG-APR.0001RS]	ピタラックチップ 交換プレート	52
[SDL671-05]	<i>Hansenula</i> sp.	13	[SG-APR.0001S]	ピタラックチップ ラック入	52
[SDL672-06]	<i>Rhizopus</i> sp.	13	[SG-APR.002RS]	ピタラックチップ 交換プレート	52
[SDL672-09]	<i>Syncephalastrum</i> sp.	13	[SG-APR.002S]	ピタラックチップ ラック入	52

[SG-APR.02RS]	ピタラックチップ 交換プレート
[SG-APR.02S]	ピタラックチップ ラック入
[SGFK-4S]	PCR メディア SG (4.3ml)
[SG-H2O2]	3%過酸化水素水
[SG-KVM-757]	卓上型クリーンベンチ
[SG-MINI1]	ミニエーゼ 1μ (ディスボループ)
[SG-MINI10]	ミニエーゼ 10μ (ディスボループ)
[SG-SKK100]	簡易キャビネット
[SG-SPOTIND-5]	スポットインドル試薬
[SG-SULF-15]	0.5%硫酸水 15mL
[SG-SULF-100]	0.5%硫酸水 100mL
[SGVTM-3S]	ウイルス輸送液
[SL-21]	電気滅菌器 (ループシネレーター)
[SMD-S406-1]	自販機用マスク 2 枚/1 箱
[SMD-S810]	三層不織布マスク
[SMD-S810]	マスク (三層不織布)
[SMPP-030]	喀痰採取容器
[SMSN-60]	ステンレス・ニードル
[SMSN-61]	ステンレス・ループ (φ1.0mm)
[SMSN-62]	ステンレス・ループ (φ2.0mm)
[SMSN-63]	ステンレス・ループ (φ3.0mm)
[SMSN-64]	ステンレス・ループ (φ4.0mm)
[SMSR-30]	ステンレス・滅菌缶 S
[SMSR-40]	ステンレス・滅菌缶 L
[SMV-DF8A]	マスク専用自動販売機
[SMV-DF8ABD]	DF8 用ボックス専用台
[SMV-DF8ATD]	DF8 用タテ型専用台
[SP-30]	アスピレーター+フットスイッチ
[SPL-AL-01]	病毒を移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (大) 15 枚
[SPL-AL-02]	病毒を移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (大) 60 枚
[SPL-AS-01]	病毒を移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (小) 15 枚
[SPL-AS-02]	病毒を移しやすい物質 (クラス 6) ラベル (小) 50 枚
[SPL-BL-01]	UN3373 ラベル (大) 15 枚
[SPL-BL-02]	UN3373 ラベル (大) 60 枚
[SPL-BS-01]	UN3373 ラベル (小) 15 枚
[SPL-BS-02]	UN3373 ラベル (小) 50 枚
[SPL-D-02]	ドライアイス (クラス 9) ラベル
[SPL-D-02]	ラベル・ドライアイス (クラス 9)
[SPL-S-01]	セキュリティラベル 15 枚
[SPL-S-02]	セキュリティラベル 50 枚
[SPP011]	パンパック 1L
[SPP012]	パンパック 2L
[SS-10]	ロテータ (回転台)
[SS-15]	シャーレ・スタック (新型) 15 枚用

52	[SS-18]	シャーレ・スタック (新型) 18 枚用	57
52	[SS-20]	キャリー (シャーレスタック架台)	56
30	[SS-24]	シャーレ・スタック (新型) 24 枚用	57
22	[SS-30]	シャーレ・スタック (新型) 30 枚用	57
68	[SS-36]	シャーレ・スタック (新型) 36 枚用	57
25	[SS-39]	シャーレ・スタック (新型) 39 枚用	57
25	[SS-48]	シャーレ・スタック (3 兄弟) 48 枚用	56
69	[SS-48S]	シャーレ・スタック (四列型) 48 枚用	58
21	[SS-54]	シャーレ・スタック (新型) 54 枚用	58
23	[SS-72]	シャーレ・スタック (新型) 72 枚用	58
23	[SS-80]	シャーレ・スタック (3 兄弟) 80 枚用	56
30	[SS-80S]	シャーレ・スタック (四列型) 80 枚用	58
61			
75	T		
76	[TS-03]	新型染色トレイ標準セット	10
76	[TS-03-Z01]	染色トレイ	10
41, 53			
26	U		
26	[UT-100]	ユニットランズ-RT トランスポートメディア	28, 29
26	[UT-106]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (ラージ)	28, 29
26	[UT-116]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (ミニチップ)	28, 29
26	[UT-117]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (ウルトラファイン)	28, 29
26	[UT-300]	ユニットランズ-RT トランスポートメディア	28, 29
26	[UT-306]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (オーバル)	28, 29
75	[UT-316]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (ミニチップ)	28, 29
75	[UT-317]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (ウルトラファイン)	28, 29
75	[UT-367]	ユニットランズ-RT トランスポートシステム (オーバル・ウルトラファイン 2 本入)	28, 29
67			
47	V		
47	[VS 001]	ワイロックスプレー	77
47	[VS 002]	ワイロックスプレー (話替用)	77
47			
47	— (品番なし)		
47	[—]	セキュリティラベル	47
47	[—]	オーバーパックシール	47
47	[—]	排気チャンバー+ VD	67
47	[—]	キャノピーフード	67
47	[—]	屋外排気用ファン、ダクト部材	67
47	[—]	排気フィルター用差圧スイッチ	67
47	[—]	バキュームポンプ	67
48	[—]	オートビベット	67
48	[—]	排気フィルター差圧計	67
56	[—]	専用ハンガーパイプ (混注パイプ)	67
57			

品名索引

和 文
あ
アスピレーター+フットスイッチ [SP-30]
アネロパウチ・CO ₂ [A-63]
アネロパウチ・ケンキ [A-13, A-213]
●指示薬+指示薬用クリップ付 [A-12]
アネロパウチ・微好気
●パウチ袋用 [A-25]
●薄型ジャー用 [A-27]
アネロパック・CO ₂ [A-61, A-62]
●滅菌グレード品 [ACP-1]
アネロパック・ケンキ [A-03, A-04]
●3.5L [A-06]
●高温菌用 [A-05, A-205]
●指示薬+クリップ [A-02]
アネロパック・ケンキ 5% (細胞の虚血実験用) [A-07]
アネロパック・ケンキ 10% (薬剤感受性試験用) [A-09]
アネロパック・微好気
●大型ジャー 7L 用 [A-29]
●角型ジャー用 [A-28]
安全キャビネット傾斜 10 型クラス II A2
[BHC-1010 II A2, BHC-1310 II A2, BHC-1610 II A2, BHC-1910 II A2]
安全キャビネット卓上傾斜型クラス II A2 [SBHC-T701 II A2]
●ガスバーナー用配管付 [SBHC-T701 II A2-G]
う
ウイルス輸送液 [SGVTM-3S]
ワイロックスプレー [VS 001]
ワイロックスプレー (話替用) [VS 002]
ウインドシールド [2050060]
え
エアリアコンパクト 15W × 2 灯タイプ [FZST15202GL15/16]
エアリアシーリング [FZS15202GL15/16]
エアリアパワー [FKST15501EH1]
エアリアプラス [FMST15202EH1]
エススティック
●スリット [PX1503EZ]
●テーバー・スリット [PAX1503PZ]
エススティック (唾液採取用綿棒) [PX1509SZ]
遠心チューブ
●10ml [SG-4299.482, SG-4299.382S]
●15ml [SG-554.502]
●50ml [SG-547.254, SG-845.400S]

●ラック付き 15ml [SG-554.002]	53
●ラック付き 50ml [SG-547.004]	53
遠心分離機	
●冷却タイプ H-60R [H-60R]	63
●冷却卓上タイプ H-30R [H-30R]	63
遠沈管	
●4 本用 (15ml) [SG-30D-4R]	60
●16 本用 (15ml) [SG-30D-16R]	60
お	
オートクレープ用廃棄物袋 捨テリパウチ [SG-A4]	68
オートピペット [—]	67
オーバーパックシール [—]	47
屋外排気用ファン、ダクト部材 [—]	67
大人用 N95 マスク 1 枚/1 箱 [SDD01-N95-1]	75
オプティスワブトランスポート・システム	
●ウルトラファイン [LA-117]	8, 9
●ミニチップ [LA-116]	8, 9
●ロング [LA-106]	8, 9
オリンパス CX 用モジュール [LOLY-EPIL-485N]	59
か	
カールツァイス用モジュール [LZSS-EPIL-485N]	59
改良オーラミン O 染色キット [SDL345]	14
かおんくん (スライドグラス加温染色用器具) [KOK-1]	15
角型ジャー	
●薄型 500ml [A-111]	5
●大型 7.0L [A-112]	5
●大のパッキンのみ [A-112P]	7
●大のフタ (留具付・パッキン無) [A-112F]	7
●中型 3.5L [A-119]	5
●中のパッキンのみ [A-119P]	7
●中のフタ (留具付・パッキン無) [A-119F]	7
●標準・ケンキシステム (標準ジャー+剤/指示薬+クリップ) [A-41]	7
●標準型 2.5L [A-110]	5
●(標準/薄型・共通) のパッキンのみ [A-51P]	7
●(標準/薄型・共通) のフタ (留具付・パッキン無) [A-51F]	7
喀痰採取容器 [SMPP-030]	41, 53
喀痰用スポイト	
●滅菌 10 本包装 [20364]	55
●滅菌 1 本包装 [20361]	55
ガスカートリッジ [2050440]	61
ガスカートリッジ・アダプター [2050100]	61
簡易キャビネット [SG-SKK100]	69

き			
キャノピーフード【一】	67	スナップ&ダイジェスト 75ml/10 本	
キャリー（シャーレスタック架台）【SS-20】	56	ドライ・パUFFER・パウダー/5 包【SDL667】	15
キャリット（院内外検体輸送容器）【SBE-CRT】	78	スナップ&ダイジェスト 150ml/10 本	
吸水材【BRP-ABF】	46	ドライ・パUFFER・パウダー/10 包【SDL668】	15
吸水シート【BRP-ABS】	46	スプレイプロテクター【2050190】	61
吸水バッグ【BRP-AB3-N】	46	スペシャルラック	
吸水バッグ 6 連【BRP-AB6-B】	45, 46	●18 穴【SG-498】	51
		●20 穴【SG-848.001】	51
		●48 穴【SG-8241】	51
く		スポイト	
グラム染色コントロール・スライド		●0.5cc 滅菌 10 本包装【20024】	54
●【SDL360】	10	●0.5cc 滅菌 1 本包装【20021】	54
●【SDL361】	10	●0.5cc 2 号 滅菌 10 本包装【22612】	54
●【SDL361-C-1】	10	●0.5cc 2 号 滅菌 1 本包装【22611】	54
グリーンパーティション		●1cc 滅菌 10 本包装【20127】	54
●【ACP-898-AH/ACP-898-BH】	74	●1cc 滅菌 1 本包装【20123】	54
●【ACP-898-CH/ACP-898-DH】	74	●1cc (J) 滅菌 10 本包装【26034】	54
		●1cc (J) 滅菌 1 本包装【26031】	54
		●1cc (L) 滅菌 10 本包装【20524】	54
		●1cc (L) 滅菌 1 本包装【20521】	54
		●1cc (ロング) 滅菌 10 本包装【20622】	54
		●1cc (ロング) 滅菌 1 本包装【20620】	54
		●2cc 滅菌 10 本包装【20264】	55
		●2cc 滅菌 1 本包装【20262】	55
		●2cc (L) 滅菌 10 本包装【20284】	55
		●2cc (L) 滅菌 1 本包装【20281】	55
		●2cc (S) 滅菌 10 本包装【20224】	55
		●2cc (S) 滅菌 1 本包装【20221】	55
		●3cc (GS) 滅菌 10 本包装【22205】	55
		●3cc (GS) 滅菌 1 本包装【22215】	55
		●3cc (L) 滅菌 10 本包装【20344】	55
		●3cc (L) 滅菌 1 本包装【20243】	55
		●3.5cc (毛細管付) 滅菌 10 本包装【20714】	55
		●3.5cc (毛細管付) 滅菌 1 本包装【20712】	55
		●5cc 滅菌 10 本包装【25213】	55
		●5cc 滅菌 1 本包装【25220】	55
		●喀痰用 滅菌 10 本包装【20364】	55
		●喀痰用 滅菌 1 本包装【20361】	55
		スポットインドル試験【SG-SPOTIND-5】	21
		スライドグラス加温染色用器具「かおんくん」【KOK-1】	15
こ			
高圧蒸気滅菌器（医療用）			
●【HV-110 II】	62		
●【HV-25 II】	62		
●【HV-50 II】	62		
●【HV-85 II】	62		
交換用セラミック（先端部 5 個入、かおんくん用）【KOK-S5】	15		
抗酸菌染色コントロール・スライド			
●【SDL350】	14		
●【SDL351】	14		
抗酸菌用密閉容器【ADS-012】	63		
小型ロータリーミキサー【SG-30D】	60		
コンテナ/ロート、ラック			
●500ml, 2 個入【SDL251】	15		
●1000ml, 2 個入【SDL252】	15		
さ			
サージカルマスク			
●大人用 2 枚/1 箱【SMD-S401】	75		
●子ども用 2 枚/1 箱【SMD-S501】	75		
採取コンテナ【SG-4299.720, SG-4299.720J】	43		
●25ml【SG-4299.410】	53		
●25ml【SG-4299.410J】	53		
●70ml【SG-4299.720】	53		
●70ml【SG-4299.720J】	53		
採便キット（ペンキャッチ・採取コンテナセット）【BS-01】	43		
作業用ゴーグル【RG-99】	76		
サリベット・唾液採取キット【SG-4351.3000】	40		
三層不織布マスク【SMD-S810】	76		
し			
シール（オーバーパック）【一】	47		
試験管立て（ステンレス製）・標準ジャー用【A-69】	5		
自販機用マスク 2 枚/1 箱【SMD-S406-1】	75		
シャーレ・スタック（3 兄弟）			
●48 枚用【SS-48】	56		
●80 枚用【SS-80】	56		
シャーレ・スタック（新型）			
●15 枚用【SS-15】	57		
●18 枚用【SS-18】	57		
●24 枚用【SS-24】	57		
●30 枚用【SS-30】	57		
●36 枚用【SS-36】	57		
●39 枚用【SS-39】	57		
●54 枚用【SS-54】	58		
●72 枚用【SS-72】	58		
シャーレ・スタック（四列型）			
●48 枚用【SS-48S】	58		
●80 枚用【SS-80S】	58		
シャーレラック（ステンレス製）・標準ジャー用【A-68】	5		
シャーレラック（ステンレス製）スタンディングパウチ用【A-59】	5		
新型自動染色装置【GS-20B】	11		
新型染色トレー標準セット【TS-03】	10		
真菌標本作製用カパースリップ・テープ（ファンギ・テープ）【SDL745】	12		
真菌標本作製用染色・固定液（マイコパーム・ブルー）【SDL753】	12		
す			
水素発生材【S-01】	7		
スタンディングパウチ用アネロパック・キープ【A-37】	5		
捨テリパウチ（オートクレーブ用廃棄物袋）【SG-A4】	68		
ステンレスループスタンド【S 24C】	24		
ステンレス・ニードル【SMSN-60】	26		
ステンレス・滅菌缶			
●L【SMSR-40】	26		
●S【SMSR-30】	26		
ステンレス・ループ			
●φ1.0mm【SMSN-61】	26		
●φ2.0mm【SMSN-62】	26		
●φ3.0mm【SMSN-63】	26		
●φ4.0mm【SMSN-64】	26		
て			
てあらいくん（UV 照射ボックス）【GG-100】	72		
手洗いトレーニング・オイル 238ml【GG-002】	72		
手洗いトレーニング・蛍光ローション 100ml【GG-004】	72		
手洗いトレーニング・パウダー 113g【GG-003】	72		
ディスポーザブル			
●ニードル【S86.1568.010】	25		
●ループ 1μ【S86.1567.010】	25		
●ループ 10μ【S86.1562.010】	25		
ディスポニードル【8176 CSR40】	24		
ディスポニードル・ミニ【8183 CS10】	24		
電気滅菌器（ループシネレーター）【SL-21】	61		
せ			
セキリティラベル	47		
セキリティラベル			
●15 枚【SPL-S-01】	47		
●50 枚【SPL-S-02】	47		
染色トレー【TS-03-Z01】	10		
専用パウチ袋用アネロパウチ・キープ（指示薬無）【A-39】	5		
専用ハンガーパイプ（混注パイプ）【1300 タイプ】	67		
そ			
ソフトループ			
●1μl【8178 CSR40】	24		
●10μl【8179 CSR40】	24		
た			
耐熱クリップ			
●24L (A-92 用)【A-82】	7		
●28L (A-93 用)【A-83】	7		
●32L (300 × 440 用/A-94 用)【A-84】	7		
代用線（コバルトクロム線）			
●φ3mm 輪付・長さ 60mm、線径φ0.5mm【S04240-30S】	27		
●輪なし・1000mm 巻き、線径φ0.5mm【S04240-31】	27		
●輪なし・線のみ・長さ 60mm、線径φ0.5mm【S04240-32S】	27		
代用線（ニクロム線）			
●輪なし・1000mm 巻き、線径φ0.5mm【S04240-20S】	27		
●輪なし・線のみ・長さ 60mm、線径φ0.5mm【S04240-24S】	27		
唾液採取キット（サリベット）【SG-4351.3000】	40		
唾液採取セット滅菌（ストロー付き）【SG-915】	40		
唾液採取用綿棒エススティック【PX1509SZ】	40		
卓上型クリーンベンチ【SG-KVM-757】	68		
ち			
チューブ入り滅菌個包装スワブ			
●ポリウレタンフォーム、スモール【25-1406 1PF BT】	39		
●ポリウレタンフォーム、レギュラー【25-1506 1PF BT】	39		
●ポリエステル製、スタンダード【25-806 1PD BT】	39		
●レーヨン製、スタンダード【25-806 1PR BT】	39		
●レーヨン製、細型【25-800 1SAR BT】	39		
て			
てあらいくん（UV 照射ボックス）【GG-100】	72		
手洗いトレーニング・オイル 238ml【GG-002】	72		
手洗いトレーニング・蛍光ローション 100ml【GG-004】	72		
手洗いトレーニング・パウダー 113g【GG-003】	72		
ディスポーザブル			
●ニードル【S86.1568.010】	25		
●ループ 1μ【S86.1567.010】	25		
●ループ 10μ【S86.1562.010】	25		
ディスポニードル【8176 CSR40】	24		
ディスポニードル・ミニ【8183 CS10】	24		
電気滅菌器（ループシネレーター）【SL-21】	61		

ユニットランズ-RT トランスポートシステム		
• ウルトラファイン [UT-117]		
• ウルトラファイン [UT-317]		
• オーバル [UT-306]		
• オーバル・ウルトラファイン 2 本入 [UT-367]		
• ミニチップ [UT-116]		
• ミニチップ [UT-316]		
• ラージ [UT-106]		
ユニットランズ-RT トランスポートメディア		
• [UT-100]		
• [UT-300]		
ら		
落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡 i-4 LUMIN		
• [LI4S-EPT4-ISL3]		
• [LI4S-EPT4-IPL3]		
落射蛍光モジュール		
• オリンパス CX 用 [LOLY-EPIL-485N]		
• カールツァイス用 [LZSS-EPIL-485N]		
• ニコン用 [LNKN-EPIL-485N]		
ラック付き 15ml 遠心チューブ [SG-455.200]		
ラック付き 50ml 遠心チューブ [SG-745.400]		
ラベル		
• UN3373		
小 15 枚 [SPL-BS-01]		
小 50 枚 [SPL-BS-02]		
大 15 枚 [SPL-BL-01]		
大 60 枚 [SPL-BL-02]		
• セキュリティ		
• セキュリティ		
15 枚 [SPL-S-01]		
50 枚 [SPL-S-02]		
• ドライアイス (クラス 9) [SPL-D-02]		
• 病毒を移しやすい物質 (クラス 6)		
小 15 枚 [SPL-AS-01]		
小 50 枚 [SPL-AS-02]		
大 15 枚 [SPL-AL-01]		
大 60 枚 [SPL-AL-02]		
る		
ループシネレーター (電気滅菌器) [SL-21]		
ループスタンド [K 24C]		
れ		
冷却スパーサー (保冷剤立て) [SBE-CRT-C]		
ろ		
ロータ [RF-110]		
ロテータ (回転台) [SS-10]		
ロングスボイト 1cc		
• 滅菌 1 本包装 [20620]		
• 滅菌 10 本包装 [20622]		
数 字		
0.5%硫酸水		
• 15mL [SG-SULF-15]		
• 100mL [SG-SULF-100]		
2-6℃定温スパーサー (保冷剤立て) [SBE-CRT-CT]		
2%デオキシコール酸ナトリウム水溶液 [SG-2-DEOXY]		
3%過酸化水素水 [SG-H2O2]		
3%水酸化カリウム水溶液 [SG-3-KOH]		
10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液 [SG-10-DEOXY]		
500ml コンテナ/ロート、ラック (2 個入) [SDL251]		
1000ml コンテナ/ロート、ラック (2 個入) [SDL252]		
欧 文		
A		
<i>Acremonium</i> sp. [SDL675-01]		
<i>Alternaria</i> sp. [SDL673-01]		
<i>Aspergillus flavus</i> [SDL675-06]		
<i>Aspergillus fumigatus</i> [SDL675-07]		
<i>Aspergillus niger</i> [SDL675-09]		
C		
<i>Chaetomium</i> sp. [SDL673-03]		
<i>Chrysosporium</i> sp. [SDL675-16]		
<i>Cladosporium</i> sp. [SDL673-04]		
<i>Cryptococcus neoformans</i> [SDL671-03]		
<i>Curvularia</i> sp. [SDL673-05]		
D		
DF8 用タテ型専用台 [SMV-DF8ATD]		
DF8 用ボックス専用台 [SMV-DF8ABD]		
F		
<i>Fusarium</i> sp. [SDL675-18]		
G		
<i>Geotrichum candidum</i> [SDL671-04]		
H		
<i>Hansenula</i> sp. [SDL671-05]		
I		
i-4 LUMIN (落射蛍光顕微鏡・光学顕微鏡)		
• [LI4S-EPT4-ISL3]		
• [LI4S-EPT4-IPL3]		
L		
LUMIN 落射蛍光モジュール		
• オリンパス CX 用 [LOLY-EPIL-485N]		
• カールツァイス用 [LZSS-EPIL-485N]		
• ニコン用 [LNKN-EPIL-485N]		
M		
<i>M. gypseum</i> [SDL674-07]		
<i>M. vanbreuseghemii</i> [SDL674-08]		
Microvette 微量採血管		
• 100 K3E [20.1278.100.2]		
• 100 LH [20.1282.100.2]		
• 100 Z [20.1280.100.2]		
• 200 K3E [20.1288.100.2]		
• 200 LH [20.1292.100.2]		
• 200 Z [20.1290.100.2]		
• 200 Z-Gel [20.1291.000.2]		
N		
N95 マスク [SDD01-N95]		
N95 マスク (大人用) 1 枚/1 箱 [DD01-N95-1]		
P		
<i>Paecilomyces</i> sp. [SDL675-19]		
PCR メディア SG 4.3ml [SGFK-45]		
<i>Penicillium</i> sp. [SDL675-20]		
PYR ディスク [SDL-K1538B]		
Q		
Q control Multiplex control [RTX1QC]		
R		
<i>Rhizopus</i> sp. [SDL672-06]		
S		
SARS-CoV-2 Analytical Q Panel [SCV2AQP]		
SARS-CoV-2 Molecular Q Panel [SCV2MQP]		
SARS-CoV-2 Q Control [SCV2QC]		
<i>Scedosporium apiospermum</i> [SDL673-15]		
<i>Scedosporium prolificans</i> [SDL673-16]		
<i>Scopulariopsis</i> sp. [SDL675-32]		
<i>Sepedonium</i> sp. [SDL675-33]		
SPEED STERI [HY-1000]		
<i>Syncephalastrum</i> sp. [SDL672-09]		
T		
<i>T. ajelloi</i> [SDL674-09]		
<i>T. mentagrophytes</i> [SDL674-13]		
<i>T. rubrum</i> [SDL674-14]		
U		
UN3373 ラベル		
• 小 15 枚 [SPL-BS-01]		
• 小 50 枚 [SPL-BS-02]		
• 大 15 枚 [SPL-BL-01]		
• 大 60 枚 [SPL-BL-02]		
UV 照射ボックス「てあらいくん」 [GG-100]		
W		
<i>Wangiella dermatitidis</i> [SDL673-19]		
W チャック付スタンディングパウチ袋 [A-98]		
W チャック付パウチ袋		
• 小 [A-65]		
• 中 [A-92W]		
W チャックパウチシステム		
• 微好気 (W チャック+剤) [A-18]		
• ケンキ (W チャック+剤/指示薬各 20 +クリップ 1) [A-17]		

株式会社スギヤマゲン 公式YouTubeチャンネルのご案内

スギヤマゲンの公式YouTubeチャンネルでは、弊社製品の使い方を動画で解説しております。

<https://www.youtube.com/@user-uu5hp7nx5u>



⇐ QRコードからアクセスしてください
チャンネル登録、お願いいたします



感染症知識の扉

臨床現場や感染対策の現場の皆様にも少しでもお役に立てるような情報を発信しております。

弊社の学術担当「しもちゃん先生」こと霜島正浩がわかりやすく解説をしておりますので、ぜひご覧ください。

<https://www.youtube.com/@user-gi5te6rw2e>



⇐ QRコードからアクセスしてください
チャンネル登録、お願いいたします



沿革

- 1932年 創業者・杉山元吉が個人営業の「杉山元商店」開業。
ガラス投薬瓶、理化学器械等を販売。
- 1949年 法人組織化し、「株式会社杉山元医理器製作所」に改名。
- 1950年 肺結核治療器「野村式人工気胸器」を発売。
- 1971年 「株式会社杉山元医理器」に改名。
- 1970年代 公害測定器・水質測定器を開発、販売。
全ガラス製代謝ケージ「メタポリカ」を開発、販売。
各種シェーカーを開発、販売。
- 1980年代 ハイバキューム・ステンレス缶「キミツ」を発売。
非拘束ラット・マウス実験器具「フリームービング・カニキュレーション・システム」を発売。
- 1987年 杉山雄之介が代表取締役社長に就任。
- 1990年 三菱ガス化学株式会社製・嫌気培養剤「アネロバック」等の販売を目的として、「株式会社スギヤマゲン」を設立。
微生物関連、感染対策関連商品の取扱を開始。
- 1998年 業容拡大により商品管理室を文京区大塚に移転。
- 2005年 真空断熱材関連商品の取扱を開始。
医療用・バイオ研究用向けの保冷・保温容器を開発、発売。
- 2006年 株式会社杉山元医理器と株式会社スギヤマゲン2社の商品販売の窓口を株式会社スギヤマゲンに一本化。
杉山大介が株式会社スギヤマゲンの代表取締役社長に就任。
- 2008年 商品仕入窓口を株式会社スギヤマゲンに一本化。
- 2010年 臨床検体・治験検体輸送用IATA包装基準650適合95kPa耐圧パウチ「バリアパウチ」を開発、発売。
- 2011年 温度保持性能を大幅に向上させた真空断熱輸送容器「バイオボックス・プラス」を開発、発売。
シュレンクチューブの使用方法を解説した「シュレンクチューブ・テクニック」を発刊。
- 2015年 第三種医療機器製造販売業、医療機器製造業の資格を取得。
米国・ピューリタンメディカルプロダクツ社と医療用スワブ、輸送培地の日本国内総代理店契約を締結。
- 2017年 会社ロゴの刷新を行う。
- 2019年 物流・商品管理機能の強化・拡充のために、商品管理センターを墨田区太平に新設・移転。
- 2022年 杉山竜介が代表取締役社長に就任。



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン



〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目34番9号
TEL 03-3814-0285(代) FAX 03-3815-3045