

バリアパウチ (カテゴリー B (UN3373) 対応検体輸送容器)



「IATA 包装基準 650 (PI650) 適合」バリアパウチは
カテゴリー B の病原体、臨床検体や治験検体を安全に輸送できる 95kPa 耐圧パウチです。

品名	バリアパウチ A5R
品番	BRP-A5R
外寸	250×185mm
内寸	190×155mm
定価	5,600円 (20枚入)



品名	吸水シート	吸水バッグ 6 連
品番	BRP-ABS	BRP-AB6-B
寸法	250×330mm	318×123mm
定価	2,300円 (20枚入)	2,400円 (20枚入)

ポータブル恒温槽「エレキセル」(蓄熱剤レス)




サーモスタット搭載小型パネルヒーター
内蔵。
ご希望の温度設定を承ります。(1℃刻み)
蓄熱剤温度に左右されず、細胞等の求
める最適な温度で輸送可能。
RTCA/D0-160D Category M 適合

品名	エレキセル	エレキセル薄型
品番	SBE-ELC	SBE-ELCT
外寸	215×160×225mm	215×160×H175mm
内寸	190×150×100mm	160×115×H55mm
電池	単三電池×16本投入 (電池別売)	
定価	180,000円	170,000円



連結用電池ケース

品名	パワーブースター
品番	SBE-ELC-PB
定価	48,000円

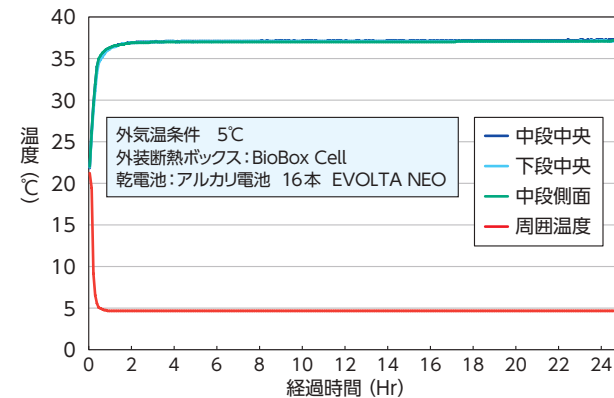

BioBox Cellに投入することで冬場 37℃24時間以上保持



品名	プレヒーター
品番	SBE-ELC-PH
定価	64,000円

輸送前の予熱、小型恒温槽として利用可能
到着後はコンセントに差し込むことで恒温槽への移し替えが不要!

ロガー関連



品名	G-MEN 衝撃・振動ロガー
品番	G-MEN DR20
定価	42,800円
記録間隔は 0.001 秒～ 30 分まで 温度・湿度も同時に記録可能	

*株式会社スリック

品名	USB PDFリユーズابلデータロガー	ドライアイス用 USB PDFリユーズابلデータロガー
品番	40510	40570
測定範囲	-40℃～ 50℃	-80℃～ 47℃
定価	15,000円	32,000円
※別途有料のソフトウェア (Flash PDF プログラムマネージャー) が必要です		



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン 機能容器事業部

〒130-0012 東京都墨田区太平 4-23-10 TEL. 03-6658-5282 FAX. 03-6658-5283

●価格、仕様につきましては予告なく改訂することがあります。 ●掲載のグラフは当社が行った温度試験の結果です。管理温度帯および維持時間を保証するものではありません。

スギヤマゲン 定温輸送



BioBox Cell

超高性能「小型」断熱輸送ボックス

BioBoxシリーズ史上 最小!
「ハンドキャリーに最適」



特許取得済み

「高性能真空断熱材 100%被覆構造」
真空断熱材の断熱能力値を最大限引き出す特許構造

真空断熱材を使用した断熱ボックスはありますが、真空断熱材の熱伝導率から期待するほどの性能がでないものが殆どです。100%被覆構造は、真空断熱材の熱リークを極限まで抑制し、極めて高い断熱能力を生み出す特許構造です。



株式会社スギヤマゲン

BioBox Cell 仕様&機能



品名	バイオボックス・セル
品番	SBE-P10
外寸	340×260×H340mm
内寸	250×175×H230mm
定価	46,000円

特徴

BioBoxシリーズ 史上 最小! 「ハンドキャリーに最適」

※真空断熱材搭載

細胞・組織、検体、試薬、医薬品、
あらゆる温度帯への
定温輸送に対応 (-80℃～+40℃)



短距離～長距離 各輸送時間に対応

落下衝撃・振動軽減オプションあり

蓄熱剤レス
ポータブルインキュベーター対応可能

※オプションにて

鍵対応ファスナー

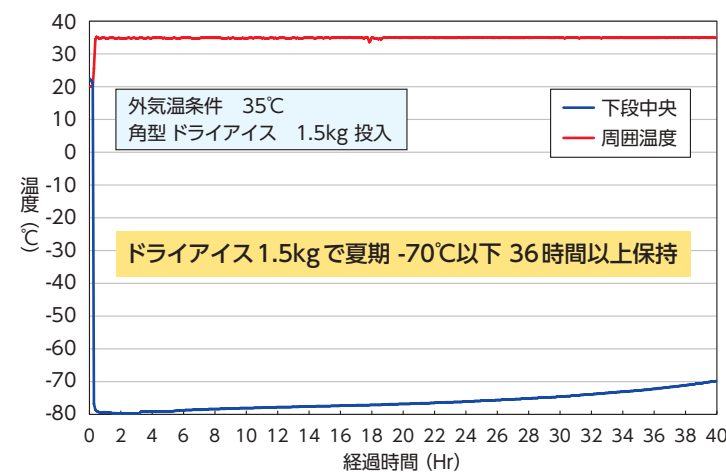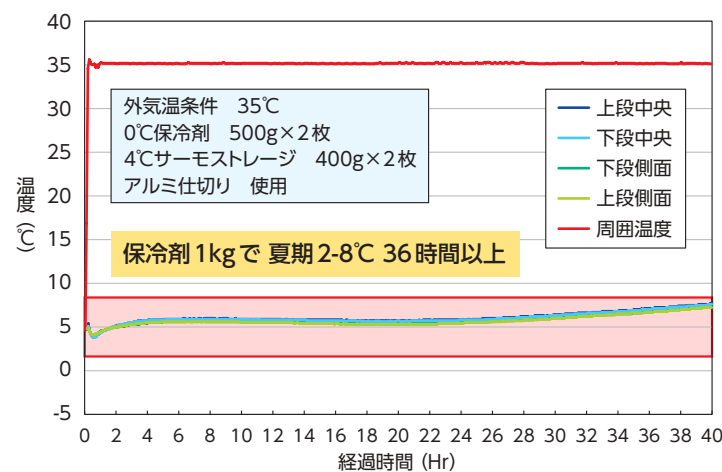

※対象物の配置箇所により温度推移が変わる場合がございます

BioBox Cell 指定温度維持ユニット



品名	クールラボ3 480g
品番	CL-3-480
融点	3℃
寸法	220×140×H20mm
定価	1,800円



品名	アルミ仕切り
品番	SBE-P10-C
内寸	143×170×H179mm
定価	7,500円


蓄冷熱剤との距離を確保し、庫内温度分布の均一化を図ります。



品名	サーモストレージ4 400g	サーモストレージ4 250g	サーモストレージ20 400g
品番	TP-4-400	TP-4-250	TP-20-400
寸法	170×220mm	145×200mm	170×220mm
定価	3,000円	2,800円	3,200円

4℃前後の温度管理が必要な輸送に使用します。

20℃前後の温度管理が必要な輸送に使用します。

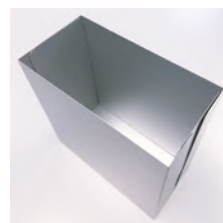

品名	アルミ仕切り
品番	SBE-P10-D
内寸	170×75×H172mm
定価	6,500円

蓄冷熱剤との距離を確保し、庫内温度分布の均一化を図ります。

Cell ステージ (落下衝撃吸収ユニット)


BOX本体下部に取り付けることによって、落下時の衝撃を吸収・軽減し、輸送物を強い衝撃から守ります。
素材の柔軟性と強度のバランスにより幅広い落下角度からの衝撃に対応しています。



品名	Cellステージ
品番	SBE-P10-S
寸法	340×270×H55mm
定価	6,000円



輸送中BOXが衝撃を受けた場合を想定し、加速度 (G 値) を測定。

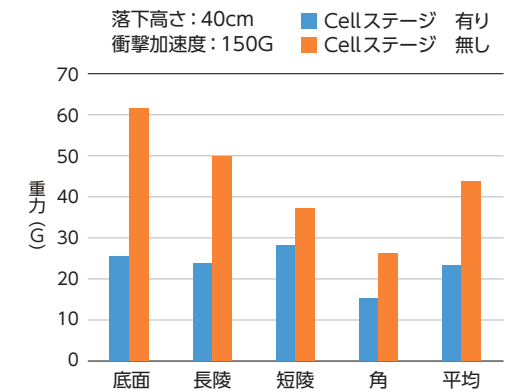

試験実施: 群馬県産業技術研究センター


固定フィルム (輸送物の固定・振動軽減)

輸送対象物の固定フィルムです。極めて高い耐摩耗性・弾力性を有し、再生医療製品等、デリケートな輸送物に対しての振動の軽減、固定による輸送条件の均一化が可能です。



品名	固定フィルム
品番	SBE-P10-F
寸法	238×167×5mm
定価	2,900円 (3個)

JIS0232に準拠したランダム振動試験を15分間行い、加速度 (G 値) を測定。

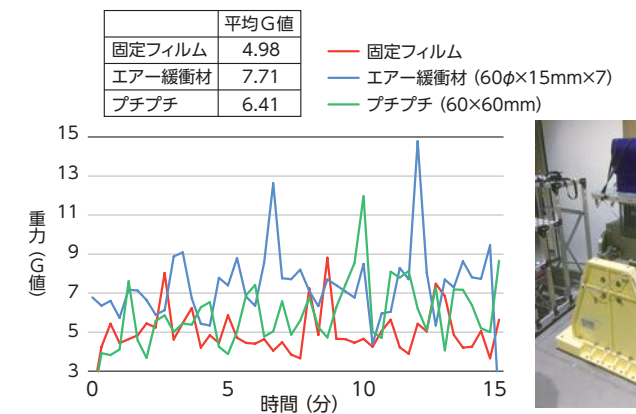

※緩衝材は種類、投入量、設置箇所等の条件により結果が異なります。
試験実施: 群馬県産業技術研究センター


iP-TEC® 細胞・生体組織の (非凍結) 輸送デバイス *株式会社サンプラテック



品名	iP-TEC® ウェルプレートカバー (1枚)			
呼称	6ウェル用	12ウェル用	24ウェル用	96ウェル用
品番	28488	28490	28492	28494
寸法	140×97×H10mm			140×97×H6mm
定価	3,000円	3,000円	3,000円	3,000円



品名	iP-TEC® 二次容器	
品番	28516	
寸法	192×150×H40mm	
定価	8,000円	

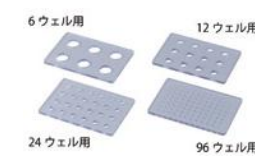

品名	iP-TEC® ウェルプレートカバー押さえ板 (1枚)			
呼称	6ウェル用	12ウェル用	24ウェル用	96ウェル用
品番	28496	28498	28500	28502
寸法	128×85×H5mm			
定価	5,000円	5,500円	6,000円	10,000円



品名	iP-TEC® 二次容器専用網状クッション	
呼称	20mm厚	30mm厚
品番	28530	28531
寸法	130×90mm	130×90mm
定価	500円	500円



品名	iP-TEC® フラスコ-25 ベントキャップ付き	
品番	28642	
寸法	30ml (1袋5個入×10)	
定価	48,000円	